


AQUA PEEL CLEAR 2 PRO

アクアピールクリア 2 PRO

－ 家庭用美顔器 －

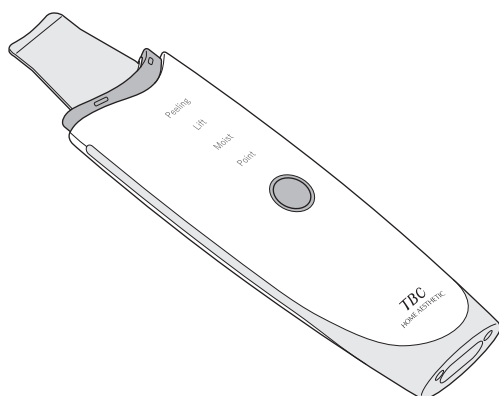

もくじ

安全上のご注意	1
使用上のお願い	5
おすすめの化粧品	5
各部の名称	6
各モードの内容・使用頻度	7
使い方の流れ	8
アクアピールクリア 2 PROを使う ...	9
よくあるお問い合わせ	14
故障かな？と思ったら	16
製品仕様	17
保証とアフターサービス	18
保証書	裏表紙

安全

確認

使い方

必要なとき

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ・本製品は、超音波、イオンケア、EMS、マイクロカレントを使用した家庭用美顔器です。
- ・本製品を正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

特に、「安全上のご注意」(P1～4)はご使用前に必ずお読みください。

- ・本書は、いつでも確認できる場所に大切に保管してください。
- ・本製品を譲渡する場合は、本書を必ず一緒に渡してください。

安全上のご注意

人への危害や財産の損害を防ぐために、必ずお守りください。

■ 危害レベル

誤った取り扱いにより生じる危害や損害の程度に応じ、次のように区分しています。

 危険	 警告	 注意
死亡や重傷を負うおそれが大きいもの	死亡や重傷を負うおそれがあるもの	軽傷や財産の損害のおそれがあるもの

※財産の損害とは、家屋、家財、および家畜・ペットへの拡大損害のことです。

■ 図記号

 禁止	してはいけないこと	 必ず実施	しなければならないこと
--	-----------	---	-------------

 危険

■ 医療用電子機器の誤作動を防ぐために

使用者


禁止

● 次の医療用電子機器を使用している場合は、本製品を使用しない

- ・ペースメーカー等の体内植込型医療用電子機器
- ・人工心肺等の生命維持用医療用電子機器
- ・心電計等の装着型医療用電子機器

警告

■ 感電、火災、ショート、事故、ケガ等を防ぐために

使用全般



禁止

- 改造、分解、修理しない
- 火への投入、加熱、高温や高湿になる所*、ほこりっぽい所で
の使用・充電・放置はしない
リチウムイオン電池の破裂、発熱、発火、感電の原因
※ストーブやヒーターの近く、車の中、直射日光のあたる所、サウナ等
- 重いものを乗せたり強い衝撃を与えたり、落下しやすい所に置かない
リチウムイオン電池の破裂、発熱、発火、故障、動作不良の原因
- 専用充電ケーブルを傷めない
例：引っ張る、無理に曲げる、重いものを乗せる等
- ACアダプター(市販)や専用充電ケーブルは、水につけたり水をかけたりしない
- 水中に落とさない

使用前



禁止

- ACアダプター(市販)や専用充電ケーブルが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
- ぬれた手でACアダプター(市販)や専用充電ケーブルを抜き差ししない
- 水分や化粧品がついている状態で、充電しない
- タコ足配線の状態で充電しない



必ず実施

- AC100～240Vの電源から充電する
- 充電時は、専用充電ケーブル(付属)と5V／1Aに対応したACアダプター(市販)を使用する
- 充電後は、ACアダプター(市販)をコンセントから抜く
- ACアダプター(市販)を抜き差しするときは、専用充電ケーブルではなくACアダプターを持つ

使用中



禁止

- 美容以外の目的に使用しない
- 使用中は、電気製品に接触させたり熱源に近づけたりしない
- ほかの電気美容器と同時に使用しない

安全

確認

使い方

必要なとき

安全上のご注意



■ 感電、火災、ショート、事故、ケガ等を防ぐために

使用中	 必ず実施 ●異常・故障時はすぐに使用を中止し、電源を切る 例：電源を入れても作動しない、本体が異常に熱い・焦げ臭い、異常な音がする、専用充電ケーブルを動かすと通電したりしなかったりする ●肌に異常を感じたり、気分が悪くなったり、めまい等を感じた場合は、すぐに使用を中止して医師に相談する
使用后	 必ず実施 ●本体のお手入れ時は、電源を切る ●子ども（12歳未満）の手の届かない所に保管する

■ 肌等、体にかかわるトラブルを防ぐために

使用者	 禁止 ●次に該当する場合は使用しない ・12歳未満・急性疾患・発熱中・高血圧・感染性疾患・悪性腫瘍 ・糖尿病・内臓疾患・血液疾患・皮膚病・皮膚アレルギー ・敏感肌または肌が弱い・体調がすぐれない・酒気帯び・生理中、妊娠中 ・医師に処方された薬を服用している・自分で意思表示できない ・知覚・痛覚・温度感覚の障害・頭部や目に事故の後遺症がある ・顔面の神経障害・目の治療中（レーシック等を含む）・歯の治療中 ・上記以外で医師の治療を受けている
使用部位	 禁止 ●次の部分には使用しない ・使用目的部位以外・目の上（上まぶた、眼球の上等）・のど ・外科手術をした・日焼けをした・当日に脱毛や除毛をした ・静脈瘤がある・色素に異常がある（ホクロ、シミ、肝斑、白斑等） ・皮膚に異常がある（傷、湿疹、腫れもの、かゆみ、ほてり、ケロイド等） ・美容施術を受け、ダウンタイム（回復に要する時間）が必要 ・金属、シリコン等の器具を埋め込んでいる・銀歯、インプラント等の真上 ・刺青（タトゥー、アートメイク）とその周辺・顔そり直後 ・本製品以外による物理的ピーリングやケミカルピーリングの直後
	 必ず実施 ●使用の可否を自己判断できない場合は、医師に相談する

△ 注意

■ 事故、ケガ、肌トラブル等を防ぐために

使用全般



禁止

- ペットには使用しない

使用前



禁止

- 本体やヘッドを確認し、異常*がある場合は使用しない
※破損、変形、変色
- 使用部位の肌の状態を確認し、異常がある場合は使用しない



必ず実施

- 長期の保管後は、正常に動作することを確認してから使用する

使用中



禁止

- 同じ部分に短時間で繰り返し使用しない
- 過剰な連続使用、業務用としての使用はしない
業務用に使用した場合は、修理をお受けできません。
- 使用できる化粧品 (P5) または水以外は使用しない
- ヘッドで肌を強くこすらない
- オートオフ時間以上は使用しない



必ず実施

- ヘッドと肌の間に、常に水分がある状態で使用する

使用后



禁止

- 流水にあて続けない
感電、ショート、発火の原因
- 水分がついたまま放置しない
感電、ショート、発火の原因

安全

確認

使い方

必要なとき

使用上のお願い

故障等を防ぐために

本製品の故障、動作不良、破損等を防ぐために、次のことをお守りください。

屋内で使用・保管する

※浴室等の湿気の多い場所に、長時間保管しないでください。

使用後は、毎回必ずお手入れする

※アルカリ性洗剤、アルコール、シンナー、ベンジン、除光液等の溶剤でふかないでください。(表面の破損の原因)

※本体・専用充電ケーブルの充電端子部、ヘッドは、汚れや水分等を確実にふきとってください。

使用中以外は、必ずキャップをする

廃棄するとき

リチウムイオン電池を含む製品として、お住まいの地域の自治体のルールに従ってリサイクル・廃棄する



おすすめの化粧品

本製品は、必ず水または化粧品(化粧水・ジェル・美容液のいずれか)を肌に塗って、使用してください。

- ・油分を含むものや刺激の強いものは使用できません。
- ・モードによって、おすすめの化粧品(または水)は異なります。


使用できない化粧品

クレンジング・洗顔料・石けん類・乳液・スクラブ系化粧品・クリーム・オイル

モード	おすすめの化粧品または水(おすすめ順)
ピーリング	水＞化粧水＞ジェル・美容液
リフト	ジェル＞化粧水・美容液＞水
モイスト	化粧水＞ジェル・美容液 ※水は使用できません。
ポイント	化粧水＞ジェル・美容液＞水


各部の名称

本 体

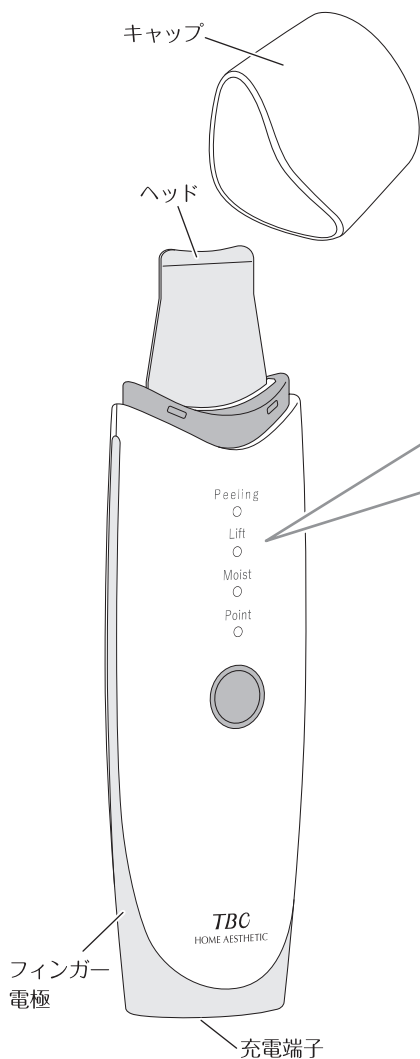

操作・表示部


- Peeling
○———ピーリングモードランプ
- Lift
○———リフトモードランプ
- Moist
○———モイストモードランプ
- Point
○———ポイントモードランプ

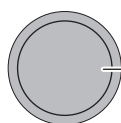

- 電源／モードボタン
- 電源のオン・オフ
(1秒以上長押しする)
 - モードの選択
(短く押す)

付属品

- 専用充電ケーブル

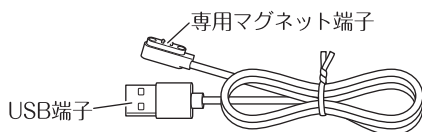


- 取扱説明書(本書)

ACアダプターは付属していません。
以下の条件を満たす市販品を
ご使用ください。

- PSEマークがついている。
- USB Type-A端子を接続できる。
- 5V／1Aの出力(OUTPUT)に対応している。

※上記条件以外のACアダプターを使用した
場合、無償修理の対象外となります。

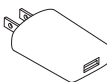





安全

確認

使い方

必要なとき

各モードの内容・使用頻度

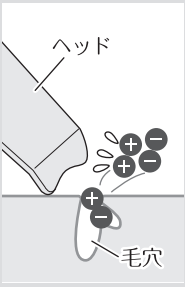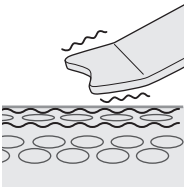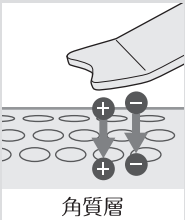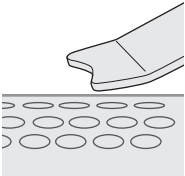
モード オートオフ時間	使用目的	推奨 使用頻度※3
ピーリング 約3分	毛穴の汚れ、黒ずみ、肌のざらつきが気になるときに。 ヒーターであたためながら、肌表面の古い角質や汚れをイオンケアで吸着※1し、超音波の振動で除去します。 ※1 プラス／マイナスの2極が切り替わるイオンケアで、プラスまたはマイナスに帯電した汚れを吸着します。	 週1回
リフト 約5分	肌のゆるみが気になるときに。 超音波の微弱な振動、電気刺激(EMS)、ヒーターで、肌をひきしめます。	 2日に1回
モイスト 約5分	肌の乾燥が気になるときに。 超音波の振動、イオンケア、ヒーターで、化粧品の浸透※2をサポートします。 ※2 角質層まで	 1日に1回
ポイント 約2分	目元・口元等、気になる所に。 微弱な電流(マイクロカレント)とヒーターで、肌のケアをサポートします。	 1日に1回

※3 使用頻度の目安です。毎日使用する場合は、使用部位の肌を注意深く確認してください。
・複数のモードを連続して使用するときは、ピーリング→リフト→モイスト→ポイントの順がおすすめです。

使い方の流れ


準備

充電する (P9)

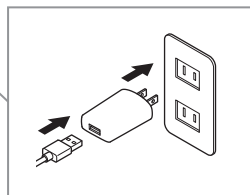


肌の準備をする (P9)

キャップを外す (P9)

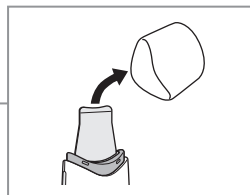


電源を入れる (P10)

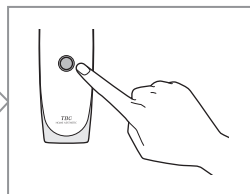


モードを選ぶ (P10)

トリートメントをする (P11 ~ 12)

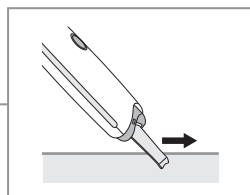


モード選択から一定時間後、
自動的に電源が切れる (P13)

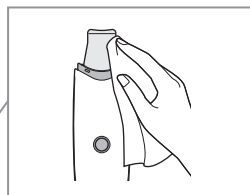

お手入れする (P13)

キャップをする (P13)

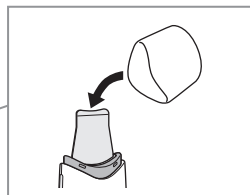

使用

使用后

安全

確認

使い方

必要なとき

アクアピールクリア 2 PRO を使う


1 充電する

① ACアダプター(市販)を準備する

ACアダプターの条件は(P6)

② 接続し、充電する

充電ケーブルが本体から外れないように注意してください。(マグネット式のため)

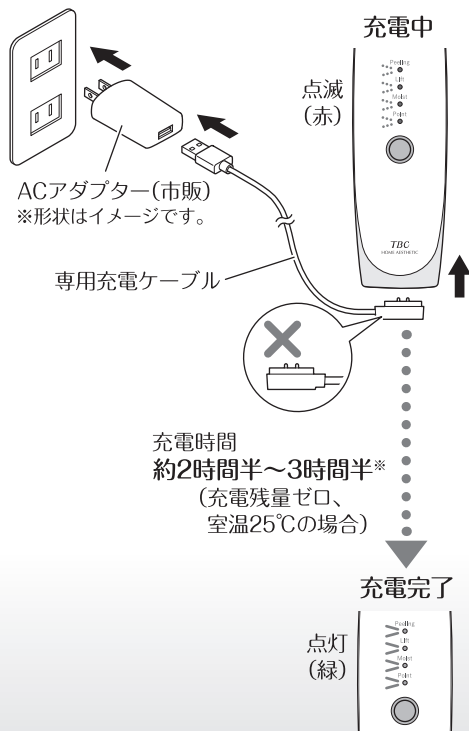

※充電残量や充電環境によって、充電時間は前後します。

③ ACアダプターと専用充電ケーブルを抜く

全ランプが消灯します。

2 準備する


① メイクを落とし、洗顔する

クリーム等を使用している場合は、洗浄料を使用して十分に洗い流してください。

② 水または化粧品を肌に塗る

- 肌の表面を十分に湿らせてください。
- おすすめの化粧品や使用できない化粧品は(P5)

③ キャップを外す

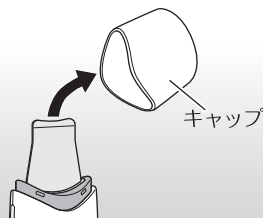

警告

水分や化粧品がついたまま、
充電しない

NOTE

- 室温5～35℃の場所で充電してください。
- 初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、満充電でも短時間しか使用できないことがあります。その際は再度充電してください。
- パソコンに接続して充電しないでください。本製品の接続によって生じた損害(データ消失・故障等)に関して、いかなる場合でも当社は一切責任を負いません。
- 満充電後に連続使用した場合、約45分使用できます。(使用時の室温が25℃の場合)
※使用するモードや使用環境によって、時間は前後します。

3




1秒以上長押しして、
電源を入れる



■「ピーピーピッ」という音が鳴ったとき
充電残量が少なくなっています。(使用可能時間が10分未満)

■「ピッピッピッ」という音が鳴ったとき
充電が切れそうです。全ランプが5回点滅(赤)し、自動的に電源が切れます。

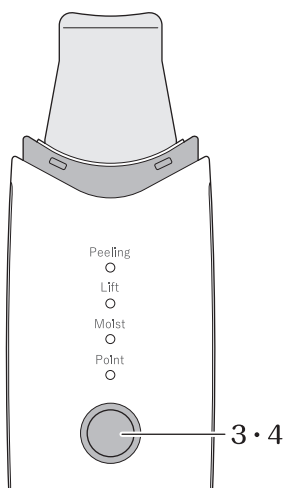

4



短く押して、
モードを選ぶ

- 押すたびに、モードが切り替わります。
- 各モードの内容は(P7)
- どのモードでも、ヒーターによりヘッドが自動的にあたたまります。(ヒーターを切ることはできません)



安全

確認

使い方

必要なとき


アクアピールクリア 2 PRO を使う

5 トリートメントをする

ピーリングモード


■ 肌へのあて方

ヘッドの先端をあて、肌の表面を滑らせてください。

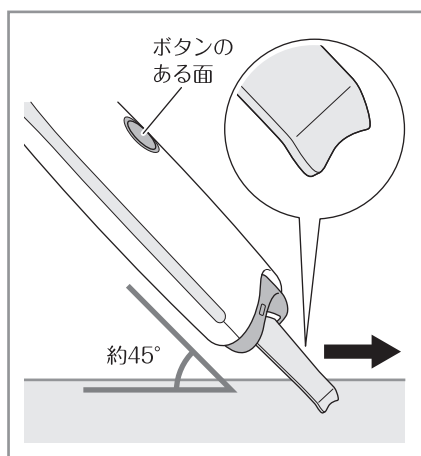

■ 動かし方

約3分(顔全体で)

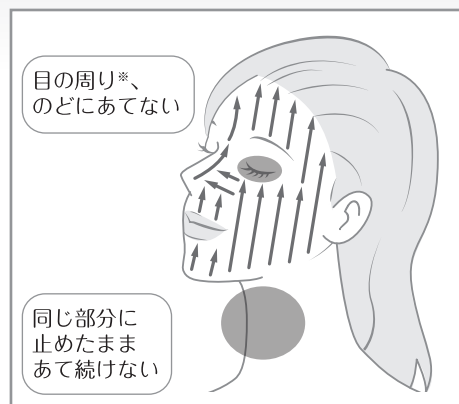


※上まぶた、眼球の上等を含みます。

- ・最初の約90秒間はプラスに帯電した汚れ、残りの約90秒間はマイナスに帯電した汚れが除去されます。
- ・マイナスとプラスが切り替わるときに、「ピピッ」と音が鳴ります。

NOTE

- 使用中は、両側のフィンガー電極に指先や手のひらがしっかりと触れるように持ってください。(イオンケア・EMS・マイクロカレントを正常に機能させるため)
- ヘッドが滑りにくくなってきたら、水または化粧品を塗り足してください。
- 本製品は、浴室でも使用できます。


フィンガー電極

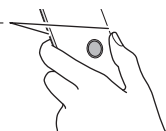

リフトモード／モイストモード／ポイントモード

■ 肌へのあて方

ヘッド先端の平らな面をあて、肌の表面を滑らせてください。

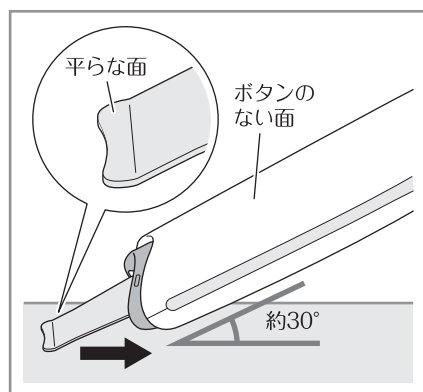

■ 動かし方

- リフトモード
- モイストモード

約5分 (顔全体で)

約5分 (顔全体で)

目の周り*、
のどにあてない

引き上げる
ように

同じ部分に
止めたまま
あて続け



※上まぶた、眼球の上等を含みます。

- ポイントモード

約2分

額、上まぶた、
眼球の上、
のどにあてない

引き上げる
ように

同じ部分に
止めたまま
あて続け



水中に落とさない



注意

流水にあて続け

安全

確認

使い方

必要なとき

アクアピールクリア 2 PRO を使う

6 モード選択から一定時間後※、自動的に電源が切れる

※ピーリングモードでは約3分後、リフトモード／モイストモードでは約5分後、ポイントモードでは約2分後に電源が切れます。

Peeling



Lift



Moist



Point



ランプ消灯

ピッ
×5回

■ 途中で電源を切るとき



1秒以上
長押しする ▶ ランプ
消灯

ピー




浴室等、高湿になる所に
保管しない

7 お手入れして片づける

① 表面についた化粧品や水分等をふきとる

- 特に、本体・専用充電ケーブルの充電端子部、ヘッドは、汚れや水分等を確実にふきとってください。

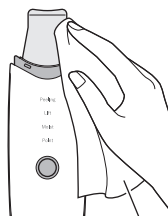


柔らかい布

■ 汚れがひどいとき

薄めた中性洗剤をスポンジや柔らかい布、ティッシュペーパー等に含ませて、汚れをふきとってください。その後、水分等をふきとってください。

- アルカリ性洗剤、アルコール、シンナー、ベンジン、除光液等の溶剤でふかないでください。

② キャップをする

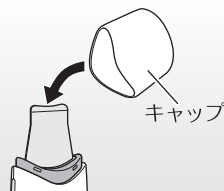

キャップ

③ 風通しの良い場所で乾かしてから、屋内に保管する

- 直射日光にあてないでください。

よくあるお問い合わせ

Q 使用できない部位はある？

A モードによって、使用できない部位は異なります。
P11～12のイラストを確認してください。

Q 敏感肌かどうか、わからない

ご使用前に使用部位の肌の状態を確認し、異常がなければ
ご使用いただけます。

A

- ・「敏感肌」とは、ささいな刺激に対してピリピリとした痛みやかゆみ、赤み等を引き起こす状態のことで、個人差があります。
- ・使用中に肌に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止して医師に相談してください。

Q お風呂でも使えるの？

本体は防水仕様のため、ご使用いただけます。

A

- ・シャワー等の強い流水をかけたり、水中に沈めたりしないでください。(感電、発火、ショートの原因)
- ・付属品は浴室に持ち込まないでください。

Q どんな化粧品を使えばいいの？

油分を含まないものであれば、お手持ちの化粧水・美容液・
ジェルをご使用いただけます。

A

- ・モードによって、おすすめの化粧品は異なります。(P5)
- ・肌トラブルや故障の原因になるため、ご使用いただけないものもあります。(P5)

安全

確認

使い方

必要なとき

よくあるお問い合わせ

Q 化粧品は、どのくらい塗ればいいの？

肌の表面を十分に湿らせてから、ご使用ください。

A ・肌が乾いた状態では、超音波や電気刺激 (EMS) が肌に伝わりにくくなったり、ヘッドが滑りにくくなります。使用中に滑りにくくなった場合は、水または化粧品を肌の表面が十分に湿る程度に塗り足してください。

Q 何歳から使えるの？

A 保護者の同意・監督のもと、12歳からご使用いただけます。

Q 毎日使ってもいいの？

A モードによって、おすすめの使用頻度は異なります。(P7)

Q 海外でも使えるの？

日本国内用に設計されているため、海外の気候条件・水質条件等は考慮されていません。

A 使用するACアダプターの対応状況も含めてご確認のうえでご判断ください。

・海外で使用した場合、無償修理・アフターサービスは適用されません。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、まずご確認ください。

状 態	ここを確認
充電できない	- 専用充電ケーブルは、指定のACアダプター (P6) に奥まで差し込んでいますか？ - 充電電池 (リチウムイオン電池) が寿命により消耗している可能性があります。(寿命の目安：充電回数 約300回)
充電しても使用可能時間が極端に短い	- 初めて使用するときや長時間使用しなかったときは、満充電でも短時間しか使用できないことがあります。 ➡再度充電してください。 - 充電電池 (リチウムイオン電池) が寿命により消耗している可能性があります。(寿命の目安：充電回数 約300回)
刺激が感じられない、弱く感じる	- 肌の表面の水分が少なかったり、乾燥していませんか？ ➡水または化粧品を塗り足して、十分に湿らせてください。 - ヘッドの先端が肌に密着していますか？ - 体感には個人差があります。
刺激が痛い、強く感じる	ヘッドを肌に強く押し付けたり、肌を強くこすっていませんか？ ➡肌の上を軽く滑らせるように、動かしてください。
使用中、肌がピリピリする	肌の表面の水分が少なかったり、乾燥していませんか？ ➡水または化粧品を塗り足して、十分に湿らせてください。 ※症状がひどいときは、すぐに使用を中止してください。
使用中、肌が赤くなる、熱くなりすぎる	ヘッドを同じ部分にあて続けていませんか？ ➡肌の上を軽く滑らせるように、動かし続けてください。 ※症状がひどいときは、すぐに使用を中止してください。
使用中に、勝手に電源が切れた	- 安全のため、モード選択後に一定時間*が経過すると、自動的に電源が切れます。(オートオフ機能) ※ピーリングモード：約3分後、リフトモード／モイストモード：約5分後、ポイントモード：約2分後 - 充電が切れていませんか？ 充電が切れているときに電源を入れると、「ピピピピッ」という音が鳴って全ランプが5回点滅 (赤) し、自動的に電源が切れます。
使用中、「キーン」という音がする	超音波による振動が、骨伝導によって響いて聞こえる場合があります。 ※音がひどく、気分が悪くなるときは、すぐに使用を中止してください。

安全

確認

使い方

必要とき

製品仕様

定格電源	DC5V 1.0A
使用電池	リチウムイオン充電電池 3.7V 700mAh - 充電時間：約3.5時間（充電残量ゼロ、室温25℃の場合） - 満充電時の使用可能時間：約45分
消費電力	約2W（充電時）
製品サイズ	約 W45×D26×H157（mm）※キャップ含む
製品質量	約110g ※キャップ含む
動作条件	温度：5～43℃ 湿度：30～100%RH
充電条件	温度：5～35℃ 湿度：10～90%RH（結露なきこと）
保管条件	温度：－10～55℃ 湿度：10～90%RH（結露なきこと）
材質	ABS、PC、ステンレス、シリコン
防水	IPX6

※本製品の性能・操作性向上のため、設計、仕様、付属品は、予告なく変更される場合があります。
本書は製品開発にさきがけて印刷しているため、本書の記載と製品自体の仕様等が異なる場合は、製品自体の仕様が優先されます。

※本製品は日本国内用に設計・販売しているため、製品の無償修理・アフターサービスの対象は、日本国内のみです。

愛情点検

長年ご使用の製品の点検を！

	こんな症状はありませんか？	- 電源を入れても作動しない。 - 本体が異常に熱い、焦げ臭い。 - 異常な音ができる。 - 専用充電ケーブルを動かすと、通電したりしなかったりする。 - その他の異常がある。		ご使用中止	故障・事故防止のために電源を切って、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。
--	---------------	--	---	-------	--

保証とアフターサービス

1. 本製品には、本書の裏表紙に保証書がついています

保証内容をよくお読みになって大切に保管してください。所定事項の記入がない、またはシート、明細書、注文履歴の印刷物等の貼付がないと保証は有効となりません。

2. 保証期間中に修理を依頼されるときは

本書をよくお読みいただき、本製品に異常がある場合は、お買い上げの販売店に保証書をご提示のうえ、修理を依頼してください。保証書の規定に基づき、無償、または有償で修理させていただきます。

3. 保証期間後に修理を依頼されるときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により本製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有償で修理させていただきます。

4. 補修用性能部品について

発売元では、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造終了後、最低6年間保有しております。

5. 本製品使用中、万一不具合により使用できなかったときは

そのことによる損失の補償、または使えなかったことによる付随的損害の補償については、その責任を負いかねますのでご容赦ください。

●個人情報のお取り扱いについて

本製品の修理等に際してご予約するお客様のお名前、ご住所、お電話番号等の個人情報は適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託の場合、および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客様がお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただく場合があります。

＜利用目的＞

商品・サービスにかかわるご相談、お問い合わせ、および修理の対応にのみ利用させていただきます。

＜業務委託の場合＞

上記目的の範囲内で対応業務を委託する際、委託先に対しては発売元と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切に管理・監督いたします。

■ お問い合わせ先

発売元

エステティックTBC

〒163-0655

東京都新宿区西新宿1-25-1

お客様相談室 ☎ 0120-801-272

保証書

持込修理

品名	家庭用美顔器	型番	HA-AP02-PR	製品名	アクアピールクリア2 PRO		
無償修理保証	対象部分			期間			
	機器本体			お買い上げ日から1年間			
※お買い上げ日	年 月 日						
※お客様 (ご購入者様)	ご住所 〒 お名前 様						
※販売店	住所・販売店名・電話番号 お買い上げ日のわかる明細を貼付 または本保証書と併せて保管してください。						

●お客様（ご購入者様）へお願い

- 本書の※印欄にご記入のうえ、保管してください。
- 「レシート」「お買い上げ明細書」「ご注文履歴の画面印刷」など、お買い上げの履歴がわかるものを本書と一緒に保管してください。
- お買い上げ日、お客様名（ご購入者様名）、販売店名の確認が取れない場合、本書は有効となりません。（贈答品として譲り受けた場合でも、お買い上げの履歴を確認させていただきます）
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、お買い上げの販売店または発売元に直接お問い合わせください。

発売元

エステティックTBC

〒163-0655

東京都新宿区西新宿1-25-1

お客様相談室 ☎ 0120-801-272

保証規定

本書は、お買い上げ日より保証期間内において、正常な使用状態で故障が発生した場合、本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記をご覧ください。

- 保証期間中、取扱説明書等の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げの販売店に修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。お買い上げの販売店が無償修理いたします。
- 保証期間中、無償修理等のアフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または発売元へお問い合わせください。
- 次のような場合には、保証期間中でも有償修理になります。
 - 本書のご提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記載がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。（レシート・明細書等がなく、お買い上げ年月日の確認が取れない場合）
 - ご使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および損傷。

- お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷。
 - 火災、地震、風水害、雷、その他天災地変、塩害、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - 本製品以外の他の機器によって生じた故障および損傷。
 - 一般家庭以外（業務用として長時間使用する等）に使用された場合の故障および損傷。
- 下記の部品は消耗品です。保証期間内でも有料となります。
 - 専用充電ケーブル
 - 本製品は持込修理の対象商品です。保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様のご負担となります。
 - この保証書は、本書に明示した期間の条件のもとにおいて、無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
 - 本書は、日本国内においてのみ有効です。

初版 2025年9月