

HEAT CAVI SHAPE 2 PRO

ヒートキャビシェイプ2 PRO

- 家庭用複合美容器 -



もくじ

1	安全上のご注意	1
2	本体と付属品・各部の名称	6
2.1	本体と付属品	6
2.2	各部の名称と働き	7
3	ヒートキャビシェイプ2 PROの基本	10
3.1	ヒートキャビシェイプ2 PROの特長	10
3.2	使用できる部位・使用頻度	12
3.3	使用の流れ	13
4	使用する前に	14
4.1	本体を充電する	14
4.2	化粧品を準備する	15
5	ヒートキャビシェイプ2 PROを使う	16
5.1	使い方	16
5.2	ボディモードのトリートメント方法	20
5.3	フェイスモードのトリートメント方法	24
6	使用の後に	25
7	こんなときは	27
7.1	エラー表示	27
7.2	困ったときは	28
7.3	よくあるご質問	30
8	製品仕様	32
9	保証とアフターサービス	33

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ・本製品を正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- ・**ご使用前に必ず「安全上のご注意」(P1~5)をお読みください。**
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも確認できる場所に大切に保管してください。
- ・本製品をほかの人に譲渡する場合は、この取扱説明書を必ず添付してください。

1 安全上のご注意

- 本製品は、ボディ、フェイスの美容を目的とするキャビテーション、EMS、RF、近赤外線、LEDを搭載した家庭用複合美容器です。目的以外の用途には使用しないでください。
- 本製品のご使用前に、必ずこの「安全上のご注意」、および取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 「安全上のご注意」には、安全に関する重要な内容を記載しておりますので、必ずお守りください。
- 異常を感じたら、直ちに使用を中止して、電源をお切りください。

注意区分について

本書では、文章と図記号を用いて安全に関する情報を表示します。安全に関する情報は、人身への危害と財産への損害の程度を、「危険」、「警告」、「注意」に区分して表示します。

 危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定されるもの。
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定されるもの。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害*が発生したりすることが想定されるもの。

*物的損害とは、家屋、家財、および家畜・ペットへの拡大損害のことです。

図記号の例

	してはいけないことを示しています。		しなければならないことを示しています。		注意しなければならないことを示しています。
--	-------------------	--	---------------------	--	-----------------------

危険

使用者



- 次の医療用電子機器を使用している場合は、本製品を使用しない医療用電子機器が誤作動する原因
 - ペースメーカー等の体内植込型医療用電子機器
 - 人工心肺等の生命維持用医療用電子機器
 - 心電計等の装着型医療用電子機器

警告

使用者



禁止

- 次に該当する場合は使用しない
肌等体にかかわる事故やトラブルの原因
 - 医師の治療を受けている ●12歳未満 ●急性疾患 ●結核性疾患
 - 発熱している ●高血圧 ●伝染性疾患 ●悪性疾患 ●アレルギー体質
 - 内臓疾患 ●皮膚病 ●アトピー性皮膚炎 ●敏感肌または肌が弱い
 - 疲労している ●肌にトラブルがある ●体調がすぐれない ●酒気帯び
 - 眠気をさそう薬を服用している ●妊娠中、出産直後
 - 物理的刺激等による病的なシミがある ●糖尿病 ●心臓疾患 ●血液性疾患
 - ステロイド等の薬を継続的に使用している
 - 肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている
 - 自分で意思表示できない ●温度の感覚が鈍い
 - 光過敏性てんかん・光過敏症等、光に関する疾患がある
 - 光過敏症等になりやすい薬（貼り薬、塗り薬を含む）を使用している
- 次に該当する場合はフェイスに使用しない
肌等体にかかわる事故やトラブルの原因
 - 頭部や目に事故の後遺症がある ●目の手術を行った ●網膜剥離
 - 顔面の神経障害 ●歯の治療中

使用部位



禁止

- 次の部分には使用しない
肌等体にかかわる事故やトラブルの原因
 - 指定以外の部分 ●上まぶた等目の上 ●鼻 ●口 ●のど ●心臓の真上
 - ひじ、ひざ、鎖骨、額等の皮膚の薄い部分 ●骨のすぐ上 ●ヘソの真上
 - 静脈瘤のある部分 ●外科手術（美容整形も含む）をした部分
 - 過度に日焼けをした部分 ●当日に脱毛や除毛をした部分
 - 脱毛処理後（当日に限らない）の赤み等がある部分 ●ピーリング直後の部分
 - 金属、シリコン、プラスチック等の器具を埋め込んでいる部分
 - 皮膚炎のある部分 ●ウイルス性のイボのある部分
 - 傷、湿疹、腫れもの、ケロイドのある部分
 - 痛覚、知覚障害を起こしている部分 ●刺青（タトゥー）とその周辺部分



必ず
実施

- 自己判断できない場合は、医師に相談する

使用全般

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ■改造、分解、修理しない 感電、発火、異常動作によるケガの原因 ■火中投入、加熱、高温になる場所での使用や放置はしない 発熱、発火、破裂の原因 ■屋外、直射日光の下で使用しない 故障、動作不良の原因 ■ACアダプターのコードを引っ張ったり、ぬれた手でACアダプターの金属部分を触ったりしない 感電、発火、ショート、断線の原因 ■ACアダプターのコードを無理に曲げたり、重いものを乗せたりしない 感電、発火、ショート、断線の原因 ■ACアダプターを水につけたり、水をかけたり、水洗いしたりしない 感電、発火、ショートの原因
 必ず実施	<ul style="list-style-type: none"> ■リチウムイオン電池が液もれしたら、火気から遠ざける 引火し、破裂、発火する原因 ■ACアダプターを抜き差しするときは、必ずACアダプターのプラグ部分を持ち、金属部分に触れないようにする 感電、ショート、発火の原因

使用前

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ■こたつ・電気毛布の中等の熱がこもる場所で本体を充電しない 事故や故障の原因 ■充電用端子部にネックレスやヘアピン、コイン、鍵等の金属製品を触れさせない 通電して、発熱、破裂、発火、あるいはこれらの金属等が発熱する原因 	
 必ず実施	<ul style="list-style-type: none"> ■本体は付属の充電台で充電する 専用器以外で充電すると発熱、破裂、発火等の原因 ■ACアダプターの金属部分にホコリや水がついている場合は、差し込む前に乾いたタオルでふきとる 感電、発火、ショートの原因 ■ACアダプターは交流100-240Vで使用する（製品の無償修理は日本国内のみ） 感電、発火、故障の原因 	

使用時

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ■ 目的以外の用途に使用しない 事故や故障の原因 ■ アルコール、シンナー、ベンジン、除光液等、引火性があるものの近くで使用しない 感電、ケガ、火災の原因
--	--

使用后

 必ず実施	<ul style="list-style-type: none"> ■ 12歳未満のお子様のお手の届かない所に保管する 事故や故障の原因
--	--

⚠ 注意

使用全般

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ■ ペットには使用しない 事故やケガのおそれ ■ 振動や衝撃を加えない 事故、ケガ、故障の原因
--	--

使用前

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ■ 使用前に電極面を確認し、変形、変色、破損等がある場合は使用しない やけど、肌トラブル、ケガのおそれ
 必ず実施	<ul style="list-style-type: none"> ■ アクセサリー等の金属を外す ケガのおそれ ■ 本体の電源を切ってから、充電台に乗せる 発熱、発火、故障、破損の原因

使用時


 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ■使用できる化粧品、水以外を使用しない (P15参照) 肌トラブル、故障のおそれ ■同じ部分に繰り返し使用しない、連続してボディに10分以上、フェイスに5分以上使用しない うっ血、筋肉疲労、やけどのおそれ ■過剰な連続使用はしない、業務用に使用しない やけど、ケガ、故障の原因 ※業務用に使用した場合は、修理をお受けできません。 ■電極面を金属、ものにあてない 発熱、発火、故障、破損の原因
 必ず実施	<ul style="list-style-type: none"> ■使用中に気分が悪くなったり、肌に異常を感じたりした場合は、使用を中止する 肌トラブルのおそれ ■電極面と肌との間に、常に化粧品や水がある状態にし、途中で不足したら塗り足す 肌トラブルのおそれ ■入浴中、水につかっていない部分に使用する場合は、必ずEMSの出力レベルを低めに設定する (EMSの出力は、水中よりも、水の外の方が強く感じられるため) 肌トラブル、筋肉疲労のおそれ ■フェイスに使用する場合は、必ずフェイスアタッチメントを使用する 肌トラブル、筋肉疲労のおそれ ■慣れるまでは、EMSの出力レベルを上げすぎない 肌トラブルのおそれ

使用后

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ■アルコール、アルカリ性洗剤、シンナー、ベンジン、除光液等の溶剤でふかない 表面が損傷する原因 ■本体に水分が付着した状態で放置しない 感電、ショート、発火の原因 ■振動や衝撃が加わりやすい場所や、落下しやすい場所に保管しない 事故、ケガ、故障の原因
 必ず実施	<ul style="list-style-type: none"> ■使用後は本体の電源を切る 火災、発火のおそれ ■長期間使用しない場合、ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜く 火災、発火のおそれ ■使用後は必ずお手入れする

■操作面のラベルについて


出荷時には、本体の操作面にラベルシールが貼られています。
ラベルシールは操作に不慣れな方に、操作面をわかりやすくお知らせするためのものです。
操作に慣れた方は、ラベルシールを剥がして使用しても問題ありません。

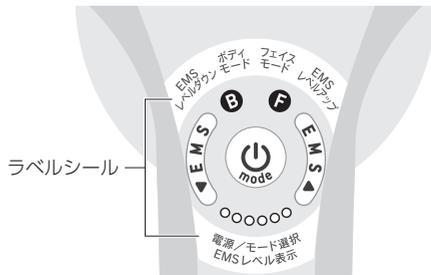

2 本体と付属品・各部の名称


2.1 本体と付属品

■本体 (防水仕様、IPX7)

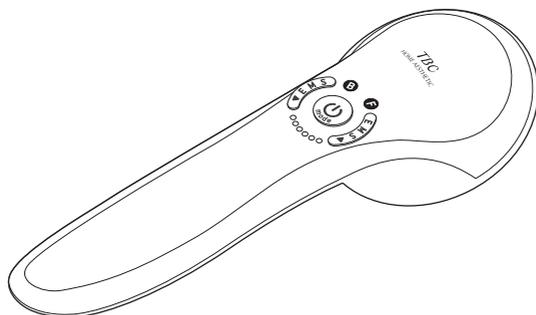

■付属品

フェイスアタッチメント

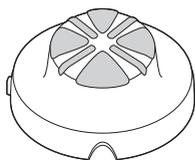

※防水仕様、IPX7

充電台




ACアダプター



取扱説明書 (保証書付※)




クイックマニュアル

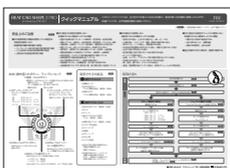

※保証書は、お買い上げ日・販売店名がわかるレシート・明細書がない場合、無効となります。

2.2 各部の名称と働き

■本体 (操作面)

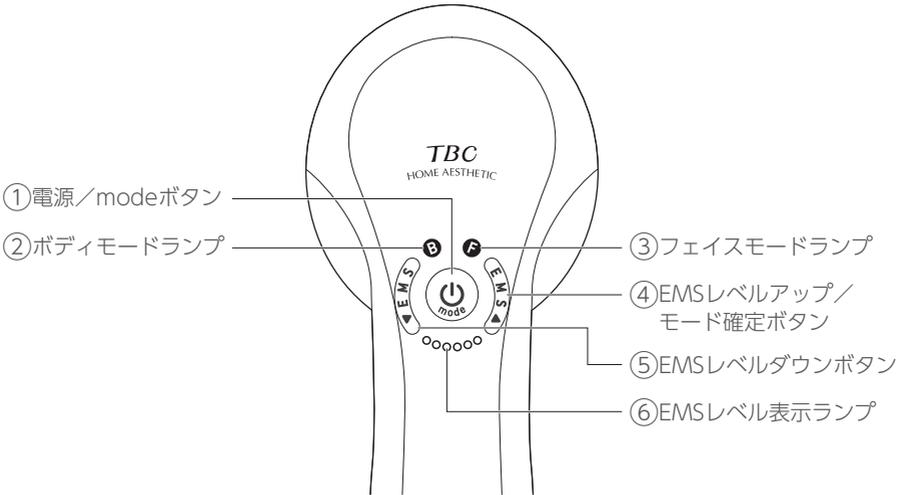

①……………電源／modeボタン

電源を入・切するとき／モードを選択するときに使用します。

- ・電源を入れる : 1秒以上押す
- ・モードを選択する : 短く押す (1秒以内)
- ・電源を切る : 2秒以上押す

②……………ボディモードランプ

ボディモードを選択したときに点灯します。

- ・青 : ボディモード
- ・緑 : ボディモード ソフト
- ・オレンジ : ボディモード ハード
- ・ピンク : ボディモード デコルテ

③……………フェイスモードランプ

フェイスアタッチメントを取り付けてフェイスモードを選択したときに、青点灯します。

④……………EMSレベルアップ／モード確定ボタン

EMSの出力レベルを上げるとき／モードを確定するときに使用します。

⑤……………EMSレベルダウンボタン

EMSの出力レベルを下げるときに使用します。


⑥……………EMSレベル表示ランプ

EMSの出力レベル (12段階) を表示します。

- ・レベル1～6 : 青点灯
- ・レベル7～12 : 白点灯

※出力をオフ (レベル0) にもできます。(ランプは全て消灯)

■本体（電極面）

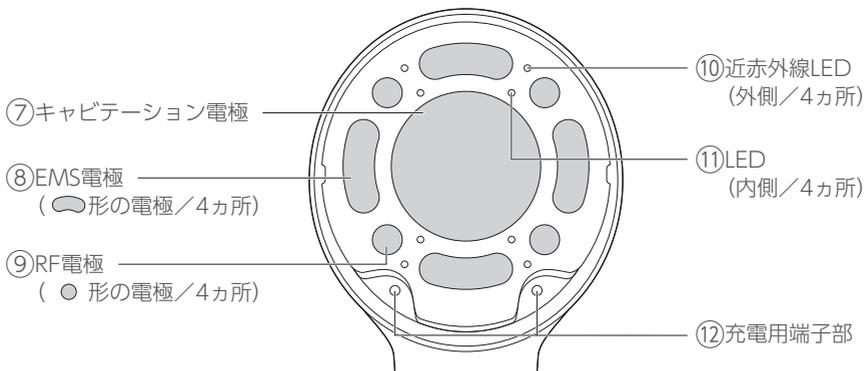


- ⑦…………… キャビテーション電極
キャビテーション（超音波）が出力されます。
※ボディモードのみ
- ⑧…………… EMS電極
低・中周波電流が出力されます。
- ⑨…………… RF電極
RF（ラジオ波）が出力されます。
- ⑩…………… 近赤外線LED
近赤外線のLED（発光ダイオード）光が点灯します。
※ボディモードのみ
※近赤外線LEDの光は、目に見えません。
- ⑪…………… LED
赤色・青色のLED（発光ダイオード）光が点灯します。
※ボディモードのみ
- ⑫…………… 充電用端子部
充電するときに、充電台の充電用端子部に接続します。

■フェイスアタッチメント




- ⑬…………… EMS電極
低周波電流が出力されます。
- ⑭…………… RF電極
RF（ラジオ波）が出力されます。

■充電台

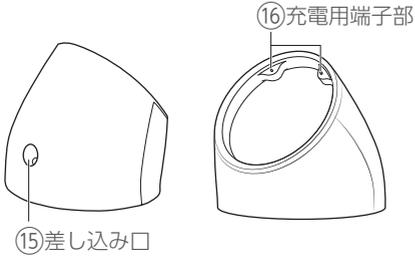

- ⑮…………… 差し込み口
ACアダプターのアダプタープラグ
を差し込みます。
- ⑯…………… 充電用端子部
充電するときに、本体の充電用
端子部を接続します。

■ACアダプター

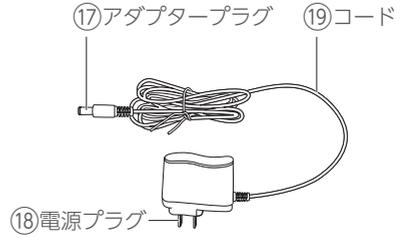

- ⑰…………… アダプタープラグ
充電台の差し込み口に差し込み
ます。
- ⑱…………… 電源プラグ
コンセントに差し込みます。
- ⑲…………… コード

3 ヒートキャビシェイプ2 PROの基本

3.1 ヒートキャビシェイプ2 PROの特長

■キャビテーション (ボディモードのみ)

超音波による振動で、肌のお手入れをサポートします。

※振動の体感はありません。

■EMS

●ボディモード

エステティシヤンのテクニックをイメージしたサークルEMSで、筋肉運動をサポートします。使用部位に合わせて、次の4つのモードから選択してください。

- ・ボディモード : 部位を選ばずに使用できる、スタンダードプログラム
- ・ボディモード ソフト : 二の腕、ふくらはぎに特におすすめのプログラム
- ・ボディモード ハード : おなか (ウエスト)、ヒップ、太ももに特におすすめのプログラム
- ・ボディモード デコルテ : 首、肩、デコルテ専用のプログラム

※出力が弱く感じる場合や、痛みを感じる場合は、EMSの出力レベルを調節するか、ほかのボディモードに切り替えてください。

(首、肩、デコルテ部位には、必ずボディモード デコルテを使用してください)

※同じモードでも、使用する部位によって体感が異なります。

●フェイスモード : フェイス・首専用のプログラム

3種類の低周波で筋肉運動をサポートします。

■RF (ラジオ波)

高周波 (ラジオ波) で使用部分をあたため、肌のお手入れをサポートします。

■近赤外線 (ボディモードのみ)

近赤外線で使用部分の肌をあたため、肌のお手入れをサポートします。

■LED (ボディモードのみ)

LEDの赤や青の光をあてて、肌のお手入れをサポートします。

- ・ボディモード : 赤
- ・ボディモード ソフト : 赤、青
- ・ボディモード ハード : 赤、青
- ・ボディモード デコルテ : 赤、青

※LED光の体感はありません。

■安全機能

下記の場合、自動的に電源が切れます。

●オートオフ機能

- ・一定時間が経過した場合 (ボディモードでは約10分、フェイスモードでは約5分)
- ・電源を入れた後、約2分間操作しなかった場合
- ・モードを選択した後、約2分以内にEMSレベルアップ/モード確定ボタンを押さなかった場合 (モードを確定しなかった場合)

●異常発熱検知機能

電極面の異常な発熱を検知した場合

●異常温度上昇検知機能

本体が一定の温度に達した場合 (ボディモードでは約 $43 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 、フェイスモードでは約 $40 \pm 2^{\circ}\text{C}$)

●EMS出力異常検知機能

EMSの異常な出力を検知した場合

●フェイスアタッチメント接続異常検知機能

フェイスモード中にフェイスアタッチメントが外れた場合や、接続に異常がある場合


■充電残量のお知らせ機能

残量が少なくなると、電源/modeボタンの点灯と音でお知らせします。(P16参照)

3.2 使用できる部位・使用頻度

使用できる部位	おすすめモード
フェイス、首 ⊘ 額、目、鼻、口には 使用しない ⊘ ボディモードは絶対に 使用しない 	 フェイスモード 青
首、肩、デコルテ ⊘ のど、鎖骨には使用し ない 	 ボディモード デコルテ ピンク
二の腕 ⊘ ひじ、ひじの内側には 使用しない	 ボディモード 青  ボディモード ソフト 緑
おなか(ウエスト) ⊘ ヘソの真上には 使用しない	 ボディモード 青  ボディモード ハード オレンジ
ヒップ、太もも ⊘ ひざ、ひざの裏には 使用しない	 ボディモード 青  ボディモード ハード オレンジ
ふくらはぎ ⊘ ひざ、ひざの裏には 使用しない	 ボディモード 青  ボディモード ソフト 緑

■1回のお手入れ時間の目安

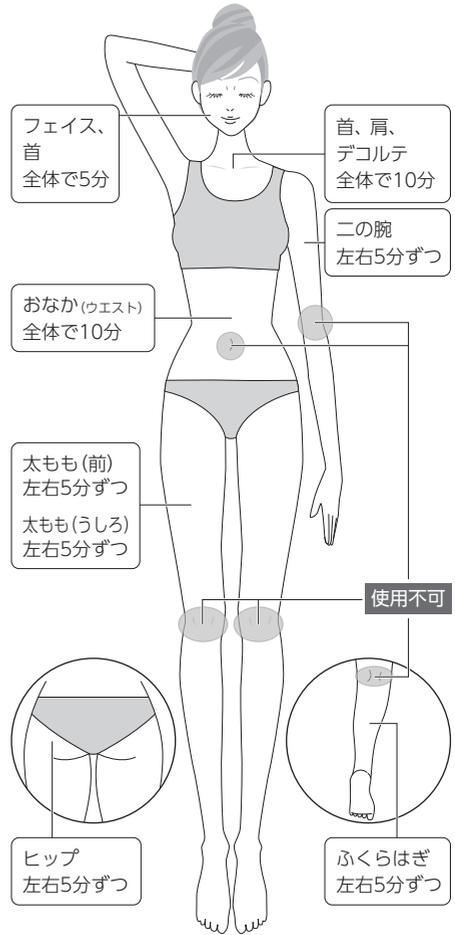

■使用頻度

- 全身で30分以内(1部位につき、ボディは10分以内、フェイスは5分以内)
- 1部位につき毎日1回使用可能*

*毎日使用される場合は、使用部分の肌を注意深く確認し、異常を感じたら、直ちに使用を中止してください。

3.3 使用の流れ

準備

本体を充電する (P14参照)

化粧品を準備する (P15参照)

使用中

使用する部位に、水または化粧品を塗る (P16参照)

ボディに使用する場合

電源を入れる (P16参照)

モードを選択する (P17参照)

- ・ボディモード ソフト
- ・ボディモード ハード
- ・ボディモード デコルテ

モードを確定する (P18参照)

肌にあてて動かしながら、EMSの出力レベルを調節する (P18参照)

トリートメントを行う (P19～23参照)

モードを確定してから約10分後、自動的に電源が切れる

フェイスに使用する場合

フェイスアタッチメントを取り付ける (P16参照)

電源を入れる (P16参照)

モードを選択する (P18参照)
・フェイスモード

モードを確定する (P18参照)

肌にあてて動かしながら、EMSの出力レベルを調節する (P18参照)

トリートメントを行う (P19、24参照)

モードを確定してから約5分後、自動的に電源が切れる

使用后

- ①本体、フェイスアタッチメントのお手入れ (P25参照)
- ②充電台のお手入れ (P26参照)

4 使用する前に

4.1 本体を充電する


※購入後初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。
※上記の場合は、満充電でも短時間しか使用できないことがあります。その際は再度充電してください。




注意

- 本体がぬれた状態で充電台に乗せない
感電、発火、ショートのおそれ

- 1 ACアダプターのアダプタープラグを、充電台の差し込み口に差し込む
- 2 本体を図の向きで充電台に乗せる
 - ・ぐらつきがないよう、確実に乗せてください。
 - ・フェイスアタッチメントは外しておいてください。
- 3 ACアダプターの電源プラグをコンセントに差し込む

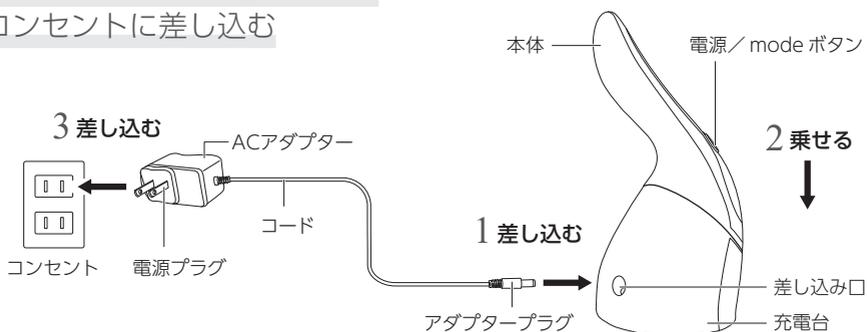

- ・充電が開始し、電源/modeボタンが赤点滅します。
- ・充電が完了すると、電源/modeボタンが緑点灯します。

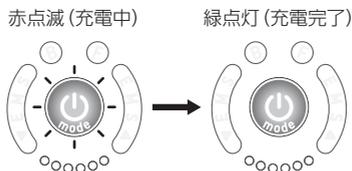


note

- 約3～4時間で充電が完了します。(充電残量ゼロ、室温25℃の場合)
※充電残量や充電環境によって、充電時間は前後します。
- 室温10～35℃の環境で充電してください。

4 充電が完了したら、ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜く

- ・電源/modeボタンが消灯します。

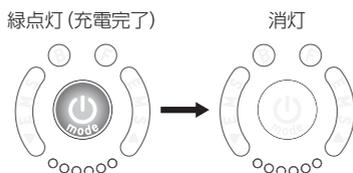

警告

■ACアダプターを抜き差しするときは、必ずACアダプターのプラグ部分を持ち、金属部分に触れないようにする

感電、ショート、発火の原因

■ACアダプターのコードを傷めない

感電、発火、ショートの原因

※加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねる、重いものを乗せる、挟み込む、高温部に近づける等

4.2 化粧品を準備する

本製品は必ず水または化粧品を肌に塗った状態で使用してください。

■使用できる化粧品

○ 使用できるもの	✕ 使用できないもの
<ul style="list-style-type: none">● 通電用ジェル● 油分を含まない ジェル(基礎化粧品)・美容液・化粧水● 刺激の少ない ジェル(基礎化粧品)・美容液・化粧水	<ul style="list-style-type: none">● 油分を含むジェル・美容液・化粧水● オイル● クリーム● 塩分やミネラル分を含む ジェル・美容液・化粧水● 刺激の強いジェル・美容液・化粧水● スクラブ系化粧品● クレンジング● 洗顔料● ボディソープ● 石けん類● メイク化粧品 <p>※油分を含む化粧品を使用すると、本製品の機能が十分に発揮されません。</p>

note

- 本製品はお風呂でも使用できます。
- 化粧品の代わりに、シャワーや浴槽のお湯も使用できます。
- 温泉水や入浴剤入りのお湯は使用しないでください。

5 ヒートキャビシエイプ2 PROを使う

5.1 使い方



注意

■本製品を使用する際は、必ず「使用する前に」(P14参照)に従って準備をする

1 肌を清潔な状態にする


- ・使用する部位を洗浄し、乾いたタオル等で水分をふきとってください。
- ・保湿クリームやUVクリーム等を使用している場合は、洗浄料で洗い、十分に洗い流してください。

2 使用する部位に、水または化粧品を塗る

- ・油分を含まないジェル・美容液・化粧水等を使用してください。(P15参照)
- ・使用中に滑りにくくなったり、美容器からの出力が感じにくくなったり、肌がピリピリする場合は、水または化粧品を塗り足して、十分に湿らせてください。

3 フェイスアタッチメントを取り付ける (フェイスモードのみ)

- ・アタッチメントを取り付けた状態ではフェイスモードのみ、取り付けていない状態ではボディモードのみ選択できます。
- ・アタッチメントは、突起がある方を上にし、ガイドを本体の溝に合わせて取り付けてください。

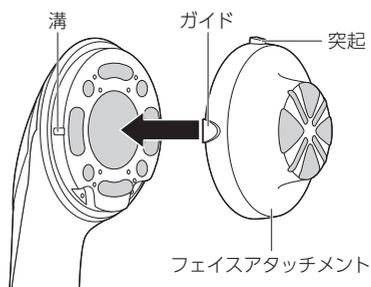

4 電源/modeボタン を1秒以上押して、電源を入れる

- ・「ピー」という音が鳴って電源が入り、電源/modeボタンが青点灯します。



note

- 充電残量が少なくなると、電源/modeボタンの点灯と音でお知らせします。
 - ・残量が約1回分(10分)を下回ると、「ピッピッピッ」と音が鳴り、電源/modeボタンが赤点灯します。
 - ・残量が無くなる直前になると「ピッピッピッピッピッ・・・」という音が約10秒間鳴り、最後に「ピー」という音が鳴って、自動的に電源が切れます。


5 電源/modeボタン を短く押して、モードを選択する

note

- 電源を入れた後、約2分間操作しなかった場合には、自動的に電源が切れます。

■ボディモード (フェイスアタッチメントを取り付けていない場合)

- ・押すごとに「ピッ」という音が鳴り、モードが変わります。

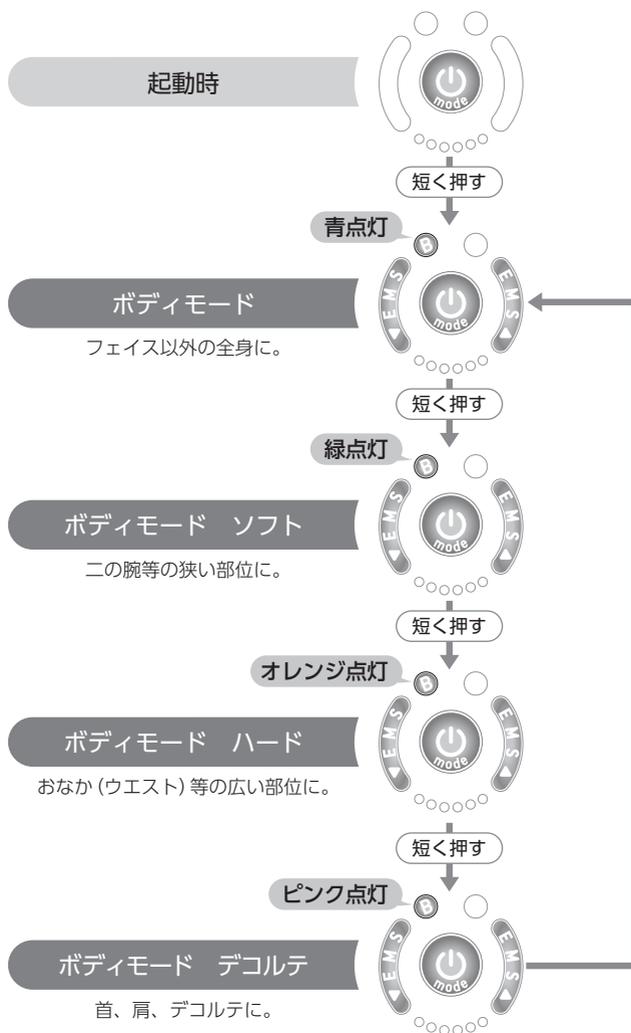

■フェイスモード (フェイスアタッチメントを取り付けている場合)

- ・1回押すだけで、フェイスモードが選択されます。



6 EMSレベルアップ/モード確定ボタンを押して、モードを確定する

- ・「ピッ」という音が鳴って電源/modeボタンが消灯し、EMSの出力レベルが1の状態での出力が始まります。(ボディモード時はキャビテーション、EMS、RF、近赤外線、LED、フェイスモード時はEMS、RFのみ)
- ・確定後はモードを変更できません。




note

- モードを選択し直したい場合は、電源/modeボタンを2秒以上押して、一度電源を切り、再度電源を入れ直してください。(ボディモードからフェイスモード、フェイスモードからボディモードに変更するときは、フェイスアタッチメントの取り付け/取り外しも必要です)
- モードを選択した後、約2分以内にEMSレベルアップ/モード確定ボタンを押さなかった場合(モードを確定しなかった場合)、自動的に電源が切れます。(オートオフ機能)

7 肌に電極面をあてて、滑らせるように動かしながら、EMSの出力レベルを調節する

- ・体感に合わせて調節してください。
- ・EMSレベルアップ/モード確定ボタンやEMSレベルダウンボタンを押すごとに、「ピッ」と音が鳴ってレベルが変化し、選択中のレベルに合わせてEMSレベル表示ランプが点灯します。
- ・調節範囲：0 (EMSオフ)～12

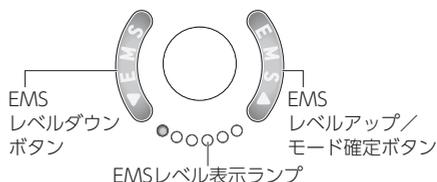

- ・レベルを0にすると、EMSレベル表示ランプは消灯します。
- ・使用中は、いつでも調節できます。




■EMSの出力レベルを上げた場合に、肌に異常を感じたら、直ちにレベルを下げる
肌トラブルのおそれ

note

●出力レベルを調節できるのは、EMSのみです。キャビテーション、RF、近赤外線、LEDの出力レベルは調節できません。

8 モードごとのトリートメント方法に合わせて、動かす (P20~24参照)

- ・滑りが悪い場合は、1カ所につき1~2秒ずつあてながら、あてる位置を少しずつ変えてください。

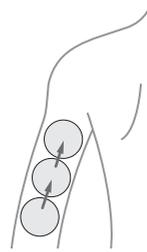

■電極面を同じ部分にあて続けない
肌トラブルのおそれ

9 モードを確定してから一定時間の経過後、自動的に電源が切れる (ボディモード：約10分後、フェイスモード：約5分後)

- ・「ピー」という音が鳴り、全てのランプが消灯します。

■途中で電源を切るとき

電源/modeボタンを2秒以上押すと、「ピー」という音が鳴って全てのランプが消灯し、電源が切れます。



■本体がぬれた状態で充電台に乗せない
感電、発火、ショートのおそれ

note

●ボディモード時、モードを確定してから約5分経過すると、「ピッ」という音が鳴ります。ご使用時間の目安にしてください。

5.2 ボディモードのトリートメント方法

おなか(ウエスト) | 全体で10分




ボディモード

または



ボディモード ハード

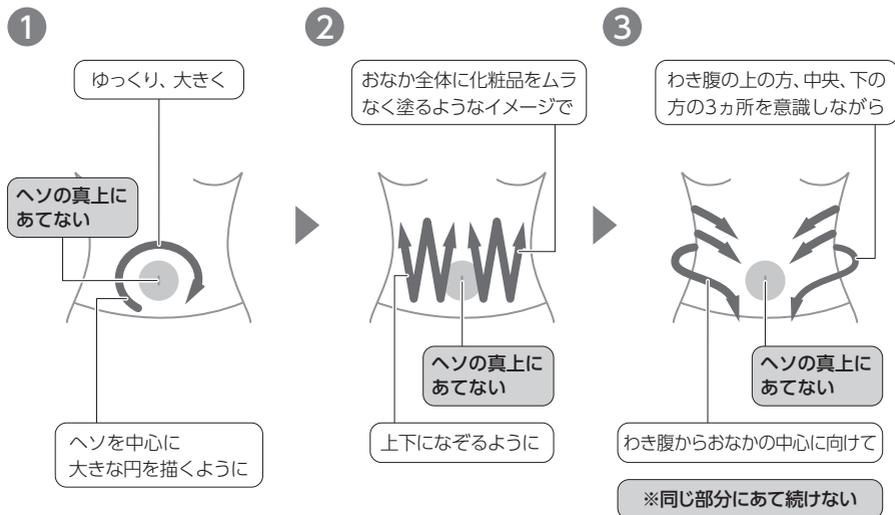

ヒップ | 左右5分ずつ



ボディモード

または




ボディモード ハード

1

ヒップ全体に大きな
円を描くように

ゆっくり、大きく

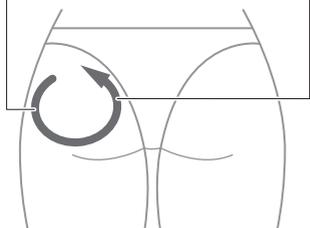

2

ヒップ全体に化粧品を
ムラなく塗るような
イメージで

上下になぞるように

※同じ部分に
あて続けけない



太もも (前) | 左右5分ずつ



ボディモード

または



ボディモード ハード


1

小さな円を
何度も
描くように

下から上に

内側、外側も
忘れずに

ひざに
あてない

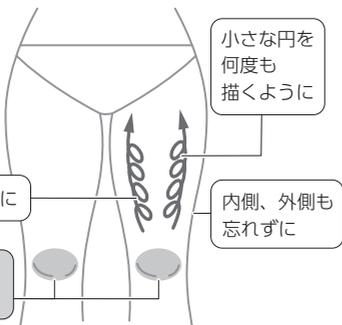


2

太もも (前)
全体に

上下になぞる
ように

ひざに
あてない

※同じ部分に
あて続けけない

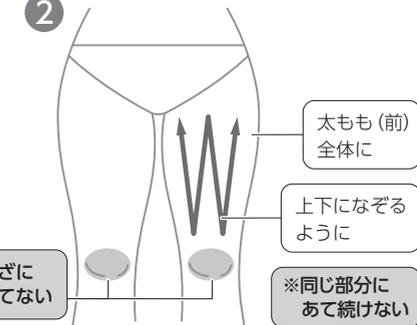

太もも(うしろ) | 左右5分ずつ




ボディモード

または




ボディモード ハード

1

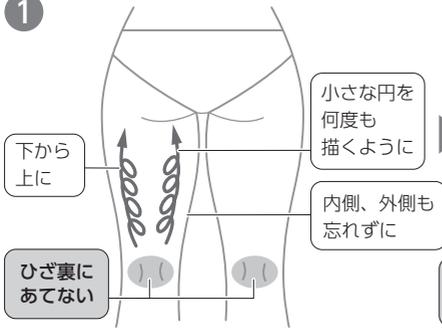

2

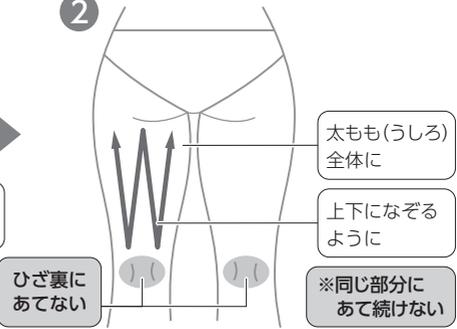

ふくらはぎ | 左右5分ずつ




ボディモード

または




ボディモード ソフト

1

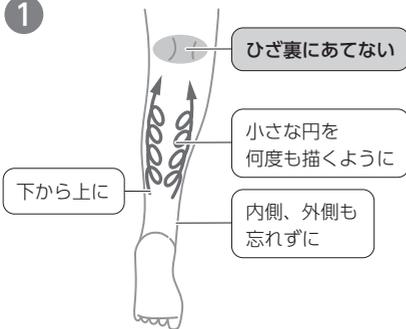

2

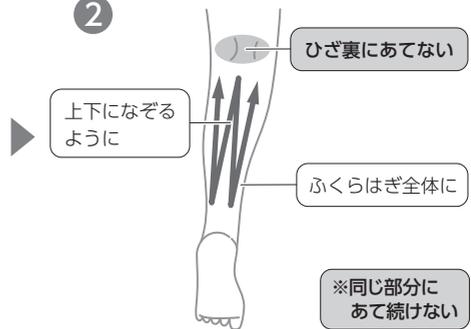

リフレクソロジー

二の腕 | 左右5分ずつ



ボディモード

または



ボディモード ソフト

1

小さな円を何度も描くように

下から上に

ひじ、ひじの内側にあてない

2

上下になぞるように

※同じ部分にあて続けけない

二の腕全体に

ひじ、ひじの内側にあてない

首、肩、デコルテ | 全体で10分



ボディモード デコルテ

1

のど、鎖骨にあてない

首～肩をなぞるように

肩先に向かって

※同じ部分にあて続けけない

5.3 フェイスモードのトリートメント方法

フェイス、首 | 全体で5分



フェイスモード

1

あご下を
なぞるように

のどにあてない

首筋を
なぞるように

2

額、目、鼻、口、
のどにあてない

中心から外側
に向けて

3

額、目、鼻、口、
のどにあてない

下から上に向けて

※同じ部分
にあて続けない

6 使用の後に

■本体、フェイスアタッチメントのお手入れ



注意

- 必ず電源を切った状態で、本体をお手入れする
故障のおそれ
- 本体がぬれた状態で充電台に乗せない
感電、発火、ショートのおそれ
- アルコール、アルカリ性洗剤、シンナー、ベンジン、除光液等の溶剤でふかない
表面が破損する原因


本体とフェイスアタッチメントの電極面は、使用後に毎回必ずお手入れしてください。

1 表面についた化粧品や水分等をふきとる

- ・柔らかい布でからぶきしてください。
- ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませたスポンジや布で汚れをふきとってください。
その後、表面の水分等をふきとってください。
- ・本体を振って水分を切らないでください。(ぶつけると、破損の原因)

2 電極面についた化粧品や水分等をふきとる

- ・表面と同様にお手入れしてください。
- ・特に、充電用端子部は化粧品等が残らないよう、よくふきとってください。
(腐食による接触不良の原因)

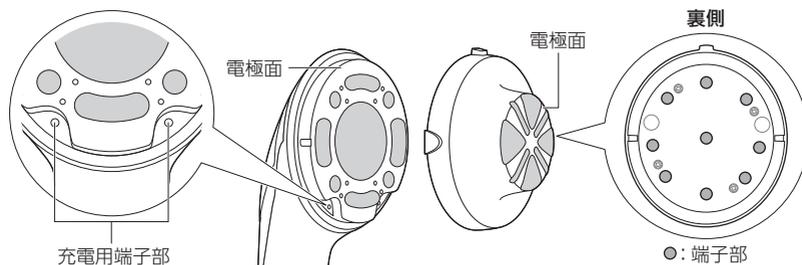

3 風通しの良い場所で乾かす

- ・直射日光にあてないでください。

■充電台のお手入れ



注意

- 必ずACアダプターを外した状態で、充電台をお手入れする
故障のおそれ
- アルコール、アルカリ性洗剤、シンナー、ベンジン、除光液等の溶剤でふかない
表面が破損する原因

1 水で湿らせて固くしぼった布で、表面の汚れをふきとる

- ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませたスポンジや布で汚れをふきとってください。
その後、表面の水分等をふきとってください。
- ・アルカリ性洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液等は使用しないでください。

2 充電用端子部についた汚れをふきとる

- ・綿棒等で充電用端子部の汚れをやさしくふきとってください。
- ・汚れが残らないよう、よくふきとってください。(接触不良の原因)
- ・汚れがひどい場合は、綿棒等を市販の無水エタノールで湿らせてふきとってください。



■保管時の注意

- ・使用後は、充電台からACアダプターを外し、本体を充電台に乗せて保管してください。
- ・長期間使用しない場合は、本体・充電台のお手入れをしてから保管してください。
- ・12歳未満のお子様の手の届かない所で保管してください。
- ・熱源のある器具(暖房器具等)のそば、高温多湿な場所(浴室等)、車の中、直射日光のあたる場所、高い場所、不安定な場所等を避けて保管してください。

■保守と点検のしかた

- ・本製品を長期間使用しなかった場合は、必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから、使用してください。
- ・本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に、「困ったときは」(P28参照)をよく読んで、状態を確認してください。それでも解決しない場合は、保証書と購入明細をご用意のうえ、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ・本製品が故障、損傷した場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

■リチウムイオン電池について

- ・本製品はリチウムイオン電池を使用しています。
- ・リチウムイオン電池は消耗品です(保証対象外)。
- ・充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます。(充電回数は約300回が目安です)
- ・本製品は、リチウムイオン電池を含む製品に関する自治体の分別ルールに従って廃棄、またはリサイクルしてください。



Li-ion

7 こんなときは

7.1 エラー表示

エラーが発生すると、次のような表示でエラーの内容をお知らせした後、自動的に電源が切れます。エラー内容をご確認のうえ、処置方法に従って対応してください。

※お問い合わせの際は、エラー表示の種類をお知らせください。

エラー表示	エラー内容	処置方法	
 青点滅 フェイスモード ランプ (5秒間)	「ピー」と音が鳴って電源オフ	フェイスアタッチメント接続異常検知 フェイスモード中に、フェイスアタッチメントが約3秒以上外れた状態になった。	フェイスアタッチメントを取り付け直してから、電源/modeボタンを1秒以上押し続けて電源を入れ直してください。 ※アタッチメントが外れていない場合は、内部部品の異常の可能性があるので、お買い上げの販売店にご相談ください。
 赤↔青 交互に点滅 電源/mode ボタン (5秒間)	「ピー」と音が鳴って電源オフ	異常温度上昇検知 本体の異常な温度上昇を検知した。	しばらくお待ちください。温度が下がると、自動的に電源が入ります。 ※異常が続く場合は、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。
 赤点滅 電源/mode ボタン (5秒間)	「ピー」と音が鳴って電源オフ	異常発熱検知 電極面の異常な発熱を検知した。	直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。
○○○○○ 青↔白 EMSLレベル 表示ランプ (5秒間)	「ピー」と音が鳴って電源オフ	EMS出力異常検知 EMSの異常な出力を検知した。	直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。

7.2 困ったときは

本製品を使用中、次のような状態でお困りの場合は、考えられる原因をご確認のうえ、処置方法に従って対処してください。

状態	考えられる原因	処置方法
充電できない 充電開始後すぐに、充電完了表示になる 充電したのに、電源が入らなかったり、すぐに切れる	ACアダプターの電源プラグがコンセントに差し込まれていない。	ACアダプターの電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。(P14参照)
	充電台にACアダプターのアダプタープラグが差し込まれていない。	ACアダプターのアダプタープラグをしっかり差し込んでください。(P14参照)
	充電電池(リチウムイオン電池)が消耗している。	充電電池(リチウムイオン電池)の寿命です。(P26参照)
	室温が低すぎる／高すぎる。(充電時の推奨室温：10～35℃)	推奨室温の環境に30分以上置いてから、推奨室温の環境で充電してください。 ※充電が始まらない場合は、一度充電台から本体を外し、置き直してください。
	本体・充電台の充電用端子部が汚れている。	充電用端子部の汚れをふきとってください。(P25～26参照)
	ACアダプターのコードが破損している。	直ちにACアダプターを抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。
充電しても、使用時間が極端に短い	充電電池(リチウムイオン電池)が消耗している。	充電電池(リチウムイオン電池)の寿命です。(P26参照)
EMSの電気刺激が感じられない (弱く感じる) ※体感には個人差があります。	肌の表面に水分が足りない、または、乾燥している。	水または化粧品を塗り足して、十分に湿らせてください。(P16参照)
	EMSの出力レベルが低い。	EMSレベルアップ／モード確定ボタンを押して、EMSの出力レベルを上げてください。(P18参照)
	電極面が肌に密着していない。	電極面を肌にぴったりとあててください。
	モードが確定されていない。	EMSレベルアップ／モード確定ボタンを押して、モードを確定してください。

状態	考えられる原因	処置方法
EMSの電気刺激が痛い (強く感じる)	電極面が肌に密着していない。	電極面を肌にぴったりとあててください。
	EMSの出力レベルが高い。	EMSレベルダウンボタンを押して、EMSの出力レベルを下げてください。 (P18参照)
使用中、肌がピリピリする	肌の表面に水分が足りない、または、乾燥している。	水または化粧品を塗り足して、十分に湿らせてください。 (P16参照) 症状がひどいときは、直ちに使用を中止してください。
使用中、肌が赤くなったり、熱くなりすぎる	同じ部分にあて続けた。	電極面を同じ部分にあて続けしないでください。必ず肌の上を滑らせるように動かしてください。赤みがひどいときは、直ちに使用を中止してください。
使用中に電源が切れた	オートオフ機能が働いた。	安全のため、一定時間が経過すると、電源が自動的に切れます。 (P11参照) 電源/modeボタンを1秒以上押して、電源を入れ直してください。
	フェイスアタッチメント接続異常検知が働いた。	フェイスアタッチメントを取り付け直してから、電源/modeボタンを1秒以上押して電源を入れ直してください。 (P27参照)
	異常温度上昇検知、異常発熱検知が働いた。	電源が再度切れた場合は、直ちに使用を中止してください。 (P27参照)
	EMSの出力異常検知が働いた。	安全のため、直ちに使用を中止してください。 (P27参照)
	充電が切れた。	充電してください。 (P14参照)

7.3 よくあるご質問

Q	A
使用できない部位はありますか？	あります。使用できる部位 (P12参照) を確認してください。
敏感肌なのですが、使用できますか？	使用はできますが、肌に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。ご自身で判断できない場合は、医師に相談してください。
お風呂で使用できますか？	本体は防水仕様ですので、使用できます。ただし、水やお湯の中に30分以上沈めて放置しないでください。温泉水や入浴剤入りのお湯では使用できません。 また、充電台は浴室に持ち込まないでください。
どんな化粧品を使用すればいいですか？	お手持ちの化粧水や美容液、ジェルを使用できます。(P15参照) ただし、肌トラブルや故障の原因になりますので、次の化粧品は 使用しないでください 。 ●油分を含むジェル・美容液・化粧水 ●オイル ●クリーム ●塩分やミネラル分を含むジェル・美容液・化粧水 ●刺激の強いジェル・美容液・化粧水 ●スクラブ系化粧品 ●クレンジング ●洗顔料 ●ボディソープ ●石けん類 ●メイク化粧品
化粧品はどのくらい使用すればいいですか？	肌の表面が十分に湿った状態になる量を使用してください。肌が乾いた状態では、EMS、RFが肌に伝わりにくくなります。また、電極面が滑りにくくなります。使用中に、効果が感じられなくなったり、滑りにくくなったたりした場合は、化粧品を塗り足してください。
何歳から使用できますか？	保護者の同意・監督のもと、12歳から使用できます。
毎日使用できますか？	1部位につき毎日1回使用可能です。 ※毎日使用される場合は、使用部位の肌を注意深く確認し、異常を感じたら、直ちに使用を中止してください。
海外で使用できますか？	使用できません。

■記録表 (ご使用メモとしてお使いください)

No.	日付	モード	レベル
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

No.	日付	モード	レベル
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

8 製品仕様

■本体仕様

電源	充電式リチウムイオン電池 7.4 V (フル充電時使用回数：最大出力時 約3~4回 (30~40分) 充電時間：約3~4時間)
定格電源電圧	本体：DC 7.4 V 0.8 A ACアダプター：DC 12 V 0.5 A
消費電力	最大出力時 約 6 W
製品サイズ	本体：約 W76×D70×H210 (mm) 充電台：約 W100×D98×H91 (mm) フェイスアタッチメント：約 W75×D83×H32 (mm)
製品質量	本体：約 275 g 充電台：約 109 g フェイスアタッチメント：約 51g
動作条件	温度：10~43℃ 湿度：30~100%RH
充電条件	温度：10~35℃ 湿度：10~90%RH (結露なきこと)
保管条件	温度：-10~50℃ 湿度：10~90%RH (結露なきこと)
材質	ABS、ステンレス、シリコン
防水	IPX7

※本製品の性能等を改善するために設計、仕様、付属品は、予告なく変更される場合があります。

●本製品は、日本国内用に設計・販売しております。

電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理やアフターサービスは対象外です。

●本製品は、屋内専用です。

●取扱説明書の内容について

本書は製品開発にさきがけて印刷しています。性能や操作性向上のため、製品仕様の一部が変更となることがあります。その場合は、製品自体の仕様が優先されます。

愛情点検 ●長年ご利用の製品の点検を！	
	<p>こんな症状はありませんか？</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電源を入れ操作しても作動しない。 ●本体が異常に熱い、焦げ臭い。 ●異常な音がある。 ●ACアダプターのコードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ●その他の異常がある。
▶	<p>ご使用中止 !!</p> <p>故障、事故防止のため電源を切り、コンセントからACアダプターを抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。</p>

9 保証とアフターサービス

1. 本製品には、本書の裏表紙に保証書がついています

お買い上げの販売店で所定事項の記入をご確認いただき、保証内容をよくお読みになって大切に保管してください。所定事項の記入がない、またはレシート・明細書の貼付がないと保証は有効となりません。その場合は、お買い上げの販売店へ記入をお申し付けください。

2. 保証期間中に修理を依頼されるときは

本取扱説明書をよくお読みいただき、本製品に異常がある場合は、お買い上げの販売店に保証書をご提示のうえ、修理を依頼してください。保証書の規定に基づき、無償、または有償で修理させていただきます。

3. 保証期間後に修理を依頼されるときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により本製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有償で修理させていただきます。

4. 補修用性能部品について

発売元では、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造終了後、最低6年間保有しております。

5. 本製品使用中、万一不具合により使用できなかったときは

そのことによる損失の補償、または使えなかったことによる付随的損害の補償については、その責任を負いかねますのでご容赦ください。

● 個人情報のお取り扱いについて

本製品の修理等に際してお預かりするお客様のお名前、ご住所、お電話番号等の個人情報は適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託の場合、および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客様がお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただく場合があります。

〈利用目的〉

商品・サービスにかかわるご相談、お問い合わせ、および修理の対応にのみ利用させていただきます。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する際、委託先に対しては発売元と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切に管理・監督いたします。

■ お問い合わせ先

発売元

エスティックTBC

〒163-0655

東京都新宿区西新宿1-25-1

お客様相談室 ☎[®] **0120-801-272**

保証規定

本書は、お買い上げ日より保証期間内において、正常な使用状態で故障が発生した場合、本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記をご覧ください。

1. 保証期間中、取扱説明書等の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げの販売店に修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。お買い上げの販売店が無償修理いたします。
2. 保証期間中、無償修理等のアフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または発売元へお問い合わせください。
3. 次のような場合には、保証期間中でも有償修理になります。
 - a. 本書のご提示がない場合
 - b. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記載がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
(レシート・明細書がなく、お買い上げ年月日の確認が取れない場合)
 - c. ご使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および損傷。
 - d. お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷。
 - e. 火災、地震、風水害、雷、その他天災地変、塩害、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - f. 本製品以外の他の機器によって生じた故障および損傷。
 - g. 一般家庭以外(業務用として長時間使用する等)に使用された場合の故障および損傷。
4. 下記の部品は消耗品です。保証期間内でも有料となります。
 - ・ ACアダプター
5. 本製品は持込修理の対象商品です。保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様のご負担となります。
6. この保証書は、本書に明示した期間の条件のもとにおいて、無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
7. 本書は、日本国内においてのみ有効です。

保証書

持込修理

品名	家庭用複合美容器	型番	HA-HC02-PR
製品名	ヒートキャビシェイプ2 PRO		
無償修理保証	対象部分	期間	
	製品 (ただし、消耗品は除く)	お買い上げ日から 1年間	
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 〒 _____ お名前 _____ 様		
※ 販売店	住所・販売店名・電話番号 お買い上げ日のわかる明細を貼付 または本保証書と併せて 保管してください。		

●販売店様へのお願い

必ず※印欄をご記入・ご捺印のうえ、お客様へお渡しください。

●お客様へのお願い

1. 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名が記載されているかお確かめください。
万が一記載がない場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。
2. 所定記入欄が空欄のまま、もしくはお買い上げ日・販売店名がわかるレシート・明細書がない場合、本書は有効とはなりません。
3. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
4. 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、お買い上げの販売店または発売元に直接お問い合わせください。

発売元

エステティックTBC

〒163-0655

東京都新宿区西新宿1-25-1

お客様相談室 ☎️® **0120-801-272**