


TBC
HOME AESTHETIC

保管用
保証書付

取扱説明書

家庭用電子美容器

フォレーゼ PRO

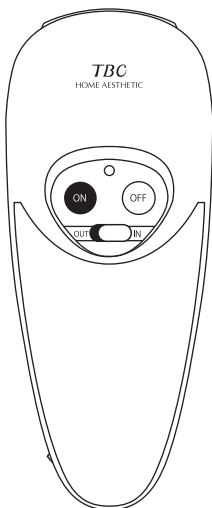

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

はじめに

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品は家庭用電子美容器です。

体感の少ない電気振動※によるマッサージで、肌の汚れを取り除いたり、角質層へ化粧水や美容液の浸透をサポートし、透明感のあるみずみずしい肌に整えます。

※OUTモードでは、1秒間に4,000回。

INモードでは、1秒間に2,000回と4,000回。

目 次

はじめに.....	1
安全上のご注意.....	2
製品について／製品と付属品・ご使用になる前に・ 化粧品の選び方	5
製品について／各部の名称	6
ご使用方法	7
お手入れの流れ.....	9
おすすめの手順	10
オートオフ・保管の仕方	11
電池の交換・廃棄の仕方	12
よくあるご質問・製品仕様	13
保証規定	14

安全上のご注意

- ・ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・定められた手順に従って無理のない使用をお願いします。
- ・異常が発生した場合はただちに使用を中止してください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので、必ずお守りください。
- ・注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱をすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について

	危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれ大きいもの。
	警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがあるもの。
	注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害※のおそれがあるもの。

※物的損害とは、家屋・家財およびペットにかかわる拡大損害を意味します。

●図記号について(次は図記号の例です)

	してはいけないことを示しています。
	しなければならないことを示しています。
	注意しなければならないことを示しています。

危険



次に該当する方は使用しないでください。
医療用電子機器の誤動作を招く原因となります。

●医療用電子機器を使用している方

- ・ペースメーカー等の体内植込型医療用電子機器
- ・人工心肺等生命維持用医療用電子機器
- ・心電計等の装着型医療用電子機器

警告

**次のような方は使用しないでください。
事故やトラブルの原因となります。**

- 急性疾患
- 感染性疾患
- 心臓疾患
- 悪性腫瘍
- 血液疾患
- 内臓疾患
- 知覚、痛覚、温度感覚の障害がある方
- 顔面神経障害の方
- 頭部や目に事故の後遺症がある方
- 生理中、妊娠中、授乳中の方
- 発熱している方
- 体調がすぐれない方
- 12歳未満の方
- 自分で意思表示できない方
- 酒気帯びの方
- 眠気をさそう薬を服用している方
- 高血圧の方
- 糖尿病の方
- 皮膚病／皮膚アレルギーの方
- 目の治療中の方(レーシック等含む)
- 敏感肌または肌の弱い方
- 医師から処方された薬を服用している方
- 上記以外で医師の治療を受けている方



禁止

**次のような部位には使用しないでください。
事故やトラブルの原因となります。**

- 指定以外の部分(P10 参照)
- 目(まぶた)・唇・口腔内・のど・胸(心臓周囲)・へその真上・性器等の粘膜部分(Iライン・Oライン含む)は行わない
- 皮膚に異常のある部分(傷、湿疹、腫れもの、かゆみ、ほてり、ケロイド等)
- 静脈瘤のある部分
- 銀歯、インプラントの真上
- 外科手術をした部分
- 金属を埋め込んでいる部分
- 美容施術を受け、ダウンタイム(回復に要する時間)を必要としている部分
- ピーリング直後の部分
- 日焼けをした部分
- 刺青(タトゥー・アートメイク)とその周辺
- 脱毛後7日以内の部位

ご自身で判断できない場合は、使用前に医師にご相談ください。



禁止

- 本製品は、使用目的以外には使用しない。
事故や故障の原因となります。
- 自分で意思表示できない人には使わせない。
事故やケガの原因となります。



禁止

- 本製品を改造、分解、修理をしない。
ケガや異常動作の原因になります。
- 電池は幼児の手の届かないところにおく。
万一、お子様が電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談する。
- 電池を充電、ショート、分解、変形、加熱、火に入れるなどしない。
発火、発熱、破裂の原因になります。
- 電池を廃棄する場合や、保存する場合には、テープなどで絶縁する。
発火、破裂の原因となります。

警告



必ず守る

- 本製品を浴室等の高温多湿の場所で使用したり、保管したり、水のかかりやすい場所におかない。
感電、火災の原因となります。
- 本製品を高いところで使用したり、保管したりしない。
落下により、故障の原因となります。
- 子ども(12歳未満)の手の届く場所に保管したり、使用させたりしない。
事故やケガの原因となります。
- 本製品を水洗いしない。汚れた場合は洗剤を使わず乾いたきれいな布で拭いた後、保管する。
感電、火災、ショートの原因となります。
- 異臭、異常発熱したときは使用しない。
破損、発火の原因となります。
必ず、点検・修理を受けてください。
- 本製品を使用する際は貴金属類を全て外す。

注意



禁止

- 本製品をシンナー、ベンジン、除光液、アルコール等の溶剤で拭かない。
本製品の表面に損傷を与える原因となります。




必ず守る

- 本製品の使用中、頭痛を感じたり、肌にかぶれを生じたり、体に異常を感じたりした場合は、ただちに使用を中止する。
そのまま使用すると、肌トラブルの原因となります。

製品について

製品と付属品

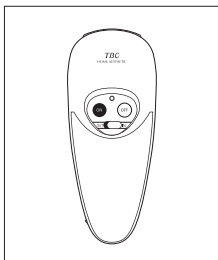

製品

※お試し用のコットンと電池が
装着されています。



取扱説明書
(保証書付)

ご使用になる前に

本製品には、肌の汚れを取り除く「OUTモード」と角質層へ化粧水や美容液の浸透をサポートする「INモード」の2つのモードがあります。

チタン電極にコットンパフをセットし、化粧水や美容液をしみ込ませ、使用目的に合わせて使用してください。

化粧品の選び方

ご使用になる化粧品は、油分が配合されていないものをお選びください。


油分が配合された化粧品をご使用されると、本製品の機能が十分に発揮されません。

TBCでは、フォレーゼ PROにご使用いただける化粧品を取り揃えています。ぜひお試しください。


各部の名称

製品について／各部の名称

- ① 電源スイッチ[ON]
- ② 電源スイッチ[OFF]
- ③ パイロットランプ
- ④ モード切替スイッチ
OUTモード↔INモード
- ⑤ フィンガー電極

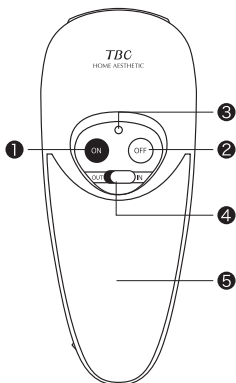


- ⑥ フレーム
(コットンパフ押さえ)
- ⑦ オープナー
(フレーム開閉ボタン)
- ⑧ チタン電極
(コットンパフをセットする面)
- ⑨ 電池ホルダー

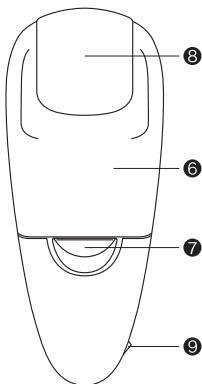

ご使用方法

1 コットンパフをセットします。


オープナーを押して
フレームを取りはずします。

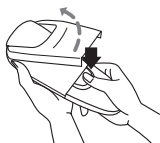

新しいコットンパフをチタン
電極全体が隠れるようにのせ
ます。



フレームの先端を凹部に合
わせ、フレームの下部をパ
チッと音がするまで矢印方
向に押さえます。

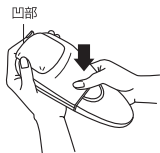

セットしたコットンパフ全面に化粧水または美容
液をしみ込ませてください。

コットンパフには、化粧水または美容液が周辺へこぼれ出ない程度に適量をしみ込ませてください。少ないと、ビリビリ感を感じたり正常に通電されないことがあります。

⚠ 注意



- フレームをしっかりとセットしてください。
フレームが外れケガをする場合があります。
- 化粧水や美容液以外は、ご使用にならないでください。
肌に異常を生じる場合があります。
- 本製品の使用中に頭痛を感じたり、肌にかぶれを生じたり、体に異常を感じたりした場合は、使用をただちに中止してください。
- 化粧水や美容液で、電池がぬれないように注意してください。

2 電源を入れます。

電源スイッチ[ON]を押し、パイロットランプの点灯をお確かめください。

3 モードを切替えます。

ご使用の目的に合わせてモード切替スイッチで切替えます。

OUTモード(ブルーに点灯) … 肌の汚れを取り除きコンディションを整えます。

INモード(オレンジに点灯) … 角質層へ化粧水や美容液の浸透をサポートします。

※クレンジング・洗顔後にご使用ください。

4 お手入れを始めます。

フィンガー電極に、しっかりと触れるように本体を握ります。

※しっかりと触れていないと通電されないことがあります。

化粧水または美容液をしみ込ませたコットンパフ面を肌にあてます。通電中はパイロットランプが点滅します。

パイロットランプ



5 使用後は、コットンパフを取りはずし、ティッシュ等についている化粧水や美容液等の汚れを拭き取ります。

※水洗いはできません。

⚠ 注意



●同じ箇所に過度に使用しないでください。

肌のトラブルの原因になります。

お手入れの流れ

お手入れ部位のメイクや日焼け止め等を落とし、洗浄後にご使用ください。

STEP.1

OUTモード：選択時はパイロットランプがブルーに点灯し、通電時はブルーランプが点滅します。

コットンパフに化粧水やふきとり化粧水をしみ込ませて使用します。

使用できる化粧品

- ・化粧水
- ・ふきとり化粧水

使用時間
5分

STEP.2

INモード：選択時はパイロットランプがオレンジに点灯し、通電時はオレンジランプが点滅します。

新しいコットンパフに化粧水や美容液をしみ込ませて使用します。

使用できる化粧品

- ・化粧水
 - ・美容液
 - ・シートマスク
- （コットンパフは不要）

使用時間
5分

おすすめの手順

お手入れ部位全体をまんべんなく行います。

コットンパフを肌に密着させ、やさしくなでるように、ゆっくりと移動させます。(または、肌に置くようにあてながら移動させてもかまいません。)すべりにくい場合は化粧水または美容液を付け足してください。

おすすめの
手順

1.



フェイスライン・ほほ

2.




ほうれい線・目の下
こめかみ

3.



口元～鼻の下・小鼻
鼻すじ・額・こめかみ

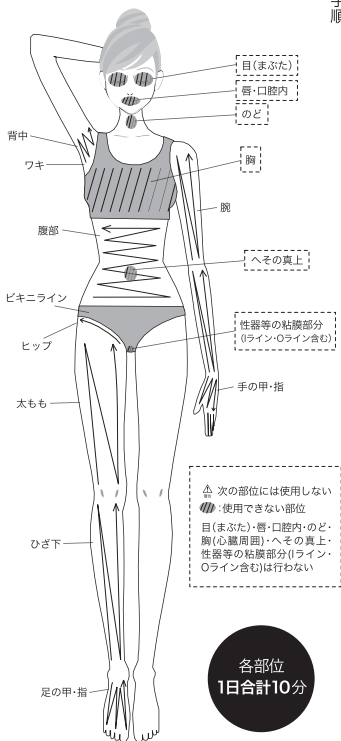

各部位
1日合計10分

オートオフ


1. 電源スイッチ[ON]を押して、2分間使用せず放置すると自動的に電源が切れ、電池の消耗を防ぎます。
2. 通電中(パイロットランプ点滅時)30秒毎にブザーが鳴り時間経過をお知らせします。
通電時間(パイロットランプ点滅時間)が5分経つと自動的に終了します。

保管の仕方

- 長期間ご使用にならない時は、電池を取りはずして保管してください。
(P12参照)
- 故障の原因になりますので機器本体を水につけたり、水洗いは絶対にしないでください。
- 化粧水や美容液が周辺にこぼれ出た場合は使用後に電池ホルダーから電池を取り出し、乾いた布等で水気を拭き取り良く乾燥させてください。
電池ホルダー内もぬれている場合は、拭き取った後ホルダーを開放した状態で乾燥させてください。
(P12参照)
- 直射日光・高温・多湿の場所を避けて保管してください。

電池の交換

1. 電源スイッチ[OFF]を押して、電源を切り、チタン電極側を上にして電池ホルダーのツメを下方に押し、回転させます。ホルダーを開いて電池を取り出します。
2. 2枚の新しい電池を、プラスが上になるように重ねて収納します。
3. 電池ホルダーを元に戻し、電源スイッチ[ON]を押して、パイロットランプが点灯すれば完了です。

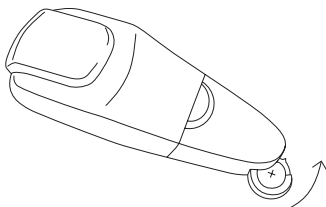

注意

- 指定(CR2032)された電池以外はご使用できません。
(1日10分で約1.5ヶ月間使用可)



警告

- 電池は幼児の手の届かないところにおいてください。
万一、お子様が電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
- 電池を充電、ショート、分解、変形、加熱、火に入れるなどしないでください。
発火、発熱、破裂の原因になります。
- 電池を廃棄する場合や、保存する場合には、テープなどで絶縁してください。
発火、破裂の原因となります。

廃棄の仕方

コットンパフ、電池を外し、お住まいの自治体のルールに従ってリサイクル・廃棄してください。

よくあるご質問

Q 質問	A 回答
1日に何回使用していいですか？	各部位ごとにOUTモード、INモード、1日各1回までの使用をおすすめします。
お風呂で使用できますか？	お風呂での使用はできません。水のかかる場所や湿気の多い所で使用したり、保管しないでください。
乳液やジェル状の化粧品を使用してもいいですか？	乳液は油分が配合されており、フォレーゼPROの効果が十分に発揮されないため、おすすめしません。ジェル状(油分が配合されていないもの)の化粧品は、コットンパフにしみ込むものであれば使用可能です。
シートマスクの上に使用してもいいですか？	INモードで使用できます。コットンパフは必要ありません。
コットンパフが取り付けられません。	コットンパフの厚みや形、サイズによっては、取り付けできない場合があります。別のコットンパフをご使用ください。
使用中、肌がピリピリします。	化粧水や美容液がコットンパフ全面にしみ込んでいないと、ピリピリと刺激を感じる場合があります。化粧水をつけ足し、コットンパフ全面にしみ込ませてください。
何も感じませんが、きちんと通電していますか？	微弱な電流を使用した体感の少ない電気振動によるマッサージですので、使用中の体感がほとんどなくても、パイロットランプが点滅していればきちんと通電しています。

製品仕様

電 源	DC6[V] (電池CR2032×2)
消 費 電 流	12[mA]
出 力 周 波 数	4,000[Hz] (OUTモード) 2,000及び4,000[Hz] (INモード)
パ ル ス 出 力	5.8[V]
タ イ マ ー	5[分]
寸 法	130×55×33[mm]
質 量	80[g] (含電池)
材 質	ABS、チタン

●品質改良のため予告なく一部変更することがあります。

保証規定

本書は、お買い上げ日より保証期間内において、正常な使用状態で故障が発生した場合、本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。

詳細は下記をご参照ください。

1. 保証期間中、取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げの販売店に修理をご依頼の上、本書をご提示ください。お買い上げの販売店が無償修理致します。
2. 保証期間中の無償修理等アフターサービスについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、又は発売元へお問い合わせください。
3. 次のような場合には、保証期間中でも有償修理になります。
 - a. 本書のご提示がない場合
 - b. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記載がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
(レシート、お買い上げ明細書、ご注文履歴の画面印刷等がなく、お買い上げ年月日の確認がとれない場合)
 - c. ご使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - d. お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - e. 火災、地震、風水害、雷、その他天災地変、塩害、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - f. 本製品以外の他の機器によって生じた故障及び損傷。
 - g. 一般家庭以外(業務用として長時間使用する等)に使用された場合の故障及び損傷。
4. 本製品は持込修理の対象商品です。保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様のご負担となります。
5. この保証書は、本書に明示した期間の条件のもとにおいて、無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
6. 本書は、日本国内においてのみ有効です。

■個人情報のお取り扱いについて

修理等でお預かりするお客様の個人情報は、ご相談・お問い合わせ・修理対応にのみ利用し、適切に管理いたします。お客様の同意がない限り、法令に基づく場合、または業務委託の場合を除き、第三者への開示はいたしません。業務を委託する際は、委託先を適切に管理・監督いたします。なお、お電話でのご相談は、適切に対応するため、通話内容を録音する場合があります。

保証書

持込修理

品名	家庭用電子美容器	型番	HA-PH01-PR
形名	フォレーゼ PRO		
無料修理保証	対象部分	期間	
	製品 (ただし、消耗品及び付属品は除く)	お買い上げ日から 1 年間	
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 〒 _____ お名前 _____ 様		
※ 販売店	住所・販売店名・電話 ご購入日のわかる明細を貼付または本保証書とあわせて保管してください。		

●お客様へのお願い

1. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名が記載されているかお確かめください。
万一記入がない場合は、ただちにお買い上げの販売店にお申し出ください。
2. 「レシート」、「お買い上げ明細書」、「ご注文履歴の画面印刷」など、
お買い上げの履歴がわかるものと本書を一緒に保管してください。
3. お買い上げ日、お客様名(ご購入者)、販売店名の確認が取れない場合、本書は有効となりません。
(贈答品として譲り受けた場合でも、お買い上げ履歴を確認させていただきます。)
4. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
5. 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間についてご不明な場合は、
お買い上げの販売店、又は発売元に直接お問い合わせください。

発売元: エステティックTBC

〒163-0655

東京都新宿区西新宿1-25-1

お客様相談室

 0120-801-272

