


SLENDERPAD 3 PRO

スレンダーパッド 3 PRO

－ ボディシェイプコース発想の家庭用EMS美容器 －

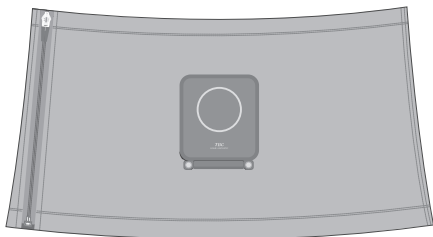

もくじ

クイックガイド	1	よくあるお問い合わせ	17
安全上のご注意	3	故障かな？と思ったら	19
使用上のお願い	8	製品仕様	20
製品と付属品	9	保証とアフターサービス	21
特長	10	保証書	裏表紙
スレンダーパッド 3 PROを使う	11		

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

・本製品を正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

特に、「安全上のご注意」(3～7ページ)はご使用前に必ずお読みください。


・本書は、いつでも確認できる場所に大切に保管してください。

・本製品を譲渡する場合は、本書を必ず一緒に渡してください。

クイックガイド

ベルトの電極を ぬらす


スプレーで電極をぬらす

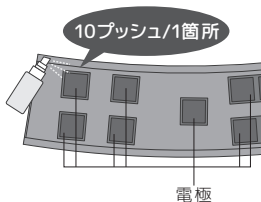

※電極以外はぬらさない

ベルトを装着する

① ホックを留める

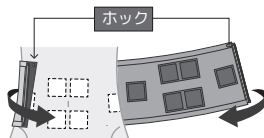

② ファスナーを閉める

※ファスナーが右側にくるように
装着する

レベルを上げる

■ レバーを回す



お好みで モードを変える

■ レバーを2秒以上
長押しする

長押し



A mode

エステモード

黄色点灯

T mode


トレーニングモード

青色点灯




コントローラーを取り付ける

- ① ツメを入れる
- ② カチッと音がするまで取り付ける

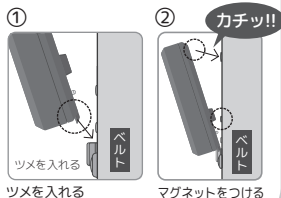

電源を入れる

- 電源ボタンを2秒以上長押しする

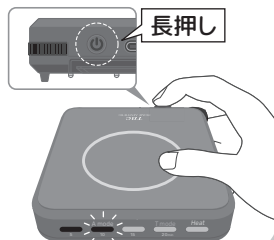

お好みでヒーターをつける

- 電源ボタンを短く押す



オートオフで電源が切れる

- 途中で切る場合、電源ボタンを長押しする




安全上のご注意

人への危害や財産の損害を防ぐために、必ずお守りください。

■ 危害レベル

誤った取り扱いにより生じる、危害や損害の程度に応じ、次のように区分しています。

 危険	 警告	 注意
死亡や重傷を負う おそれ大きいもの	死亡や重傷を負う おそれがあるもの	軽傷や財産の損害の おそれがあるもの

※財産の損害とは、家屋、家財、および家畜・ペットへの拡大損害のことです。

■ 図記号

 禁止	してはいけないこと	 必ず実施	しなければならないこと
--	-----------	---	-------------

危険

■ 医療用電子機器の誤作動を防ぐために

使用者






● 次の医療用電子機器を使用している場合は、本製品を使用しない

- ・ペースメーカー等の体内植込型医療用電子機器
- ・人工心肺等の生命維持用医療用電子機器
- ・心電計等の装着型医療用電子機器

警告

■ 肌等、体にかかわるトラブルを防ぐために

使用者	<div data-bbox="119 477 202 589">  禁止 </div> <ul style="list-style-type: none"> ● 次に該当する場合は使用しない <ul style="list-style-type: none"> ・急性疾患 ・悪性腫瘍 ・内臓疾患 ・感染性疾患 ・血液疾患 ・心臓疾患 ・生理中/妊娠中/出産後4カ月以内 ・発熱中 ・体調がすぐれない ・12歳未満 ・自分で意思表示できない ・酒気帯び ・眠気をさそう薬の服用中 ・高血圧 ・糖尿病 ・皮膚病・皮膚アレルギー（金属アレルギーを含む） ・敏感肌または肌が弱い ・医師の治療を受けている ・医師から処方された薬を服用している ・脳神経に異常を感じている方（てんかんなど）
使用部位	<div data-bbox="119 808 202 920">  禁止 </div> <ul style="list-style-type: none"> ● 次の部位には使用しない <ul style="list-style-type: none"> ・使用目的部位以外（頭、首、胸、背中上部、でん部、腕、足等） ・皮膚に異常がある（やけど、水泡、傷、湿疹、腫れもの、かゆみ、ほてり、ケロイド等） ・色素に異常がある（隆起しているホクロ、シミ、アザ、肝斑、白斑等） ・静脈瘤がある ・外科手術をした ・美容施術を受け、ダウンタイム（回復に要する時間）が必要 ・ピーリング直後 ・過度に日焼けをした ・刺青（タトゥー・アートメイク）とその周辺 ・脱毛後7日以内 ・体内に金属を入れている
	<div data-bbox="119 1045 202 1113">  必ず実施 </div> <ul style="list-style-type: none"> ● 使用の可否を自己判断できない場合は、医師に相談する

安全上のご注意



■ 感電、火災、ショート、事故等を防ぐために

使用全般



禁止

- 改造、分解、修理をしない
感電、発火、異常動作によるケガの原因
- 火への投入、加熱、高温や高湿になる所^{*}、ほこりっぽい所での充電・使用・放置はしない
リチウムイオン電池（コントローラー内蔵）の破裂、発熱、発火、感電の原因
※ストーブやヒーターの近く、車の中、直射日光のあたる所、浴室・サウナ等
- 重いものを乗せたり強い衝撃を加えたり、落下しやすい所に置かない
リチウムイオン電池（コントローラーに内蔵）の破裂、発熱、発火、本体故障、動作不良の原因
- 充電ケーブル（付属）を傷めない
例：引っ張る、無理に曲げる、重いものを乗せる等
- ACアダプター（市販）や充電ケーブル（付属）は、水につけたり水をかけたりしない
- 水中に落とさない

使用前



禁止

- ACアダプター（市販）や充電ケーブル（付属）が傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
- ぬれた手でACアダプター（市販）や充電ケーブル（付属）を抜き差ししない
- 水分や化粧品がついている状態で、充電しない
- タコ足配線の状態での充電しない



必ず実施

- 充電時は、充電ケーブル（付属）と5V／1Aに対応したACアダプター（市販）を使用する
- ACアダプター（市販）を抜き差しするときは、充電ケーブル（付属）ではなくACアダプターを持つ
- 充電後は、ACアダプター（市販）を抜く
- 肌に直接触れるのでベルトは清潔な状態で使用する
- 指定外のACアダプターを使用しない。使用した場合は故障の原因になり、保証期間に関わらず有償修理となる

使用中



禁止

- 腹囲のトリートメント以外の目的に使用しない
- 使用中は、電気製品に接触させたり熱源に近づけたりしない
- ほかの電気美容器と同時に使用しない
- ボディクリーム、化粧水、乳液などを使用しない
- 調理中に使用しない
- 熱い飲み物や食べ物の飲食中に使用しない
- 刃物や工具の使用中に使用しない
- 自動車などの運転中に使用しない
- 高重量を扱うトレーニング中には使用しない
- 眠気がある時、睡眠中は使用しない
- 極度の空腹時、絶食時、糖質制限をしているときは使用しない
- 装着した本人以外が、本人の同意なしに電源を入れたりレベルを上げたりしない



必ず実施

- 自身の操作が妨げられず、また他者から操作されないよう十分な広さを確認したうえで使用する
- 異常・故障時はすぐに使用を中止し、電源を切る
例：電源を入れても作動しない、コントローラーが異常に熱い・焦げ臭い、異常な音がする、充電ケーブルを動かすと通電したりしなかったりする
- 肌に異常を感じたり、気分が悪くなったり、めまい等を感じた場合は、すぐに使用を中止して医師に相談する

使用後









必ず実施

- コントローラーのお手入れ時は、電源を切る
- 子ども（12歳未満）の手の届かない所に保管する
- ペットの届かない所に保管する

安全上のご注意

⚠ 注意

■ 事故、ケガ、肌トラブル等を防ぐために

使用全般	 禁止	<ul style="list-style-type: none">● 振動や衝撃を加えたり、落下しやすい所に置かない● ペットには使用しない
	 禁止	<ul style="list-style-type: none">● コントローラーやベルトを確認し、異常がある場合は使用しない ※ 破損、変形、ほつれて内部が見える● 使用部位の肌の状態を確認し、異常がある場合は使用しない
使用前	 必ず実施	<ul style="list-style-type: none">● 長期の保管後は、正常に動作することを確認してから使用する
使用中	 禁止	<ul style="list-style-type: none">● 短時間で繰り返し使用しない● 過剰な連続使用、業務用としての使用はしない 業務用に使用した場合は、修理をお受けできません。● 水以外は使用しない● 無理に高いレベルで使用しない● 1日30分以上は使用しない
	 必ず実施	<ul style="list-style-type: none">● 電極を、常に湿らせた状態で使用する● 痛みを強く感じるときは、出力を下げて使用する ※ 痛みをがまんして使用しないでください。● 気分が悪くなったり肌に異常を感じたら、すぐに使用を中止する
使用后	 必ず実施	<ul style="list-style-type: none">● ベルトを洗濯し、清潔に保つ● コントローラーをお手入れする

使用上のお願い

故障等を防ぐために

本製品の故障、動作不良、破損等を防ぐために、次のことをお守りください。


- 必ずコントローラーを外して洗う
- コントローラーの接続部分をぬらさない
- ベルトを過度に引っ張らない
- 屋内で保管する
- 使用後は、必ずコントローラーのお手入れをする（16ページ参照）
アルカリ性洗剤、アルコール、シンナー、ベンジン、除光液等の溶剤でふかない
- 使用後は、必ずベルトの洗濯をする（16ページ参照）
漂白剤、酸性洗剤、柔軟剤、乾燥機、アイロンは使用しない。

廃棄するとき


- ベルトは消耗品
 - ・破れ、ほつれて内部が見える⇒廃棄
 - ・布が伸びたり、電極が変色⇒体感が変化している場合は使用を中止
- ベルトは電気配線を含む製品として廃棄する
- コントローラーはリチウムイオン電池を含む製品として、お住まいの自治体のルールに従ってリサイクル・廃棄する

製品と付属品


コントローラー

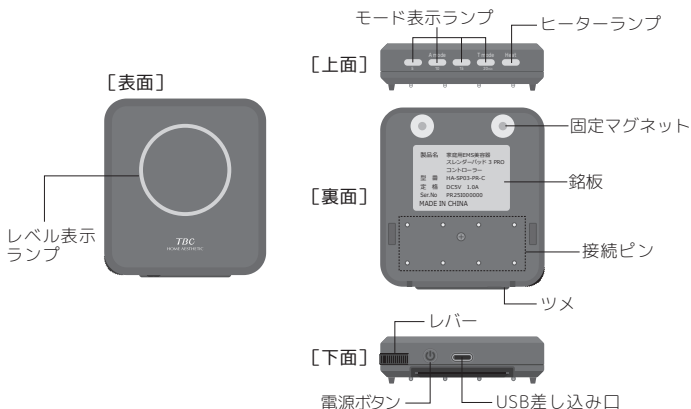

付属品

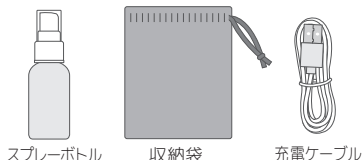

※ ACアダプターは付属していません。

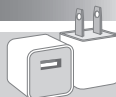


以下の条件を満たす市販品をご使用ください

- ・PSEマークがついている。
- ・USB Type-A端子を接続できる。
- ・5V/1Aの出力 (OUTPUT) に対応している。

ベルト

ベルトは別梱包となります

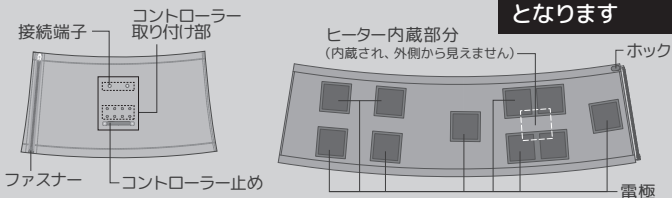

特長

■ TBCオリジナルEMSTリートメントで効率よく筋肉運動をサポート



※治療や疾病予防を目的とした機器ではありません。

■ ヒーター機能搭載

お腹をじんわりとあたためます。

■ TBCボディシェイプコース発想の2つのモード

お好みに合わせて2つのモードから選択できます。(2つ組み合わせも可能)

モード名	エステモード	トレーニングモード
表記	A mode	T mode
プログラム	多彩なプログラムでエステ手技をイメージ 	規則的な収縮でトレーニングをサポート 
LED	黄色	青色
オートオフ	10分	20分
1日のトレーニング時間	30分まで ※1日30分以上は使用しないでください。筋疲労をおこしたり、ピリピリする原因になります。	

■ 洗濯可能

ベルトは洗濯し、衛生的にご使用できます。

※コントローラーは防水仕様ではありません。必ず外して洗ってください。

■ 安全機能

【オートオフ機能】電源を入れた後、モードの時間が経過すると自動的に電源が切れます。

【異常温度検知機能】ヒーターが一定の温度に達した場合、自動的に電源が切れます。

【非接触検知機能】電極が接触していない、または十分にぬれていない場合「ピピピピ」という警告音とモード、レベル表示ランプが青色に回転点灯してお知らせします。


スレンダーパッド 3 PROを使う

1 充電する


① ACアダプター（市販）を準備する

※ACアダプターの条件は9ページ参照

② 接続し、充電する

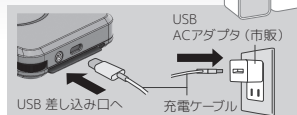

■ 充電中 ※順に赤点灯

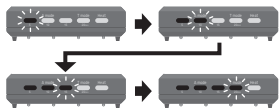

■ 満充電 ※緑点灯




③ ACアダプターと充電ケーブルを抜く


※全ランプが消灯します

2 ベルトの電極をぬらす

① ファスナーをおろしてベルトを開く

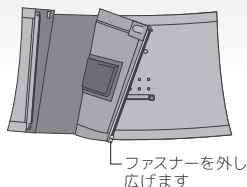

② スプレーで電極をぬらす

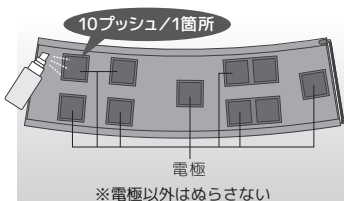


NOTE

- パソコンに接続して充電しないでください。
本製品の接続によって生じた損害（データ消失・故障等）に関して、いかなる場合でも当社は一切責任を負いません。
- 水分や汗等がついたまま、充電しないでください。
- 室温0〜40℃の場所で充電してください。
- 約2〜3時間で充電できます。（充電残量ゼロ、室温25℃の場合）
※ 充電する環境によって、時間は前後します。
- 初めて使用するときや長時間使用しなかったときは、満充電でも短時間しか使用できないことがあります。
その際は再度充電してください。
- 満充電後に連続使用した場合、約120分使用できます。（使用時の室温が25℃の場合）
※ 使用するモードや使用環境によって、時間は前後します。

3 ベルトを装着する


(ファスナーが右側にくるように)

① ベルトの内側のホックを留める

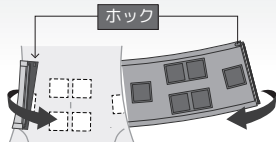

※ ベルト全体が均一に伸びるように装着してください。

② ファスナーを閉める

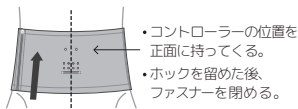


※ 一部分を強く引っ張るとベルトが破損する恐れがあります。

【前】




【後ろ】

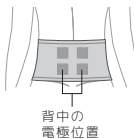


※電極の位置が左右対称になるように合わせる


4 コントローラーを取り付ける

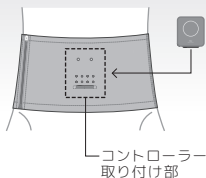

① ツメを入れる

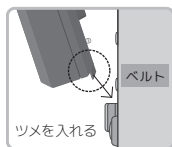

② カチッと音がするまでしっかり取り付ける

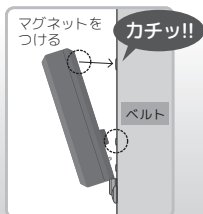

NOTE

- 左右で刺激のバランスが悪いと感じたときは、電極が筋肉に触れていない可能性があります。電極が筋肉の位置で肌に密着するように調整してください。
- コントローラーの取り付け部が水にぬれた場合はすぐに拭いてください。

スレンダーパッド 3 PROを使う

5 電源を入れる


- 電源ボタンを2秒以上長押しする



黄色のランプが点灯し、
エステモードが起動する。

6 レベルを上げる

- レバーを回す

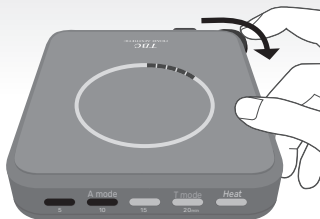

レベル表示ランプが青色で
時計回りに点灯する。


⚠ 無理のないレベルで
ご使用ください。

NOTE

■非接触検知機能


※正しく装着されていない時、エラー音とランプでお知らせします。

- エラー音「ピ、ピ、ピ、ピ」連続
- レベル表示ランプが青色で時計回りに回転してお知らせします。

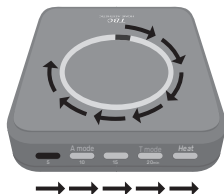

こんなとき...

例) 1

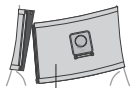


ベルトが身体から
離れている

例) 2



ツメが入って
いない

例) 3

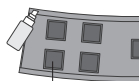

電極がめれて
いない

例) 4




電極が肌に密着
していない

7 お好みでモードを変える

- レバーを2秒以上長押しする

長押し

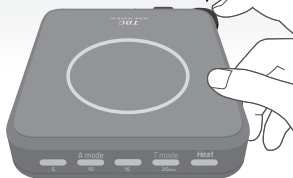

A mode

エステモード

黄色点灯



T mode

トレーニングモード



青色点灯



8 お好みでヒーターを入れる/切る

- 電源ボタンを短く押す

短押し

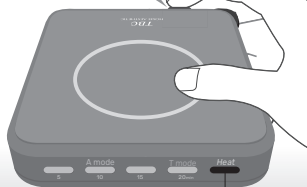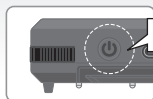

Heatランプが赤点灯する

ベルト腹部の中心部分が温まる

NOTE

■ 残時間表示機能

- モード起動中は残り時間が表示されます。

エステモード	10分
トレーニングモード	20分



1日30分以上は使用しないでください。
筋疲労をおこしたり、ビリビリする原因になります。



~5分

~10分


~15分

~20分

スレンダーパッド 3 PROを使う

9 電源を切る

- 途中で電源を切るときは、電源ボタンを2秒以上長押しする(全ランプ消灯)

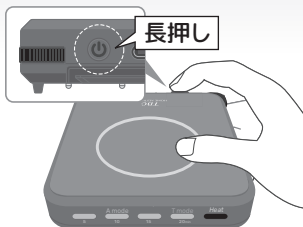


※異常を感じた場合、操作が出来なくなった場合はコントローラーを外し、使用を中止する。外したままにしておくと自動で電源が切れる。

■ 自動で切れる場合 (オートオフ)

■ モードが終わった時	
• エステモード	10分後オフ
• トレーニングモード	20分後オフ
■ 操作がない時	
• 電源だけ入れたまま	1分後オフ
• ヒーターだけが起動したまま	
• ベルトから外したまま	
■ ヒーターの異常な温度上昇を検知した時	—
■ 充電が切れた時	—


10 ベルトを洗濯する

① コントローラーを必ず外す

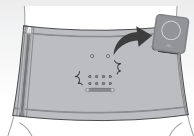


コントローラーは防水仕様ではありません。

② ベルトを外す

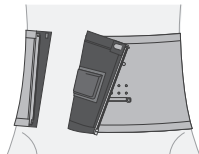

③ ファスナーを閉じる

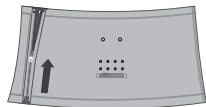


④ 手で押し洗いをする

- ・衣類用中性洗剤を使用する
- ・ベルトの電極部が傷むと使用できなくなるため、漂白剤、酸性洗剤、柔軟剤は絶対に使用しない
- ・電極部を強くこすらない
- ・乾いたタオルで水気を取る
- ・強く絞らない



- ・洗濯機を使用する場合は洗濯ネットに入れ、洗濯時間を短く、遠心脱水も5分以内にする
- ・色落ちする場合があります、他の衣類とは分ける

⑤ 直射日光を避け、自然乾燥する

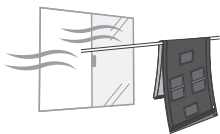


- ・乾燥機は使用しない
- ・アイロンは使用しない



11 コントローラーをお手入れする

■ コントローラーについた水や汗、汚れを布などでふきとる

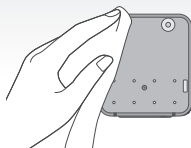

※ コントローラー裏面の接続ピンは擦ったり、めらしたりしない。

● 汚れがひどいとき

水を含ませて固く絞った布で、汚れをふきとってください。

- ・水分が残るときは、乾いた柔らかい布でふきとる。
- ・アルカリ性洗剤、シンナー、ベンジン、除光液等の溶剤でふかない。

警告 水につけたり、水をかけたりしない

■ 保管は収納袋に入れ、風通しの良い場所でする



※ スプレーに残った水は捨てる

よくあるお問い合わせ

Q 毎日使える？

A 毎日ご使用いただけます。

Q 1日何分まで使える？

A 1日30分以内でご使用ください。連続した長時間のご使用は、筋肉疲労をおこしたり、ピリピリする原因になります。

Q 寝ながら(睡眠中)使える？

A 睡眠中は使用しないでください。断線、動作不良、やけど、肌トラブルの原因になります。

Q 運動しながら使える？

ストレッチや軽いウォーキングをしながらご使用いただけます。ただし、異常を感じた時はお控ください。

A また、高重量を扱う激しいトレーニングなどをする時は使用しないでください。急な筋肉の収縮で意図せず体が動き、事故につながる危険性があります。

Q お風呂・サウナで使える？

A お風呂やサウナではご使用いただけません。コントローラーは防水仕様ではありません。

Q どのレベルで使えばいいですか？

A 初めてご使用のときや慣れるまでは、低いレベルから使用し、慣れてきたら、体感に合わせて徐々に上げてください。

Q 上から服を着てもいい？

A 緊急時にコントローラーを操作・着脱できる服装でご使用ください。

Q 装着前にベルトを温めることはできる？

A お湯(40℃前後)で電極をぬらして、ご使用ください。
電子レンジやドライヤー、高温のお湯などで温めないでください。
故障、やけど、肌トラブルの原因になります。

Q ボディクリームなど化粧品を使ってもいい？

A ご使用いただけません。

Q 海外で使える？

A 日本国内用に設計されており、海外の気候条件、水質条件等は考慮されておりません。ACアダプター（市販）が対応しているかも含めて、ご確認のうえでご判断ください。
また、海外で使用した場合、無償修理、アフターサービスは適用されません。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、まずご確認ください。

状態

ここを確認

充電ができない

- ・ACアダプター（市販）は、5V/1Aに対応したものを使用していますか？
- ・ACアダプター（市販）や充電ケーブル（付属）は、奥まで差し込んでいますか？
- ・充電ケーブル（付属）は、断線していませんか？
- ・充電池（リチウムイオン電池）が寿命により消耗している可能性があります。（寿命の目安：充電回数 約300回）

電源が入らない

- ・充電は十分にされていますか？（充電しながらは起動できません。）
充電が少なくなっている時に電源を入れると「ピピピピッ」という音がなります。
- ・ベルトと一緒にコントローラーを洗濯していませんか？
コントローラーは防水仕様ではありません。

使用中に勝手に電源が切れた

- ・モード選択後に一定時間※が経過すると、自動的に電源が切れます。（オートオフ機能）※Amode：約10分後、Tmode：約20分後
- ・充電が切れていませんか？
充電が少なくなると使用中に、「ピー」という音になり、電源が切れます。
- ・操作の無い状態が続いていませんか？
➡電源やヒーターだけを起動した状態、電極が触れていない状態で、操作が無く1分経過すると、自動的に電源が切れます。
- ・ヒーターの異常な温度上昇を検知すると、電源が自動的に切れます。

刺激が弱い 感じない または 強い・痛い

- ・電極は十分にぬれていますか？水を付け足してください。（11ページ参照）
 - ・筋肉の位置で、電極部分全体が肌に密着していますか？（12ページ参照）
 - ・起動時、レベル1から始まります。自分に合ったレベルに調整してください。
 - ・長時間、連続で使用していませんか？体が刺激に慣れて弱く感じたり、電極が乾いてビリビリ感じる事があります。1日30分以内でご使用ください。
- ※痛みがひどいときは、我慢して使用せず、すぐに使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。

ヒーターの熱を感じない

- ・ヒーターの電源は入れていますか？
- ・ヒーターは温まるまで4分程度かかる事があります。
- ・体感には個人差があり、電気の刺激や、汗等の水分で熱を感じにくい場合があります。
- ・ベルトのヒーター内蔵部分を手で触れて温かくなっていればヒーターは故障していません。（9ページ参照）


製品仕様

製品名	スレンダーパッド 3 PRO	
型番	コントローラー：HA-SP03-PR-C ベルト：HA-SP03-PR-S～LL	
定格電源	DC5V 1A	
使用電池	リチウムイオン電池：3.7V 1200mAh	
消費電力	約3.3W（充電時）	
製品サイズ	コントローラー	約W7.2×D2.1×H7.8cm
	ベルト	Sサイズ：約W66.5×D3×H20.7cm Mサイズ：約W73.5×D3×H20.5cm Lサイズ：約W81.0×D3×H21.0cm LLサイズ：約W91.5×D3×H20.5cm
製品質量	コントローラー	約81g
	ベルト	Sサイズ：約196g Mサイズ：約198g Lサイズ：約210g LLサイズ：約220g
動作条件	温度：0℃～40℃ 湿度：75%以下（充電時含む）	
保管条件	温度：-10℃～55℃ 湿度：75%以下（結露なきこと）	
材質（ベルト）	表 地：ポリエステル・・・84% ポリウレタン・・・16% 裏 地：ナイロン・・・83% ポリウレタン・・・17% 電極部：ポリエステル・・・100% 滑止め：ポリエステル・・・57% ナイロン・・・35% ポリウレタン・・・8%	

※ 本製品の性能・操作性向上のため、設計、仕様、付属品は、予告なく変更される場合があります。

本書は製品開発にさきがけて印刷しているため、本書の記載と製品自体の仕様等が異なる場合は、製品自体の仕様が優先されます。

※ 本製品は日本国内用に設計・販売しているため、無償修理・アフターサービスの対象は、日本国内のみです。

愛情点検		長年ご使用の製品の点検を！		
	こんな症状はありませんか？	<ul style="list-style-type: none"> 電源を入れても作動しない。 コントローラーが異常に熱い、焦げ臭い。 異常な音をする。 コントローラーを動かすと、通電したりしなかったりする。 その他の異常がある。 	▶	ご使用中止 故障・事故防止のために電源を切り、充電もせず必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証とアフターサービス

1. 本製品には、本書の裏表紙に保証書がついています

保証内容をよくお読みになって大切に保管してください。所定事項の記入がない、またはレシート・明細書注文履歴の印刷物等の貼付がないと保証は有効となりません。

2. 保証期間中に修理を依頼されるときは

本取扱説明書をよくお読みいただき、本製品に異常がある場合は、お買い上げの販売店に保証書をご提示のうえ、修理を依頼してください。保証書の規定に基づき、無償、または有償で修理させていただきます。

3. 保証期間後に修理を依頼されるときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により本製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有償で修理させていただきます。

4. 補修用性能部品について

発売元では、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造終了後、最低5年間保有しております。

□個人情報のお取り扱いについて

本製品の修理等に際してお預かりするお客様のお名前、ご住所、お電話番号等の個人情報は適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託の場合、および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客様がお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただく場合があります。

〈利用目的〉

商品・サービスにかかわるご相談、お問い合わせ、および修理の対応にのみ利用させていただきます。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する際、委託先に対しては発売元と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切に管理・監督いたします。

■ お問い合わせ先

発売元

エステティックTBC

〒163-0655

東京都新宿区西新宿1-25-1

お客様相談室 ☎ 0120-801-272

保証規定

本書は、お買い上げ日より保証期間内において、正常な使用状態で故障が発生した場合、本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記をご覧ください。

1. 保証期間中、取扱説明書等の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げの販売店に修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。お買い上げの販売店が無償修理いたします。
2. 保証期間中、無償修理等のアフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または発売元へお問い合わせください。
3. 次のような場合には、保証期間中でも有償修理になります。
 - a. 本書のご提示がない場合
 - b. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記載がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
(レシート・明細書等がなく、お買い上げ年月日の確認が取れない場合)
 - c. ご使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および損傷。
 - d. お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷。
 - e. 火災、地震、風水害、雷、その他天災地変、塩害、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - f. 本製品以外の他の機器によって生じた故障および損傷。
 - g. 一般家庭以外（業務用として長時間使用する等）に使用された場合の故障および損傷。
 - h. 布地の破れ、ほつれ、ファスナーの摩耗など通電機器以外の消耗品破損故障および損傷。
4. 充電ケーブル、スプレーボトル、収納袋、ベルトは消耗品です。保証期間内でも有償となります。
5. 本製品は持込修理の対象商品です。保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様のご負担となります。
6. この保証書は、本書に明示した期間の条件のもとにおいて、無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
7. 本書は、日本国内においてのみ有効です。

保証書

品 名	家庭用EMS美容器	型 番	HA-SP03-PR-C
製 品 名	スレンダーパッド 3 PRO		
無償修理保証	対 象 部 分	期 間	
	コントローラー	お買い上げ日から : 1年間	
※ お買い上げ日	<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> 年 月 日 </div>		
※ お 客 様	ご住所 〒 お名前 _____ <div style="text-align: right;">様</div>		
※ 販 売 店	住所・販売店名・電話番号 <div style="text-align: center;"> お買い上げ日のわかる明細を貼付 または本保証書と併せて 保管してください。 </div>		

●お客様（ご購入者様）へのお願い

1. 本書の※印欄にご記入のうえ、保管してください。
2. 「レシート」「お買い上げ明細書」「ご注文履歴の画面印刷」など、お買い上げの履歴がわかるものを本書と一緒に保管してください。
3. お買い上げ日、お客様名（ご購入者様名）、販売店名の確認が取れない場合、本書は有効となりません。（贈答品として譲り受けた場合でも、お買い上げの履歴を確認させていただきます）
4. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
5. 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、お買い上げの販売店または発売元に直接お問い合わせください。

発売元

エスティックTBC

〒163-0655

東京都新宿区西新宿1-25-1

お客様相談室 ☎ 0120-801-272