

保証書

| | | | |
|--|-----------|-------------|---------|
| 品名 | 家庭用美容器 | 型番 | HA-CB02 |
| 形名 | セルボディシェイプ | | |
| 無料修理保証 期間 | 対象部分 | 期間 | |
| | 本体 | お買い上げ日から1年間 | |
| 店名・住所・電話 | | | |
| ※販売者名 | | | |
| ご購入日のわかる明細を貼付または 本保証書とあわせて保管してください。 | | | |

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行うことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、
お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ日がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。

●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

発売元

エステティックTBC

〒163-0655

東京都新宿区西新宿1-25-1

お客様相談室 ☎ 0120-80-1272


HA-CB02-1-002

取扱説明書

家庭用美容器

セルボディシェイプ

Celu Body Shape

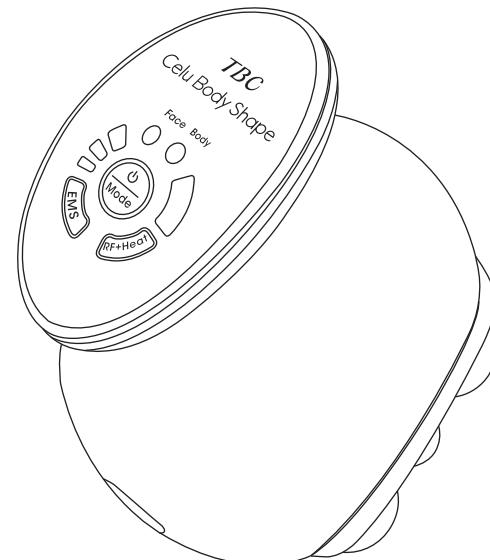

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

もくじ

| | |
|---------------------|----|
| 安全上のご注意 | 2 |
| 各部の名称 | 8 |
| ご使用の前に | |
| ・操作表示部と操作方法 | 9 |
| ・特長 | 11 |
| ・充電の仕方 | 11 |
| ・お肌へのプレテスト | 13 |
| ・各モードについて | 14 |
| 使い方 | |
| ・Bodyモード1、2の使い方 | 15 |
| ・ボディのおすすめトリートメント方法 | 16 |
| ・Faceモードの使い方 | 17 |
| ・フェイスのおすすめトリートメント方法 | 18 |
| 使い終わったら | |
| ・お掃除の仕方 | 19 |
| ・保管の仕方 | 20 |
| ・保守・点検について | 20 |
| こんなときには | |
| ・困ったときは | 21 |
| ・よくあるご質問 | 23 |
| 海外でのご使用について | 24 |
| アフターサービス | 25 |
| 製品仕様 | 25 |
| 保証規定 | 26 |
| 保証書 | 27 |

安全上のご注意

- ・ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- ・異常が発生した場合は、ただちに使用を中止してください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- ・注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害^{*}の発生が想定される内容です。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

●図記号について(次は図記号の例です)



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。



危険

次に該当する方は使用しないでください。

医療用電子機器の誤作動を招く原因となります。



禁止

●医療用電子機器を使用している方

- ・ペースメーカーなど体内植込み型医療用電子機器
- ・人工心肺など生命維持用医療用電子機器
- ・心電計などの装着型医療用電子機器



警告

次のような方は使用しないでください。
事故やトラブルの原因になります。

- 医師の治療を受けている方 ●成長過程の方(12歳以下の子供)
- 急性疾患 ●結核性疾患 ●発熱している方 ●高血圧 ●伝染病疾患
- 悪性腫瘍 ●アレルギー体质 ●血液疾患 ●内臓疾患 ●皮膚病
- アトピー性皮膚炎 ●敏感肌または肌の弱い方 ●疲労が激しい方
- 皮膚トラブルがある方 ●体調がすぐれない方 ●酒気帯びの方
- 眠気をさそう薬を服用中の方 ●生理中、妊娠中、授乳中の方
- 物理的刺激などによる病的なシミのある方 ●顔面神経痛のある方
- 歯を治療中の方(顔への使用時) ●皮膚がん病歴のある方
- ステロイド系ホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている方



禁止

指定の部位以外や次のような部位には使用しないでください。
事故やトラブルの原因になります。

- 外科手術をした部位(美容整形も含む)
- 唇、口腔内や性器及び周辺の粘膜など ●静脈瘤のある部分
- ウイルス性のイボ ●かゆみやほてりのある部位
- 過度の日焼けで肌がヒリヒリし、炎症を起こしている部位
- ニキビ ●皮膚が化膿して炎症を起こしている部位
- 心臓の直上(みぞおち周り)
- 指や手首、足首など細い部分 ●ホクロ、シミ、あざのある部分
- 肘、膝、鎖骨、額、まぶたなど皮膚の薄い部位(骨のすぐ上) ●頭部
- 首のどぼとけ ●バストトップ ●まぶた・目周り
- 金属等が入っている直上 ●傷、ケロイドのある部分
- 色素が濃く沈着された部位(肝斑を含む)

ご自分で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。




禁止

使用中は同じ箇所に当て続
けない。必ずお肌の上を動
かしながら使用する。
ケガ・やけどなどの原因とな
ります。



禁止

過剰な連続使用はしない。
(業務用としての使用など)
ケガ・やけどなどの原因とな
ります。
※業務用としての使用は無
料修理保証対象外とな
ります。

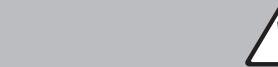

警告

頭部には絶対に使用しない。
ケガの原因となります。



**ACアダプターを破損、加
工、束ねるなど無理に力を
加えない。**

また、重いものを乗せたり、
挟み込んだりしない。電源
コードが破損し、火災・感電
の原因となります。



**異臭・異常発熱したときは
使用しない。**
そのまま使用すると破損・発
火の原因となります。



**自分で意思表示ができない
人に使わせない。**
事故やケガの原因となります。



**ACアダプターを引っ張って
持ち上げたりしない。**
感電・ショート・発火・断線の
原因となります。



**ACアダプターを水につけ
たり、水をかけたり、水洗い
しない。**
感電・ショート・発火・故障の
原因となります。

引火性のもの(アルコール・
シンナー・ベンジン・除光
液・スプレーなど)の近くで
使用しない。
火災・感電・ケガの原因とな
ります。

ACアダプターが傷んだり、
コンセントの差しみがゆ
るいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因とな
ります。修理はお買い上げの販
売店窓口にご相談ください。

本体に重い物を置いたり、
使用中に落下させたりな
ど、強い衝撃を与えない。
ケガをしたり、本製品が故障
する原因となります。

身体の不自由な人だけでの
使用は避ける。未成年の方
は保護者同意のうえ、保護
者監視のもと使用する。
ケガをする原因となります。

使用目的以外に使用しない。
ケガをしたり、本製品が故障
する原因となります。

分解や修理・改造はしない。
火災・感電・ケガの原因とな
ります。
修理はお買い上げの販売店
窓口にご相談ください。



警 告

必ず交流100~240Vで使用する(無料修理は国内のみ)。ACアダプターは根元まで確実に差し込む。

火災・感電・故障の原因となります。

必ず守る
※海外からの無料修理保証は受付できません。修理依頼には日本での発送、受取ができる連絡先、住所が必要となります。

必ず守る
ACアダプターを抜くときは、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く(金属部に触れないようにする)。また、ぬれた手で抜き差しはしない。感電・ショート・発火の原因となります。

発火注意
火のそばや炎天下、浴室などの高温多湿の場所、可燃性ガス、燃えやすいもの、そばに放置しない。また、火中投入・加熱・高温での充電・使用をしない。熱器具に近づけない。
本製品は充電式電池を内蔵しています。発熱・発火・破裂・動作不良の原因となります。

必ず守る
顔に使用するときは必ずFaceモードにして使用する。お肌を傷める原因となります。



必ず守る

必ず専用のACアダプターを使用する。

ACアダプターは、壁面コンセントに直接差し込み、タコ足配線しない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



必ず守る

アダプタープラグ差し込み口(充電端子)に水が付着していないことを確認してから充電する。充電は水気のない室内で行う。

感電・ショート・発火の原因となります。



プラグを抜く

お掃除するときは必ず電源をオフにし、使用しないときはACアダプターをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差しはしない。

感電・ショート・発火の原因となります。



必ず守る

万一、異常が発生したら、電源をすぐに切る。

動作不良・発煙・異音・異臭がするなど、異常状態のまま使用しないでください。



必ず守る

歯の治療を受けている方は、顔への使用は控えてください。

歯の治療中は、ほほ・あごに刺激を強く感じたり不快に感じる場合がありますので使用は控えてください。



注 意

化粧品(使用に適したもの)、水以外使用しない。

肌トラブル、故障の原因となります。

〈使用に適さない化粧品類〉

- ・オイル・スクランブ系・刺激の強い化粧水・ボディソープ
- ・温感のある化粧水、マッサージジェル
- ・塩分、ミネラル等を含む化粧水、マッサージジェル等



禁 止



禁 止

電極ローラー、RF電極を金属物にあてない。

発熱・発火・故障・破損の原因となります。



必ず守る

初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1から使用する。

事故やケガの原因となります。



必ず守る

途中で気分が悪くなったり、お肌に異常があらわれた場合は、使用を中止する。

翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。



必ず守る

温泉や入浴剤入りのお湯で使用しない。

本体が故障する原因となります。



必ず守る

本体をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かない。

本体の表面に損傷を与える原因となります。



禁 止

ペットには使用しない。

ケガの原因になります。



屋外禁止

屋外で使用しない。

本体の故障・誤作動の原因となります。



必ず守る

使用後は毎回、「使い終わったら」(P.19)を参照して、製品に付着したジェルなどを取り除く。

故障、肌トラブルの原因となります。



必ず守る

浴室・水中に放置しない。

サウナや岩盤浴へは持ち込まない。

ケガ・故障の原因となります。

⚠ 注意

以下の項目は必ず守る。

- 事故やケガ、本体が故障する原因となります。
- 同じ箇所に設定時間以上の使用は避ける。(P.14参照)
- お肌の状態にあわせて使用する。
- お肌に発疹、炎症、かゆみ等の異常を起こしている場合は使用しない。
- 日焼け直後、ピーリングやパックのお手入れとの併用は控える。
- 使用後は必ず電源を切る。

電極ローラーやRF電極面とお肌との間に、常に化粧品・水などがあるよう、途中で補充する。

化粧品・水などがないと、RF(ラジオ波)・EMS(筋肉刺激)の伝達が悪くなり効果が低下したり、肌トラブルの原因となります。

入浴中に水に浸っていない部分に使用する場合は、必ずレベルを低めに設定して使用する。

EMSの刺激は、水中では弱く感じられます。そのため、水中で設定したレベルで、水中以外で使用するとEMSの刺激が強く感じることがありますのでご注意ください。



禁止
ボタンやバックルの上から使用しない。
本体が故障する原因となります。

禁止
本体にヒビやメッキ剥がれがあつたり、電極面に不具合がある場合は使用しない。
お肌を傷める原因になります。

必ず守る
同一部位に設定時間以上の使用は避ける。
EMSトリートメントが終了した後に、再度同一部位に使用する場合は、5時間以上時間をあけてください。

必ず守る
使用中は皮膚の挟み込みに注意する。強く挟み込んだ状態で使用しない。
ローラーが皮膚を挟み込みすぎないように、本体とお肌の角度を調整しながらご使用ください。

● 製品外観

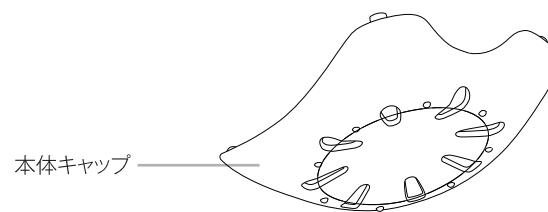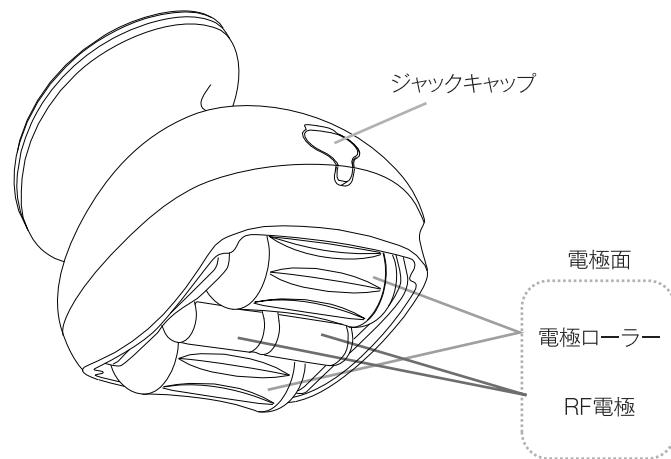


● 付属品

- ACアダプター 1個

* ACアダプターは本機専用です。
* 本体及び付属品のデザイン、仕様は品質向上のため予告なく変更する場合があります。

ご使用の前に

操作表示部と操作方法

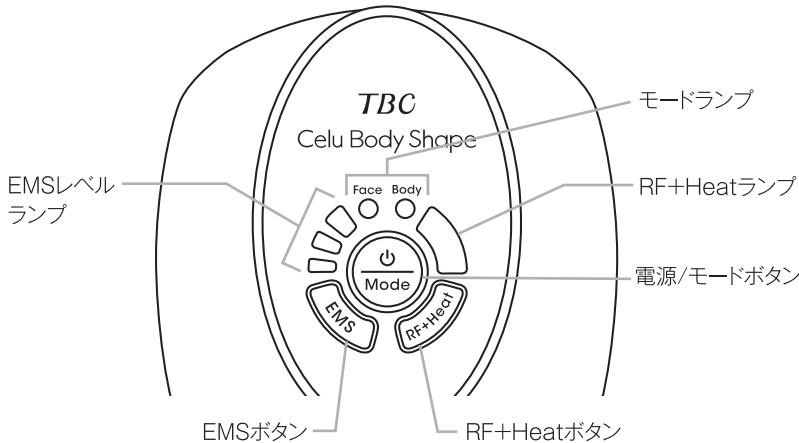

●各ボタンについて

| ボタン | 機能 | ランプ表示 |
|-----|--|--|
| | 電源オン/オフします (長押し約1秒) | Bodyモードランプ青点灯 |
| | モードを選択します (電源オンの状態で短押し) | Bodyモード1 Bodyモード2 Faceモード (電源オン時) Face Body → Face Body → Face Body ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○は点滅を表します。 |
| | EMSオン/オフ/レベル切り替え (電源オンの状態で 短押し毎にオン→レベル切り替え →オフ切り替え) | P10. ●レベルについて 参照 |
| | RF+Heatオン/オフ (電源オンの状態でRF+Heat ボタン短押し) | RF+Heatランプ青点灯 |

●レベルについて

〈EMS(筋肉刺激)レベル〉

EMSレベルボタンを押すと下記の順番でレベルが変わり、EMSレベルランプの点灯と点滅でレベルを表示します。

※使い始めや、慣れるまではレベル1からご使用ください。

オフ レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5 レベル6
(電源オン時) (EMSオン時)



○は点滅を表します。

レベルを上げると、刺激が強く感じられます。

心地よいと感じるレベルに設定してください。

※ピリピリとした痛みを感じるほどレベルを上げないでください。

※本製品は防水性能があり、お風呂でも使用可能ですが、水中と水中以外の使用では体感が変わることがあります。

〈RF+Heatレベル〉

RF+Heatはレベル調節できません。

●充電操作

・ACアダプターを本体に差し込むと充電が開始します(モードランプが交互に青点滅)。

・満充電になるとモードランプが2つ青点灯します。

・充電中に本体は動作できません。

特長

本製品は、RF(ラジオ波)+ヒーターでお肌を温め、EMS+ローラーでトリートメントを行う家庭用美容器です。

●RF(ラジオ波)+ヒーター

使用部位を素早く温めることができます。

お肌を温めることで、トリートメントに適した状態にすることができます。

●EMS(筋肉刺激)

EMSとは外部から電気的な刺激を与えて、筋肉を動かす運動法です。

| | |
|----------|-----------------------------|
| Bodyモード1 | 中周波×低周波のダブル波で筋肉をしっかりと刺激します。 |
| Bodyモード2 | リズミカルな低周波で心地よく筋肉を刺激します。 |
| Faceモード | 2種類の低周波で筋肉を刺激します。 |

●自動電源オフ(オートオフ)

EMSまたはRF+Heatを選択してから、Bodyモードの場合は10分たつと、Faceモードの場合は5分たつとオートオフになります。(過剰な連続使用、オーバートリートメント、電源切り忘れ防止)

EMSまたはRF+Heatを選択していない状態(スタンバイ状態)の時は2分たつとオートオフになります。

●防水性能

入浴中やシャワーを浴びながら使用することができます。本製品は防水性能を表すIPX7(JIS規格)に相当します。

※IPX7とは常温で水道水、かつ静水の水深1mのところに製品を沈め、約30分間放置後に取り出したときに、製品内部に浸水がないことを意味します。水中に放置はしないでください。

充電の仕方

本製品は充電式のため、充電してからお使いください。

・使い始め(購入直後や長時間使用しなかった場合)は必ず充電してください。

●充電時間の目安


| 充電時間 | 動作時間 |
|------|------|
| 約3時間 | 約2時間 |

※充電環境 室温約25°Cにおいて

※満充電直後の動作時間です。

※充電時間、動作時間は使用モード・使用レベル・使用環境によって変わります。

※電池残量により、充電時間が短くなる場合があります。

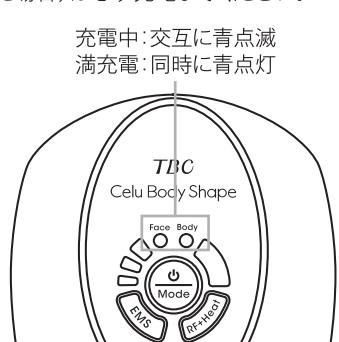

●充電の仕方

- 1 ジャックキャップをあけ、本体全体とアダプタープラグ差込口(充電端子)の水滴をしっかりと拭き取ります。アダプタープラグ差込口にアダプタープラグをしっかりと奥まで差し込み、ACアダプターを壁面コンセントに差し込みます。

※本体キャップをつけてから充電してください。

※電源をオフにしてから充電してください。

※モードランプが交互に青点滅し、


充電が開始することを確認してください。

※充電が完了すると、FaceモードランプとBodyモードランプが青点灯します。

※充電端子に水滴が残ったまま充電すると、

製品の故障につながる恐れがあります。

水が付着していないことを確認してください。アダプタープラグ

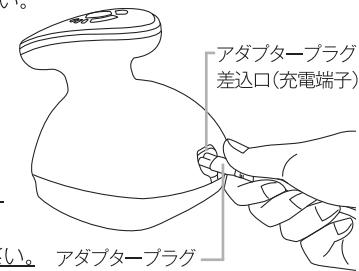

- 2 充電完了後、ACアダプターをコンセントから抜き、アダプタープラグを本体のアダプタープラグ差込口から抜きます。



注意

- 必ず専用のACアダプターを使用してください。
- ACアダプターは壁面のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしないでください。
- 周辺温度は、10~35°Cの範囲で充電してください。
- 高温多湿な場所で充電しないでください。(浴室・洗面所など)
- コードが破損した場合は、ACアダプターを交換してください。
- 充電端子に水滴や化粧品等が残ったまま充電すると、製品の故障につながる恐れがあります。
- 充電端子が化粧品などで汚れていると充電できない場合があります。その場合は柔らかい布等で拭き取ってください。

●充電できない場合

本体が充電を開始しない場合、以下の方法をお試しください。

- ・本体の電源がオフになっているかを確認してください。
- ・本体のアダプタープラグ差込口(充電端子)にアダプタープラグをしっかりと奥まで差し込んでください。

本体の充電端子部分の水やジェル、汚れはしっかりと拭き取ってから充電してください。

お肌へのプレテスト

※製品や使用する化粧品を初めてご使用になる際は、必ず皮膚トラブルが起きないか相性をプレテストをしましょう。

1 お肌を清潔な状態にします。

腕の内側を石鹼で洗い、タオルなどで拭き取ります。

2 腕の内側に化粧品(油分を含まないジェル・化粧水)または水を塗り、Bodyモード(モード1)でRF+Heat、EMSをオンにし、約3分間製品を使用します。

- ・EMSのレベルは1で行ってください。
- ・プレテストをした部分は水でぬらしたり、こすったりしないでください。

24時間以内にお肌に異常(赤みやはだり等)がないことを確認してから使用してください。



注意

- ・肌トラブルを防止するため、必ず事前に実施してください。
- ・実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止して洗い流してください。
- ・お肌に異常を感じた場合は使用しないでください。

各モードについて

本製品には、Bodyモード(モード1、モード2)、Faceモードがあります。
顔には必ずFaceモードを使用してください。

| モード | 機能 | 使用頻度(目安) |
|------|-------------------------|---|
| Body | RF(ラジオ波)、ヒーター、EMS(筋肉刺激) | 全身で1回30分以内(1部位につき、Bodyは10分程度、Faceは5分程度)1部位につき週に2~3回 ※RF(ラジオ波)を選択すると同時にヒーターが作動されます。 ※あくまでも目安となります。毎日使用される際はご自身のお肌の様子を確認しながら使用してください。 |
| Face | | |

- ・機能の詳しい説明については「特長」(P.11)を参照してください。
- ・使用時は、1箇所に止めず必ずお肌の上を動かしながら使用してください。
※1部位=ひじ上、ひじ下、ふくらはぎ、太もも、腹部前側、腹部後側、ヒップなど
※過度な使用、1箇所への集中使用、レベルの上げすぎなどはお肌を傷める原因となります。
※同じ部位に使用する場合は、最低5時間程度、時間をあけてください。

●お肌の状態と化粧品について

本製品を使用する部位には、必ず、化粧品・水をお肌に塗ってからご使用ください。
何も付けずに直接使用すると体感や効果を感じにくく、また肌トラブルの原因になります。

〈使用に適さない化粧品類〉

- ・オイル
- ・スクラブ系
- ・刺激の強い化粧水
- ・ボディソープ
- ・温感のある化粧水、マッサージジェル
- ・塩分、ミネラル等を含む化粧水、マッサージジェル 等

●使用禁止部位

下記の部位には絶対に使用しないでください。

- ・口内や陰部、粘膜など
- ・首、のどぼとけ
- ・整形手術をした部位
- ・切り傷
- ・心臓の直上(みぞおち周り)
- ・肘、膝、鎖骨、額、まぶたなど皮膚の薄い部分
- ・頭部
- ・指や手首、足首など細い部分(電極面全体が触れない部分)
- ・バストップ

使い方

Bodyモード1、2の使い方


※顔には絶対に使用しないでください。

1 お肌に通電用のジェルまたは水を塗布してください。

- ・お風呂で使用する場合は、浴槽につかるか、お肌を水でたっぷりぬらしてください。

2 電源/モードボタンを長押し(1秒以上)し、電源をオンにします。

- ・Bodyモードランプが青点灯し、モード1の状態になります。その状態で電源/モードボタンを短押しするとBodyモードランプが青色に点滅し、モード2の状態になります。

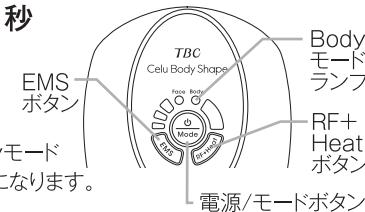

3 RF+Heat(ラジオ波・ヒーター)ボタンを押し、RF+Heatをオンにします。

4 EMS(筋肉刺激)ボタンを押してEMSをオンにし、好みに合わせ、レベルを調節します。

- ・レベルランプが青点滅し、レベル1の状態になります。
※使いはじめは必ずレベル1からはじめてください。
※EMS使用時はピリピリとした痛みを感じるほど、レベルを上げないでください。
※モード1を使用し、レベル1で痛みを感じる方や出力を上げられない、または筋肉が動かない方はモード2を使用してください。慣れてきたらモード1を使用してください。

5 電極ローラーがお肌に密着するようにゆっくり転がしてください。

- ・電極ローラー全体がお肌に触れるようにする。
※おすすめのトリートメント方法はP.16を参照してください。

6 トリートメントが終了したら、電源/モードボタンを長押し(1秒以上)し、電源をオフにする。

- ※ EMSまたは、RF+Heatを選択した状態で10分経過すると自動的に電源がオフになります。



注意

- ・ 使用するときは必ず電極ローラー全体がお肌にあたるように使用してください。
- ・ 使用禁止部位(P.14)には絶対に使用しないでください。
- ・ 使用中は必ずお肌の上を動かして使用してください。
- ・ 化粧品(使用に適したもの)、水以外は使用しないでください。ケガ・肌トラブル、故障の原因となります。

ボディのおすすめトリートメント方法



直線

内側から外側、または外側から内側に向かってタテ又はヨコに動かしながら移動します。




斜め

内側から外側または外側から内側に向かって斜めに動かしながらお肌を持ち上げ&引き上げように行いましょう。




●二の腕

(片腕5分程度目安)

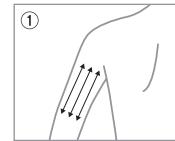




●お腹(ウエスト)

(10分程度目安)

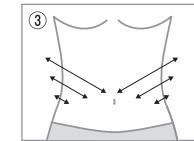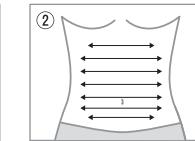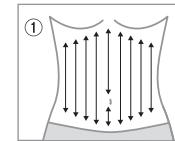



●太もも表

(片脚10分程度目安)

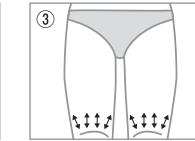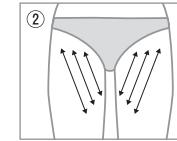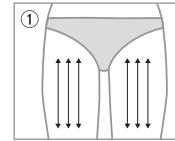


●ヒップ・太もも裏

(片脚10分程度目安)

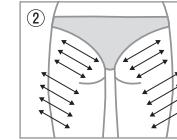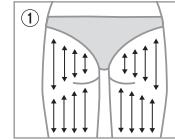

●肩

(Bodyモード2を使用)

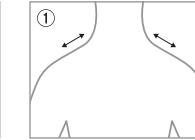

※ モード1では行わないでください。

※ローラーの転がすスピードについて

EMSで筋肉を刺激させたい場合は、ローラーをゆっくり転がしてください。

Faceモードの使い方

※必ず顔にはFaceモードを使用してください。

- 1 お肌に通電用のジェルまたは水を塗布してください。**
 - ・お風呂で使用する場合は、お肌を水でたっぷりぬらしてください。
- 2 電源/モードボタンを長押し(1秒以上)し、電源をオンにします。**
 - ・Bodyモードランプが青点灯します。
- 3 電源/モードボタンを2回押し、Faceモードにします。**
 - ・Faceモードランプが青点灯します。
- 4 RF+Heat(ラジオ波・ヒーター)ボタンを押し、RF+Heatをオンにします。**
- 5 EMS(筋肉刺激)ボタンを押してEMSをオンにし、好みに合わせレベルを調節します。**
 - ・レベルランプが青点滅しレベル1の状態になります。
 - ※使いはじめは必ずレベル1からはじめてください。
 - ※EMS使用時は、ピリピリとした痛みを感じるほど、レベルを上げないでください。
- 6 電極ローラーがお肌に密着するようにゆっくり転がしてください。**
 - ・電極ローラー全体がお肌に触れるようにする。
 - ※おすすめのトリートメント方法はP.18を参照してください。
- 7 トリートメントが終了したら、電源/モードボタンを長押し(1秒以上)し、電源をオフにします。**
 - ※ EMSまたは、RF+Heatを選択した状態で5分経過すると自動的に電源がオフになります。




注意

- ・ 使用するときは必ず電極ローラー全体がお肌にあたるように使用してください。
- ・ 使用禁止部位(P.14、18)には絶対に使用しないでください。
- ・ 使用中は必ずお肌の上を動かして使用してください。
- ・ 化粧品(使用に適したもの)、水以外は使用しないでください。ケガ・肌トラブル、故障の原因となります。


フェイスのおすすめトリートメント方法

●トリートメントの目安時間 (顔全体で5分程度)


●フェイスラインが気になる方

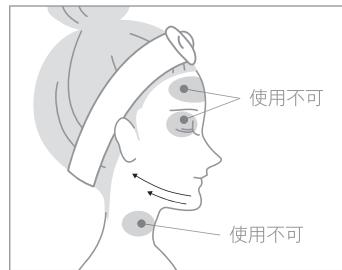

●頬が気になる方

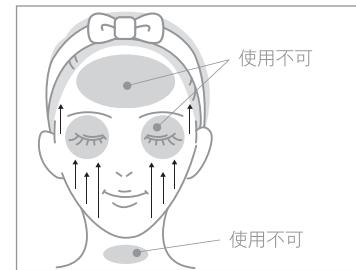

●全体のもたつきが気になる方

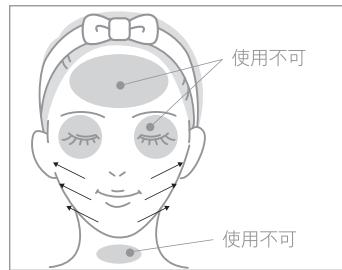

警告



額・まぶた・首には絶対に使用しないでください。



注意

過度に力を入れて使用しないでください。肌トラブルの原因となります。

使い終わったら

お掃除の仕方

電極ローラー、RF電極面は、使用後に毎回必ずお掃除をしてください。

製品の故障・動作不良を防ぐために、使用後は、お掃除をしてください。

お掃除する際は必ず電源をオフにし、ACアダプターを本体と壁面コンセントから抜いてください。

●本体のお掃除

- 1 電極ローラー、RF電極面についていた水滴や化粧水、ジェルなどを拭き取る。
- 2 水で湿らせて固くしぶった布で、表面の汚れを拭き取る。
 - ・汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤を含ませたスポンジや布で拭き取ってください。
 - ・アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。
- 3 アダプタープラグ差込口(充電端子)についていた水滴や汚れを拭き取る。



●お風呂で使用した後のお掃除

- 1 本体についていた水滴を拭き取る。
アダプタープラグ差込口(充電端子)に水滴がついている場合は、よく振って水をしっかり切る。
※落としたり、壁などにぶつけない様、ご注意ください。

2 風通しの良い場所で乾かす。

※直射日光にあてないでください。

※本体がぬれた状態のまま、充電しないでください。

保管の仕方

- 長期間使用しないときは、本体のお掃除をしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、ACアダプターを壁面コンセントから抜いて保管してください。
- ストーブやヒーターのそば、浴室など高温多湿の場所、車の中、直射日光のある場所、不安定な場所での保管は避けてください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

保守・点検について

- 長期間使用しなかった本製品を再び使用するときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「困ったときは」(P.21～P.22)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえ発売元までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

こんなときには

困ったときは

本製品をご使用中に異常や、以下の症状がみられる場合は、原因と処置方法をご確認ください。

こんな症状

考えられる原因

処置方法

電源が入らない

→ 充電がされていない

→ 充電をしてください

電源が切れる(充電しても数分しか使えない)

→ 充電不足

→ 約3時間充電をしてください

→ オートオフタイマーが働いた

→ 再度電源を入れ直してください

充電できないまたは充電時にモードランプが点滅しない

→ アダプタープラグが本体に差さっていない

→ しっかりと奥まで差し込んでください

→ 既に満充電になっている

→ 電源がオフになっている

→ 電源をオフにしてください

RF(ラジオ波)+ヒーターがでない(感じない)

→ 使用したい部位をぬらしていない
お肌が乾燥している

→ 化粧品・水などでたっぷりとぬらしてください
(化粧品の種類によってはRFが感じにくい場合もあります)

→ RF電極面がお肌にあたっていない

→ RF電極面がお肌にあたるようにしてください

→ 水中で使用している

→ 水中ではRFが弱く感じる場合があります

RF(ラジオ波)+ヒーターが熱い

→ 1箇所にあて続けている/動かす速さが遅い

→ 動かす速さを少し速めにしてください

→ RF電極面全体がお肌にあたっていない

→ RF電極面がお肌にあたるようにしてください

こんな症状

考えられる原因

処置方法

→ 使用したい部位をぬらしていない

→ 化粧品または水でたっぷりとぬらしてください

→ レベルが低い

→ EMSボタンでレベルを上げてください

EMS(筋肉刺激)がでない(感じない)

→ 感じにくい部位にあてている

→ あてる部位を変えてください(P.16、18参照)

→ 片方のローラーしかお肌にあたっていない

→ 両方のローラーをお肌にあててください

→ 感じ方には個人差があります

EMS(筋肉刺激)が痛い

→ 電極ローラー全体がお肌にあたっていない

→ 電極ローラー全体がお肌にあたるようにしてください

→ レベルが高い

→ EMSボタンでレベルを下げてください

→ Bodyモード1を使用の場合はBodyモード2を使用してみてください

海外でのご使用について

よくあるご質問

| Q | A |
|--------------------|---|
| お風呂で使用できますか？ | はい。本製品は防水製品ですので使用できます。(IPX7相当) ただし、水やお湯の中に長時間沈めて放置しないでください。 温泉や入浴剤入りのお湯では使用できません。 ※水中に30分以上放置しないでください。 |
| おすすめの使い方はありますか？ | 入浴中や入浴後など、体が温まっている時の使用がおすすめです。体をほぐすように使用してください。 |
| サウナや岩盤浴で使用できますか？ | サウナや岩盤浴など、本体が高温になる場所ではやけどの危険がありますので絶対に使用しないでください。 |
| お風呂以外でも使用できますか？ | お部屋でご使用の場合、ジェルや水などと一緒にご使用ください。お肌が乾いた状態ではRF、EMSがお肌に伝わりにくくなります。 |
| 敏感肌なのですが使用できますか？ | 始めに「お肌へのプレテスト」(P.13)を参照して使用し、お肌の様子を確認してください。お肌に異常がなければご使用いただけます。 お肌に異常を感じた場合は、すぐにご使用を中止してください。ご自分で判断が難しい場合は医師にご相談ください。 |
| どんな化粧品を使用すればいいですか？ | お手持ちの化粧水や美容液、ジェルを使用することができます。ただし、以下の化粧品は、お肌のトラブルや本製品が故障する原因となりますので、使用しないでください。 (使用に適さない化粧品類) <ul style="list-style-type: none"> ・オイル・スクラブ系・ボディソープ ・刺激の強い化粧水 ・温感のある化粧水、マッサージジェル ・塩分、ミネラル等を含む化粧水、マッサージジェル 等 |

こんなときには

海外でのご使用について



警告



必ず守る

必ず交流100~240Vで使用する。(無料修理は国内のみ)

火災・感電の原因となります。

※海外からの無料修理保証は受付できません。修理依頼には日本での発送、受取ができる連絡先、住所が必要となります。



必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。

発熱・発火・故障の原因となります。

- 本製品はAプラグです。それ以外の場合はプラグ変換アダプターをご使用ください。
※付属品ではありません。

主なプラグ形状と使用国

| タイプ | プラグ形状 | 主な使用国 |
|-----|-------|---|
| A | | アメリカ、カナダ、ハワイ、スペイン、グアム島、サイパン島、タイ、韓国、台湾、中国、フィリピン、ベトナム、ブラジル、トルコ など |
| B3 | | イギリス、イスラエル、中国、香港、インド、シンガポール、フィリピン、エジプト、南アフリカ共和国 など |
| BF | | カナダ、イギリス、イスラエル、タイ、韓国、シンガポール、中国、香港、エジプト、南アフリカ共和国 など |
| C | | イタリア、オランダ、イスラエル、スペイン、ドイツ、フランス、インド、タイ、韓国、中国、香港、マレーシア、トルコ など |
| O | | イギリス、フランス、オーストラリア、ニュージーランド、韓国、台湾、中国、フィリピン、アルゼンチン など |

- 地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認のうえご使用ください。

- プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。

アフターサービス

●充電池について

- ・充電池は消耗品です(保証対象外)。
- ・充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は約300回が目安です)。
- ・充電池交換をご希望の場合は、販売店または発売元にご相談ください。

●廃棄について

本製品はリチウムイオン蓄電池を使用しています。
本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。



●製品仕様

| | |
|-----------|--|
| 定格電源 | DC9.0V 1.0A (ACアダプター／入力100V～240V 50／60Hz) |
| 消費電力 | 約8W (充電時) |
| 出力周波数 | EMS: Face 12.5Hz/20Hz Bodyモード1 20Hz/1kHz Bodyモード2 5Hz RF(ラジオ波): Face/Body 1MHz |
| 充電池 | リチウムイオン蓄電池 7.4V 1100mAh |
| 製品サイズ(本体) | 約W85xD115xH106 (mm) |
| 重量 | 約340g (本体キャップ取付時) |
| 製造国 | 日本 |
| 材質 | 本体: PET樹脂、ABS樹脂 電極ローラー: ABS樹脂、ステンレス、クロムメッキ RF電極: ステンレス 本体キャップ: ポリカーボネート |
| セット内容 | 本体………1台 本体キャップ……1個 ACアダプター……1個 取扱説明書(保証書付)…1冊 |

お問い合わせ先

発売元

エステティックTBC

〒163-0655

東京都新宿区西新宿1-25-1

お客様相談室 ☎ 0120-80-1272

保証規定

1. 取扱説明書の注意書きに従って使用した状態で保証期間内に故障した場合、無償修理させていただきます。

※無償修理をご依頼される場合、販売店に製品と保証書をご提示いただきお申し付けください。

※ご送付の場合、誠に恐れ入りますが、送料はお客様にてご負担をお願いいたします。

2. 保証期間内でも次の場合は原則として有償となりますのでご注意ください。

- (1) 取扱説明書以外の使用上の誤りに起因する故障及び損傷
- (2) 不当な修理や改造による故障及び損傷
- (3) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
- (4) 一般家庭以外(例えば業務用)に使用された場合の故障及び損傷
- (5) 保証書のご提示が無い場合
- (6) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、ご住所の記入が無い場合、あるいは字句を書きかえられた場合
- (7) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
- (8) 火災、地震、水害、落雷その他の天変地異、異常電圧、指定以外の電源(電圧、周波数)などを使用したことによる故障及び損傷
- (9) 弊社以外で誤った修理をしたり、改造したために生じた故障及び損傷

3. 保証書は、日本国内のみ有効です。

4. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

●保証書は、本書に明示した期間、条件において無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な点は、販売店までお問い合わせください。