

保証書

持込修理

品名	家庭用複合美容器	型番	HA-HC01-PG
製品名	ヒートキャビシェイプ PG		
無償修理保証	対象部分	期間	
	製品 (ただし、消耗品および付属品は除く)	お買い上げ日から 1年間	
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 〒 お名前 _____ 様		
※ 販売店	住所・販売店名・電話 お買い上げ日の分かる明細を貼付 または本保証書と併せて 保管してください。		

●販売店様へのお願い

必ず※印欄をご記入・ご捺印の上、お客様へお渡しください。

●お客様へのお願い

1. 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名が記載されているか確かめください。
万一記載がない場合は、ただちにお買い上げの販売店にお申し出ください。
2. 所定記入欄が空欄のままだったり、お買い上げ日・販売店名が分かるレシート・明細書が
ごさいませんと、本書は有効とはなりません。
3. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
4. 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、発売元に直接お問
い合わせください。

発売元

エステティックTBC

〒163-0655

東京都新宿区西新宿1-25-1

お客様相談室 ☎ 0120-801-272

HEAT CAVI SHAPE PG

ヒートキャビシェイプ PG

- 家庭用複合美容器 -



もくじ

1 安全上のご注意	1
2 本体と付属品・各部の名称	6
2.1 本体と付属品	6
2.2 各部の名称と働き	7
3 HEAT CAVI SHAPE PGの基本	9
3.1 HEAT CAVI SHAPE PGの特長	9
3.2 使用できる部位	10
3.3 準備から使用までの流れ	11
4 使用する前に	12
4.1 本体を充電する	12
4.2 化粧品を準備する	13
5 美容器を使う	14
5.1 肌へのプレテスト	14
5.2 モードを選択する	17
5.3 ボディに使用する	21
5.4 フェイスに使用する	24
6 使用の後に	25
7 こんなときは	27
7.1 困ったときは	27
7.2 よくあるご質問	29
8 製品仕様	31
9 保証とアフターサービス	33

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ・本製品を正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- ・**ご使用前に必ず「安全上のご注意」(P. 1~5)をお読みください。**
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも確認できる場所に大切に保管してください。
- ・本製品を他の人に譲渡する場合は、この取扱説明書を必ず添付してください。

「ヒートキャビシェイプ」充電・使用環境に関するご案内

この度は、ヒートキャビシェイプをご購入いただき、ありがとうございます。
本製品を正しくご使用いただくために、必ずお読みください。

●充電環境について

・充電・推奨室内温度：10～35℃で充電してください。

※満充電になるまで最長 約3時間かかります。(室温25℃の場合)

※バッテリーの残量により充電時間は短くなります。

●使用環境について

・使用・推奨室内温度：10～43℃でご使用ください。

※満充電で使用できる回数 / 時間：約5～6回 / 約50～60分

(最大出力時で室温が20℃～30℃の場合)

上記推奨外の温度を機器が検知すると安全機能がはたらき、
以下のような症状が発生する場合がございます。
対処方法をよく読み正しくご使用ください。

症 状	対処方法
充電すると、すぐに充電完了表示になる。	正しく充電がおこなわれていない場合があります。
充電完了したはずなのに、充電できていない。 (動作しない)	① 室内が「充電・推奨室内温度」の範囲内か確認してください。 ② 範囲外の場合、 <u>10～35℃の室内に30分以上置いてから</u> 、 再度充電をおこなってください。
充電が開始しない。	※ 充電が開始しない場合は、 <u>一度充電台から本体を外し</u> 再度充電台に設置してください。
電源を入れても、すぐに電源が切れる。	




ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

1 安全上のご注意

- 本製品は、フェイス、ボディの美容を目的とするキャビテーション、EMS、RF、LEDを搭載した家庭用複合美容器です。目的以外の用途には使用しないでください。
- 本製品のご使用前に、必ずこの「安全上のご注意」、および取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 「安全上のご注意」には、安全に関する重要な内容を記載しておりますので、必ずお守りください。
- 異常を感じたら、ただちに使用を中止して、電源をお切りください。




注意区分について

本書では、文章と図記号を用いて安全に関する情報を表示します。安全に関する情報は、人身への危害と財産への損害の程度を、「危険」、「警告」、「注意」に区分して表示します。

 危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定されるもの。
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定されるもの。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害*が発生したりすることが想定されるもの。


*物的損害とは、家屋、家財、および家畜・ペットへの拡大損害のことです。

図記号の例

	してはいけないことを示しています。
	しなければならないことを示しています。
	注意しなければならないことを示しています。





⚠ 危険

禁忌事項



 禁止	■ 次の医療用電子機器を使用している場合は、本製品を使用しない 医療用電子機器が誤作動する原因
	<ul style="list-style-type: none"> ●ペースメーカー等の体内植込型医療用電子機器 ●人工心肺等の生命維持用医療用電子機器 ●心電計等の装着型医療用電子機器

⚠ 警告



使用者について

 禁止	■ 次に該当する場合は使用しない 肌等身体に関わる事故やトラブルの原因
	<ul style="list-style-type: none"> ●医師の治療を受けている ●12歳未満 ●急性疾患 ●結核性疾患 ●発熱している ●高血圧 ●伝染性疾患 ●悪性疾患 ●アレルギー体質 ●内臓疾患 ●皮膚病 ●アトピー性皮膚炎 ●敏感肌または肌が弱い ●疲労している ●皮膚にトラブルがある ●体調がすぐれない ●酒気帯び ●眠気をさそう薬を服用している ●生理中、妊娠中、授乳中 ●物理的刺激等による病的なシミがある ●糖尿病 ●心臓疾患 ●出血性疾患 ●ステロイド等の薬を継続的に使用している ●肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている ●除毛や脱毛をした当日 ●日焼け直後、ピーリング直後 ●自分で意思表示できない ●温度の感覚が鈍い
 禁止	■ 次の部分には使用しない 肌等身体に関わる事故やトラブルの原因
	<ul style="list-style-type: none"> ●指定以外の部分 ●上まぶた等目の上 ●鼻、口の周り ●のど ●心臓の真上 ●ひじ、ひざ、鎖骨、額等の皮膚の薄い部分 ●骨のすぐ上 ●へその真上 ●静脈瘤のある部分 ●外科手術(美容整形も含む)をした部分 ●過度に日焼けをした部分 ●体内に金属、シリコン、プラスチック等の器具を埋め込んでいる部分 ●皮膚炎のある部分 ●ウイルス性のイボのある部分 ●脱毛処理後の赤み等がある部分 ●傷、湿疹、腫れもの、ケロイドのある部分 ●刺青(タトゥー)とその周辺部分
 必ず実施	■ 次に該当する場合はフェイスに使用しない 肌等身体に関わる事故やトラブルの原因
	<ul style="list-style-type: none"> ●頭部や目に事故後の後遺症がある ●目の手術を行った ●網膜剥離 ●強度の近視 ●顔面の神経障害 ●歯の治療中
 必ず実施	■ 自己判断できない場合は、医師に相談する ■ 本製品の使用によって、肌に異常を感じた場合は、使用を中止し、医師に相談する




本体、充電台、ACアダプターについて

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ■使用目的以外に使用しない 事故や故障の原因 ■アルコール、シンナー、ベンジン、除光液等、引火性がある物の近くで使用しない 感電、ケガ、火災の原因 ■改造、分解、修理しない 感電、発火、異常動作によるケガの原因 ■過剰な連続使用はしない、業務用に使用しない やけど、ケガの原因 ※業務用に使用した場合は、修理をお受けできません。
 必ず実施	<ul style="list-style-type: none"> ■12歳未満の子どもの手の届かない所に保管する 事故や故障の原因



本体について

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ■火の中に入れてない リチウムイオン電池の破裂、発火の原因 ■高温になる場所に放置しない リチウムイオン電池の液もれ、発熱、破裂、発火の原因
 必ず実施	<ul style="list-style-type: none"> ■リチウムイオン電池が液もれしたら火気から遠ざける 引火し、破裂、発火する原因

充電台について



 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ■こたつ・電気毛布の中等の熱がこもる場所で本体を充電しない 事故や故障の原因 ■端子部にネックレスやヘアピン、コイン、鍵等の金属製品を触れさせない 通電して、発熱、破裂、発火、あるいはこれらの金属等が 発熱する原因 <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>
 必ず実施	<ul style="list-style-type: none"> ■本体は付属の充電台で充電する 専用器以外で充電すると発熱、破裂、発火等の原因

ACアダプターについて



 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ■コード部分を引っ張ったり、ぬれた手でACアダプターの金属部分を触ったりしない 感電、発火、ショート、断線の原因 ■コード部分を無理に曲げたり、重い物を乗せたりしない 感電、発火、ショート、断線の原因 ■水につけたり、水をかけたり、水洗いしたりしない 感電、発火、ショートの原因
 必ず実施	<ul style="list-style-type: none"> ■コンセントから抜いたり差し込んだりするときは、必ずACアダプターのプラグ部分を持ち、金属部分に触れないようにする 感電、発火、ショートの原因 ■ACアダプターの金属部分にホコリや水がついている場合は、差し込む前に乾いたタオルでふく 感電、発火、ショートの原因

⚠ 注意

肌について


 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ■使用前に必ずプレテストを行い、使用した部位の肌状態を確認する、異常を感じたら使用しない 肌トラブルのおそれ ■使用できる化粧品、水以外を使用しない 肌トラブル、故障のおそれ ■同じ部位に繰り返し使用しない、連続してフェイスに5分以上、ボディに10分以上使用しない うっ血、筋肉疲労、やけどのおそれ
 必ず実施	<ul style="list-style-type: none"> ■使用中に気分が悪くなったり、肌に異常を感じたりした場合は、使用を中止する 肌トラブルのおそれ ■アクセサリ等の金属を外す ケガのおそれ ■電極面と肌との間に、常に化粧品や水がある状態にし、途中で不足したら塗り足す 肌トラブルのおそれ ■入浴中、水に浸かっていない部位に使用する場合は、必ずEMSの出力レベルを低めに設定する (EMSの出力は、水中よりも、水の外の方が強く感じられるため) 肌トラブル、筋肉疲労のおそれ ■フェイスに使用する場合は、必ずフェイスモードに設定する 肌トラブル、筋肉疲労のおそれ ■慣れるまでは、EMSの出力レベルを上げ過ぎない 肌トラブルのおそれ

本体について

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ■使用前に電極面を確認し、変形、変色、破損等がある場合は使用しない やけど、肌トラブルのおそれ ■ペットには使用しない ケガのおそれ ■電極面を金属、物にあてない 発熱、発火、故障、破損の原因 ■屋外、直射日光の下で使用しない 故障、動作不良の原因 ■アルカリ性洗剤・アルコール・シンナー・ベンジン・除光液等の溶剤でふかない 表面が損傷する原因 ■高い所に保管しない 落下による故障の原因
 必ず実施	<ul style="list-style-type: none"> ■使用後は本体の電源を切り、充電台に接続されたACアダプターのプラグ部分をコンセントから抜く 火災、発火のおそれ ■本体の電源を切ってから、充電台に乗せる 発熱、発火、故障、破損の原因

■操作面のラベルについて

出荷時には、本体の操作面にラベルシールが貼られています。
ラベルシールは操作に不慣れな方に、操作面を分かりやすくお知らせするためのものです。
操作に慣れた方は、ラベルシールを剥がして使用しても問題ありません。

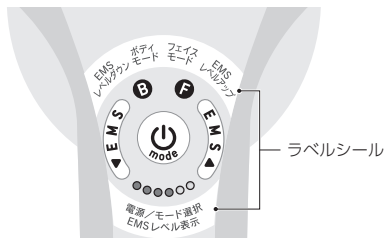


2 本体と付属品・各部の名称





2.1 本体と付属品

■本体

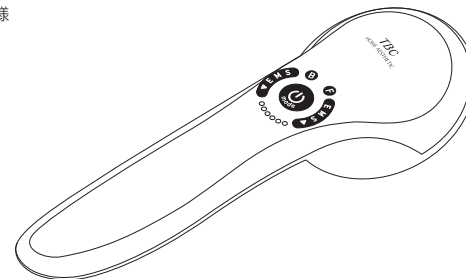※本体のみ防水仕様

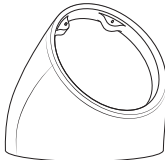


■付属品

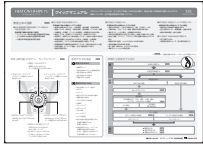充電台 	ACアダプター 
取扱説明書 (保証書付) 	クイックマニュアル 


2.2 各部の名称と働き

■本体 (操作面)

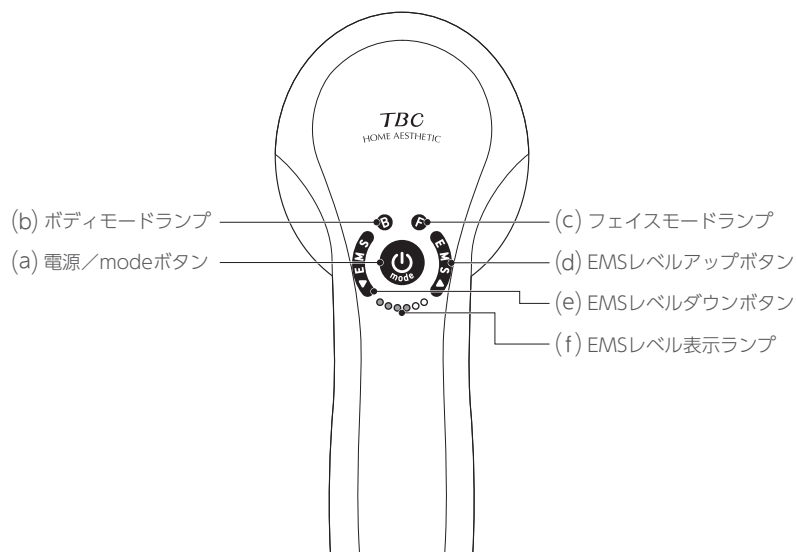

- (a)…………… 電源／modeボタン
本体の電源を操作するとき／モードを選択するときに使用します。
- (b)…………… ボディモードランプ
ボディモードを選択したときに青点灯します。
- (c)…………… フェイスモードランプ
フェイスモードを選択したときに青点灯します。
- (d)…………… EMSレベルアップボタン
EMSの出力レベルを上げるとき／モードを確定するときに使用します。
- (e)…………… EMSレベルダウンボタン
EMSの出力レベルを下げるときに使用します。
- (f)…………… EMSレベル表示ランプ
EMSの出力レベルを表示します。

■本体 (電極面)

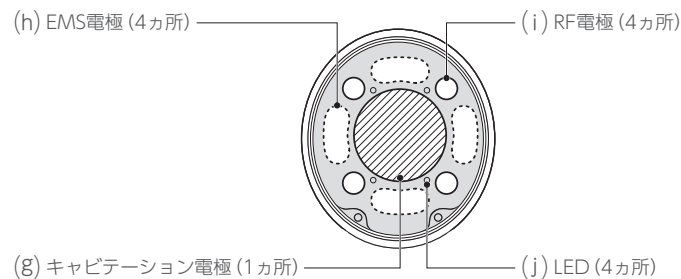

- (g)…………… キャビテーション電極 ●
キャビテーション (超音波) が出力されます。
※ボディモードのみ
- (h)…………… EMS電極 ○
低・中周波電流が出力されます。
- (i)…………… RF電極 ○
RF (ラジオ波) が出力されます。
- (j)…………… LED ○
赤色のLED (発光ダイオード) 光が点灯します。

3 HEAT CAVI SHAPE PGの基本

3.1 HEAT CAVI SHAPE PGの特長

■キャビテーション

超音波による振動で、肌のお手入れをサポートします。(ボディモードのみ)
※振動の体感はありません。

■EMS

- ボディモード
エステティシヤンのテクニックをイメージしたサークルEMSで、筋肉運動をサポートします。
- フェイスモード
3種類の低周波で筋肉運動をサポートします。



■RF

高周波で使用部位を温め、肌のお手入れをサポートします。

■LED

LED光をあてて、肌のお手入れをサポートします。
※LED光の体感はありません。

3.2 使用できる部位

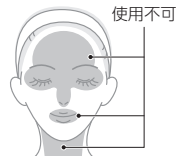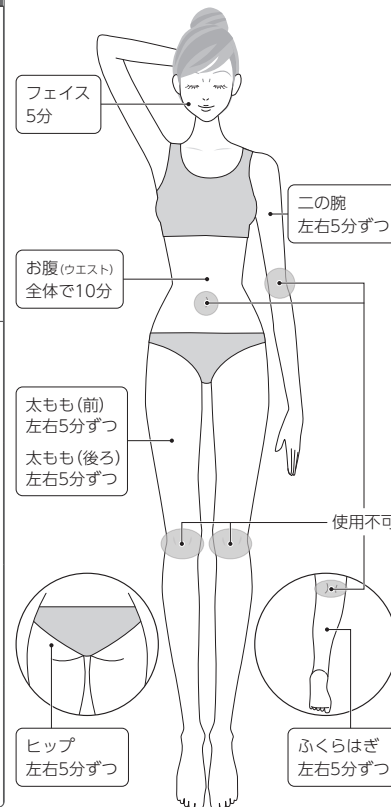使用できる部位	おすすめモード	■1回のお手入れ時間の目安
フェイス ⊘ 額、目・鼻・口の周り、のどには使用しない ⊘ ボディモードは絶対に使用しない 	・フェイスモード	
二の腕 ⊘ ひじ、ひじの内側には使用しない お腹(ウエスト) ⊘ へその真上には使用しない ヒップ、太もも ⊘ ひざ、ひざの裏には使用しない ふくらはぎ ⊘ ひざ、ひざの裏には使用しない	・ボディモード	

■使用頻度


- 全身で30分以内(1部位につき、ボディは10分以内、フェイスは5分以内)
- 1部位につき週2~3回*

※使用頻度の目安です。毎日使用される場合は、使用部位の肌を注意深く確認し、異常を感じたら、ただちに使用を中止してください。

■オートオフ機能について

安全のため、使用中に一定時間が経過すると、自動的に電源が切れます。
(ボディモードでは10分、フェイスモードでは5分)

3.3 準備から使用までの流れ

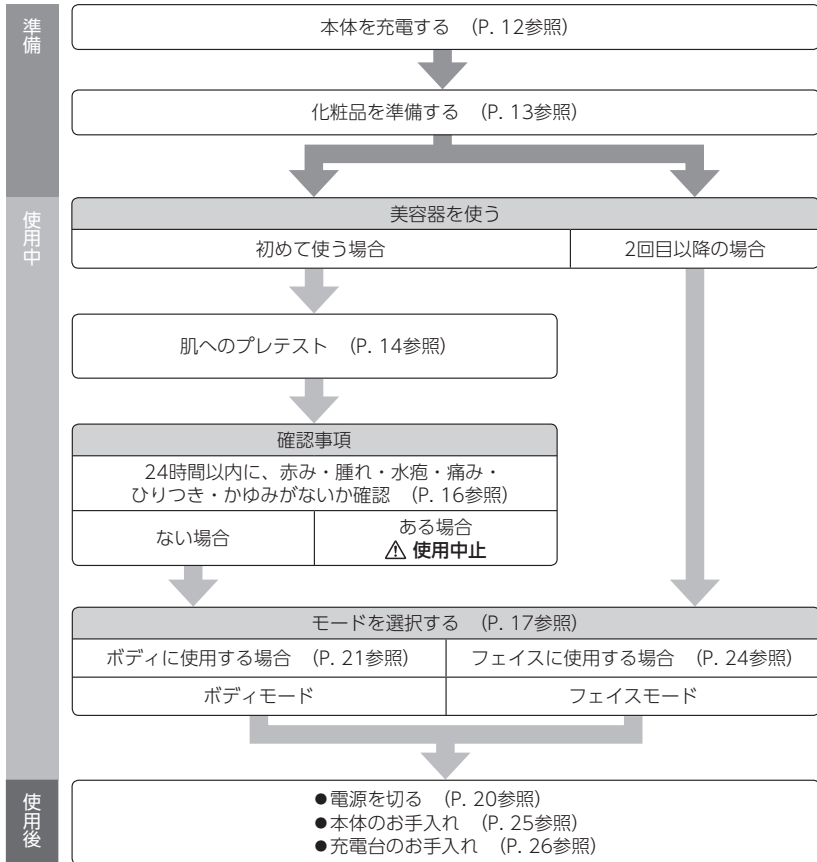

4 使用する前に



4.1 本体を充電する



■本体がぬれた状態で充電台に乗せない
感電、発火、ショートのおそれ

- ACアダプターのアダプタープラグ部分を、充電台の差し込み口に差し込む
- 本体を図の向きで充電台に乗せる
・ぐらつきがないよう、確実に乗せてください。
- ACアダプターの電源プラグ部分をコンセントに差し込む


・充電が開始し、電源/modeボタンが赤点滅します。
・充電が完了すると、電源/modeボタンが緑点灯します。

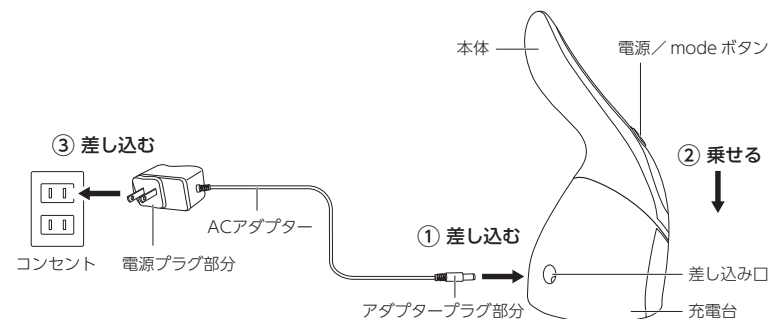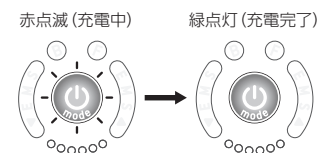

note ●約3時間で充電が完了します。(充電残量がゼロの場合)

4 充電が完了したら、ACアダプターの電源プラグ部分をコンセントから抜く

- ・電源/modeボタンが消灯します。

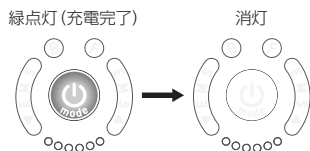

4.2 化粧品を準備する

本製品は必ず化粧品を肌に塗った状態で使用してください。

■使用できる化粧品

○ 使用できるもの	✕ 使用できないもの
<ul style="list-style-type: none"> ● 通電用ジェル ● 油分を含まないジェル (基礎化粧品) ● 油分を含まない美容液 ● 油分を含まない化粧水 ● 刺激の少ない化粧水 	<ul style="list-style-type: none"> ● 油分を含むジェル・化粧水 ● オイル ● クリーム ● 塩分やミネラル分を含む化粧水 ● 刺激の強い化粧水 ● スクラブ剤入り化粧品 ● 洗顔料 ● クレンジング ● ボディソープ ● 石けん類 ● シートマスク ● メイク化粧品 <p>※油分を含む化粧品を使用すると、本製品の機能が十分に発揮されません。</p>

note

- 本製品はお風呂でも使用できます。ただし、温泉や入浴剤入りのお風呂では使用しないでください。
- 化粧品の代わりに、シャワーや浴槽のお湯も使用できます。ただし、温泉水や入浴剤入りのお湯は使用しないでください。

5 美容器を使う

5.1 肌へのプレテスト

初めて本製品を使う場合は、必ず肌へのプレテストを実施してください。肌へのプレテストは、腕の内側に行ってください。

■準備するもの

- ・化粧品 (P. 13参照) ・タイマー 等



注意

■肌へのプレテスト前に肌の状態や体調を確認し、異常があれば肌へのプレテストを中止する
肌トラブルのおそれ

1 肌を清潔な状態にする


- ・腕の内側を洗浄し、乾いたタオル等で水分をふきとってください。
- ・保湿クリームやUVクリーム等を使用している場合は、洗浄料で洗い、十分に洗い流してください。

2 腕の内側に化粧品を塗る

- ・油分を含まないジェル、化粧水等を使用してください。(P. 13参照)


3 電源/modeボタン (🔌) を1秒以上押す

- ・電源が入り、「ピー」という音が鳴ります。
- ・電源/modeボタンが青点灯します。

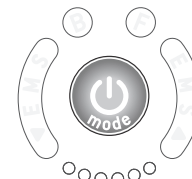


4 電源/modeボタン (🔌) を短く押す

- ・「ピッ」という音が鳴り、ボディモードランプ、EMSレベルダウンボタン、EMSレベルアップボタンが青点灯します。

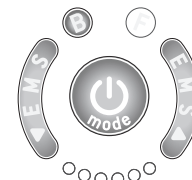

5 EMSレベルアップボタンを押して、出力を開始する

- ・「ピッ」という音が鳴り、ボディモード、EMSの出力レベルが1の状態では本体の出力が開始されます。

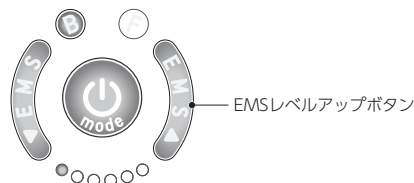


note

- モードを選択した後、2分以内にEMSレベルアップボタンを押さなかった場合(モードを確定しなかった場合)、自動的に電源が切れます。(オートオフ機能)

6 腕の内側に本体の電極面をあて、上下になぞるように動かす(3分間)

- ・電極面を同じ部位にあて続けしないでください。プレテスト実施中は絶えず肌の上を滑らせるように動かし続けてください。
- ・お手持ちのタイマー等で、3分間計ってください。
- ・EMSの出力レベルは1で行ってください。

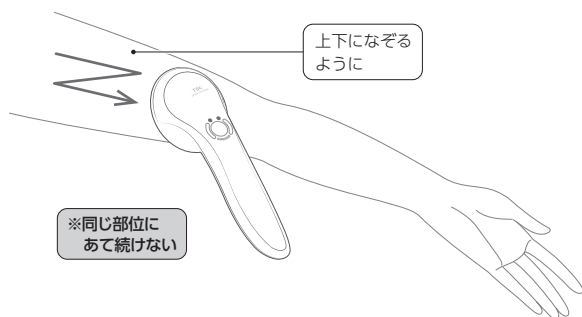

note

- プレテストは、利き手とは逆の腕の内側に化粧品を十分に塗って、利き手で本体を持ち、電極面をあてて実施してください。
- ひじ、ひじの内側にあてないように、十分に気をつけてください。



注意

- 肌へのプレテストの際は、EMSの出力レベルを上げない(レベル1で行う)
肌トラブルのおそれ
- 肌へのプレテスト中に肌に異常を感じたら、ただちに使用を中止して、化粧品を洗い流す
肌トラブルのおそれ

7 3分後、本体を肌から離す

8 電源/modeボタン(Ⓞ)を2秒以上押す

- ・「ピー」という音が鳴り、電源が切れます。
- ・LEDがすべて消灯します。
- ・電源/modeボタンを押さなかった場合、オートオフ機能の働きにより、使用開始から10分経過すると、自動的に電源が切れます。



注意

- 本体がぬれた状態で充電台に乗せない
感電、発火、ショートのおそれ

9 肌へのプレテストを実施した部位に異常が起きていないことを確認する

- ・プレテストから24時間以内に次の症状があらわれた場合は、本製品の使用を中止してください。

✓	項目
	赤みがある
	腫れている
	水疱がある
	痛みを感じる
	ひりつきを感じる
	かゆみがある

- ・1つでも当てはまる項目があれば、本製品を使用しないでください。ご自身で判断できない場合は、医師に相談してください。
- ・いずれの項目にも当てはまらない場合は、本製品をご使用できます。

5.2 モードを選択する



注意

- 本製品を使用する際は、必ず「使用する前に」(P. 12参照)に従って準備をする
- 初めて本製品を使う場合は、必ず「肌へのプレテスト」(P. 14参照)を実施する

1 肌を清潔な状態にする


- ・使用する部位を洗浄し、乾いたタオル等で水分をふきとってください。
- ・保湿クリームやUVクリーム等を使用している場合は、洗剤で洗い、十分に洗い流してください。

2 使用する部位に、化粧品を塗る

- ・油分を含まないジェル、化粧水等を使用してください。(P. 13参照)
- ・化粧品の代わりに、シャワーや浴槽のお湯も使用できます。ただし、温泉水や入浴剤入りのお湯は使用しないでください。
- ・使用中に滑りにくくなったり、美容器からの出力が感じにくくなったり、肌がピリピリしたりする場合は、化粧品を塗り足してください。

3 電源/modeボタンを1秒以上押す

- ・電源が入り、「ピー」という音が鳴ります。
- ・電源/modeボタンが青点灯します。

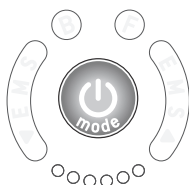


note

- 充電残量が少なくなると、電源/modeボタンの点灯と音でお知らせします。
- 充電残量が約1.5回分(15分)を下回ると、「ピッピッピッ」と音が鳴り、電源/modeボタンが赤点灯します。
- 充電残量が無くなる直前になると、「ピッピッピッピッピッ・・・」という音が約10秒間鳴り、最後に「ピー」という長い音が鳴ります。
- 充電残量が無くなると、自動的に電源が切れます。


4 電源/modeボタンを短く押して、モードを選択する

- ・押すごとに「ピッ」という音が鳴り、モードが変わります。

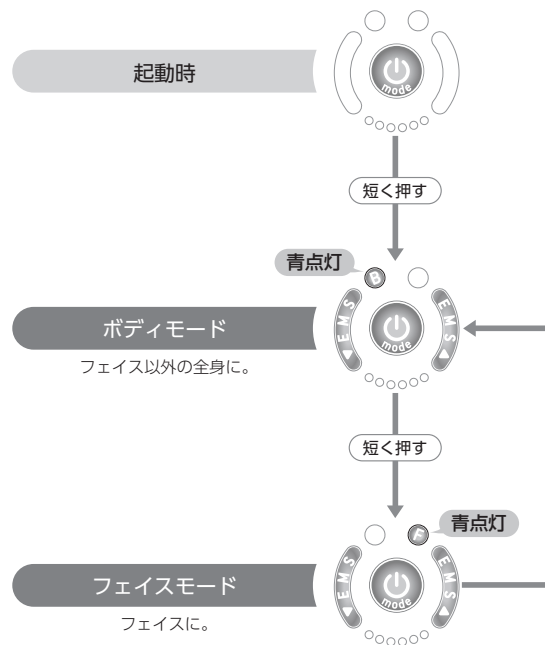

5 EMSレベルアップボタンを押して、モードを確定する

- ・「ピッ」という音が鳴り、選択したモードが確定します。
- ・EMSの出力レベルが1の状態では、本体の出力が開始されません。
- ・確定後はモードを変更できません。

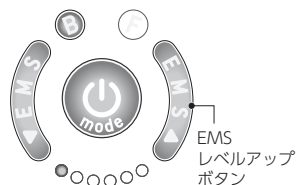

note


- モードを選択し直したい場合は、電源/modeボタンを2秒以上押し、電源を切り、再度、電源を入れてください。
- モードを選択した後、2分以内にEMSレベルアップボタンを押さなかった場合(モードを確定しなかった場合)、自動的に電源が切れます。(オートオフ機能)

■EMSの出力レベルの調節

EMSの出力レベルの初期値は1です。
使用中、いつでも、出力レベルを調節できます。(1~6)
※出力レベルを1から下げると、出力がオフになります。


出力レベルを上げる

- ・EMSレベルアップボタンを短く押すたびに、「ピッ」という音が鳴り、EMSの出力レベルが上がります。(最大6)

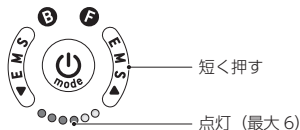

出力レベルを下げる

- ・EMSレベルダウンボタンを短く押すたびに、「ピッ」という音が鳴り、EMSの出力レベルが下がります。

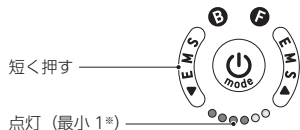

※出力をオフ(出力レベル0)にすると、EMSレベル表示ランプがすべて消灯します。

注意

- EMSの出力レベルを上げた場合に、肌に異常を感じたら、ただちにEMSの出力レベルを下げる
肌トラブルのおそれ
- 電極面を同じ部位にあて続けけない
肌トラブルのおそれ

note

- EMSの出力レベルは体感に合わせて調節してください。
- 出力レベルを手動で調節できるのは、EMSのみです。キャビテーション、RF、LEDの出力レベルは手動で調節できません。

■電源の切りかた

- ・電源/modeボタンを2秒以上押し、電源が切れます。
- ・LEDがすべて消灯します。

注意

- 本体がぬれた状態で充電台に乗せない
感電、発火、ショートのおそれ

■オートオフ機能について

- ・安全のため、使用中に一定時間が経過すると、自動的に電源が切れます。(ボディモードでは10分、フェイスモードでは5分)
- ・電源を入れた後、2分間操作しなかった場合には、自動的に電源が切れます。
- ・モードを選択した後、2分以内にEMSレベルアップボタンを押さなかった場合(モードを確定しなかった場合)、自動的に電源が切れます。

note


- 使用開始から5分経過すると、「ピッ」という音が鳴ります。ご使用時間の目安にしてください。

5.3 ボディに使用する

二の腕 | 左右5分ずつ




ボディモード

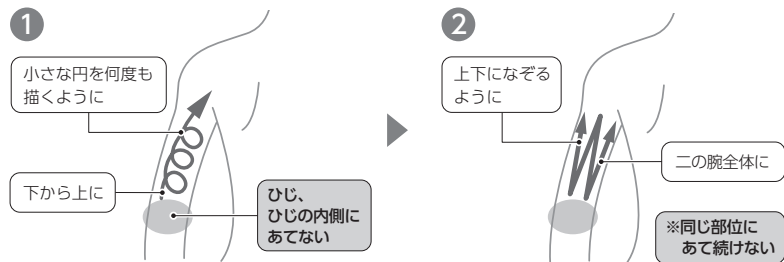

ヒップ | 左右5分ずつ



ボディモード

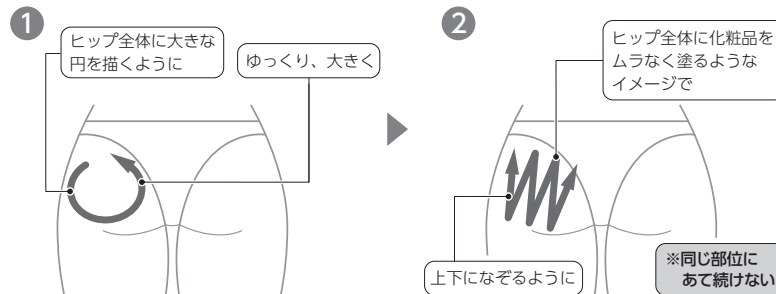

お腹(ウエスト) | 全体で10分




ボディモード



太もも(前) | 左右5分ずつ




ボディモード

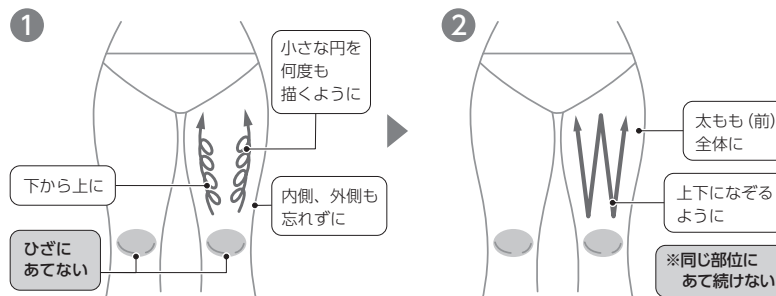

太もも(後ろ) | 左右5分ずつ




ボディモード

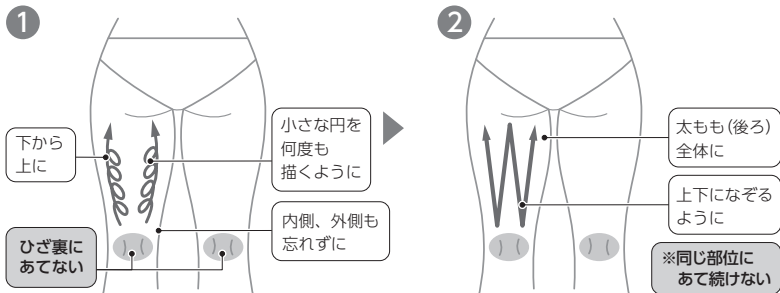

ふくらはぎ | 左右5分ずつ



ボディモード

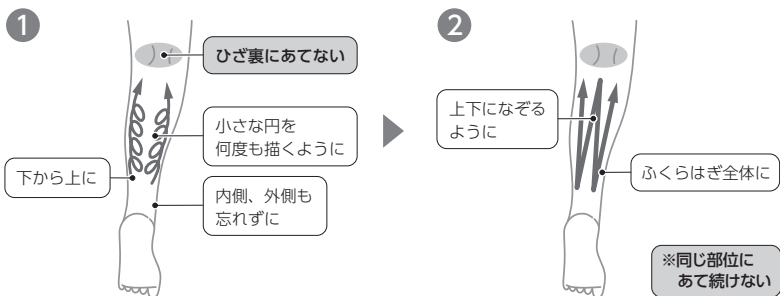


5.4 フェイスに使用する

フェイス | 全体で5分



フェイスモード

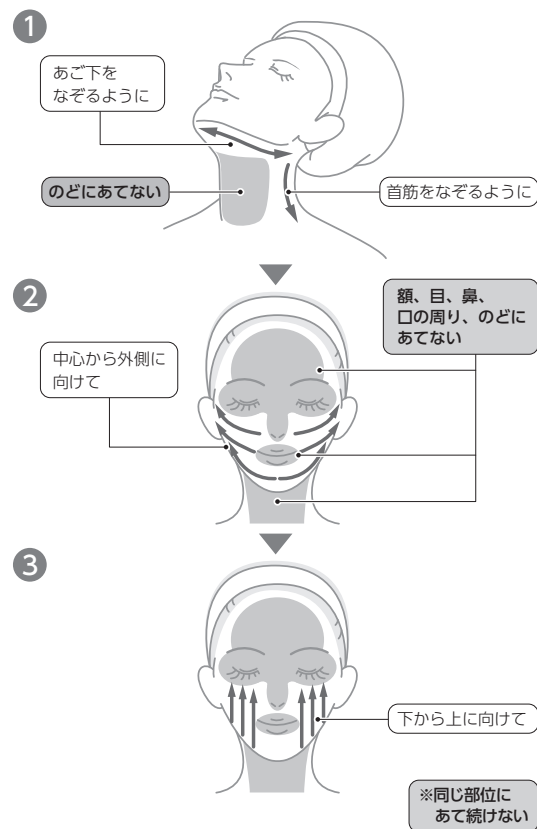

6 使用の後に

■本体のお手入れ



注意

- 必ず電源を切った状態で、本体をお手入れする故障のおそれ
- 本体がぬれた状態で充電台に乗せない感電、発火、ショートのおそれ


本体電極面は、使用後に毎回必ずお手入れをしてください。

1 表面についた化粧品や水分等をふきとる

- ・柔らかい布でからぶきしてください。
- ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませたスポンジや布で汚れをふきとってください。その後、表面の水分等をふきとってください。
- ・アルカリ性洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液等は使用しないでください。

2 電極面、特に端子部についた化粧品や水分等をふきとる

- ・表面と同様にお手入れしてください。

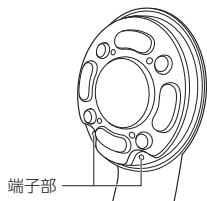

3 風通しの良い場所で乾かす

- ・直射日光にあてないでください。
- ・本体がぬれた状態のまま、充電しないでください。

■充電台のお手入れ



注意


- 必ずACアダプターを外した状態で、充電台をお手入れする故障のおそれ

1 水で湿らせて固くしぼった布で、表面の汚れをふきとる

- ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませたスポンジや布で汚れをふきとってください。その後、表面の水分等をふきとってください。
- ・アルカリ性洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液等は使用しないでください。

2 端子部についた汚れをふきとる

- ・綿棒等で端子部の汚れをやさしくふきとってください。
- ・汚れがひどい場合は、綿棒等を市販の無水エタノールで湿らせてふきとってください。

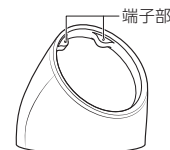

■保管時の注意

- ・使用後は、充電台からACアダプターを外し、本体を充電台に乗せて保管してください。
- ・長期間使用しない場合は、本体・充電台のお手入れをしてから保管してください。
- ・12歳未満の子どもの手の届かない所で保管してください。
- ・ストーブやヒーターのそば、浴室等高温多湿の場所、車の中、直射日光のあたる場所、高い場所、不安定な場所等を避けて保管してください。

■保守と点検のしかた

- ・本製品を長期間使用しなかった場合は、必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから、使用してください。
- ・本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に、「困ったときは」(P. 27参照)をよく読んで、状態を確認してください。それでも解決しない場合は、保証書と購入明細をご用意の上、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ・本製品が故障、損傷した場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

■リチウムイオン電池について

- ・本製品はリチウムイオン電池を使用しています。
- ・リチウムイオン電池は消耗品です(保証対象外)。
- ・充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます。(充電回数は約300回が目安です)
- ・本製品は、リチウムイオン電池を含む製品に関する自治体の分別ルールに従って廃棄、またはリサイクルしてください。



Li-ion

7 こんなときは

7.1 困ったときは

本製品を使用中、次のような状態でお困りの場合は、考えられる原因をご確認の上、処置方法に従って対処してください。

状態	考えられる原因	処置方法
充電できない	ACアダプターの電源プラグ部分がコンセントに差し込まれていない。	ACアダプターの電源プラグ部分をコンセントにしっかり差し込んでください。(P. 12参照)
	充電台にACアダプターのアダプタープラグ部分が差し込まれていない。	ACアダプターのアダプタープラグ部分をしっかり差し込んでください。(P. 12参照)
	充電電池(リチウムイオン電池)が消耗している。	充電電池(リチウムイオン電池)の寿命です。(P. 26参照)
充電しても、使用時間が極端に短い	充電電池(リチウムイオン電池)が消耗している。	充電電池(リチウムイオン電池)の寿命です。(P. 26参照)
EMSの電気刺激が感じられない(弱く感じる)	肌の表面に水分が足りない、または、乾燥している。	化粧品を塗り足して、十分に湿らせてください。(P. 17参照)
	EMSの出力レベルが低い。	EMSレベルアップボタンを押して、EMSの出力レベルを上げてください。(P. 19参照)
	電極面が肌に密着していない。	電極面を肌にぴったりとあててください。
	体感には個人差があります。	
EMSの電気刺激が痛い(強く感じる)	電極面が肌に密着していない。	電極面を肌にぴったりとあててください。
	EMSの出力レベルが高い。	EMSレベルダウンボタンを押して、EMSの出力レベルを下げてください。(P. 19参照)

状態	考えられる原因	処置方法
使用中、肌がピリピリする	肌の表面に水分が足りない、または、乾燥している。	化粧品を塗り足して、十分に湿らせてください。(P. 17参照) 症状がひどいときは、ただちに使用を中止してください。
使用中、肌が赤くなる	同じ部位にあて続けた。	電極面を同じ部位にあて続けしないでください。必ず肌の上を滑らせるように動かしてください。赤みがひどいときは、ただちに使用を中止してください。
使用中、肌が熱くなりすぎる	同じ部位にあて続けた。	電極面を同じ部位にあて続けしないでください。必ず肌の上を滑らせるように動かしてください。熱くなりすぎるときは、ただちに使用を中止してください。
使用中に電源が切れた	オートオフ機能が働いた。	安全のため、一定時間が経過すると、電源が自動的に切れます。(P. 20参照) 電源/modeボタンを1秒以上押し、電源を入れ直してください。
	異常温度防止機能が働いた。	安全のため、使用中に本体が一定の温度に達すると、電源が自動的に切れます。しばらく時間をおいてから、電源/modeボタンを1秒以上押し、電源を入れ直してください。
	充電が切れた。	充電してください。(P. 12参照)

7.2 よくあるご質問

Q	A
使用できない部位はありますか？	あります。使用できる部位 (P. 10参照) を確認してください。
敏感肌なのですが、使用できますか？	肌へのプレテスト (P. 14参照) を実施してください。肌に異常がなければ使用できます。肌に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。ご自身で判断できない場合は、医師に相談してください。
お風呂で使用できますか？	本体は防水仕様ですので、使用できます。ただし、水やお湯の中に30分以上沈めて放置しないでください。温泉水や入浴剤入りのお湯では使用できません。また、充電台は浴室に持ち込まないでください。
どんな化粧品を使用すればいいですか？	お手持ちの化粧水や美容液、ジェルを使用できます。(P. 13参照) ただし、肌トラブルや故障の原因になりますので、次の化粧品は 使用しないでください 。 <ul style="list-style-type: none"> ●油分を含むジェル・化粧水 ●オイル ●クリーム ●塩分やミネラル分を含む化粧水 ●刺激の強い化粧水 ●スクラブ剤入り化粧品 ●洗顔料 ●クレンジング ●ボディソープ ●石けん類 ●シートマスク ●メイク化粧品
化粧品はどのくらい使用すればいいですか？	肌の表面が十分に湿った状態になる量を使用してください。肌が乾いた状態では、EMS、RFが肌に伝わりにくくなります。また、電極面が滑りにくくなります。使用中に、効果が感じられなくなったり、滑りにくくなったりした場合は、化粧品を塗り足してください。
何歳から使用できますか？	保護者の同意・監督のもと、12歳から使用できます。
毎日使用できますか？	1部位につき週2~3回を目安に使用してください。毎日使用される場合は、使用部位の肌を注意深く確認し、異常を感じたら、ただちに使用を中止してください。
海外で使用できますか？	使用できません。

■記録表 (ご使用メモとしてお使いください)

No.	日付	モード	レベル	No.	日付	モード	レベル
1				1			
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
10				10			
11				11			
12				12			

8 製品仕様

■本体仕様

電源	充電式リチウムイオン電池 7.4 V (フル充電時使用回数：最大出力時 約5~6回 (50~60分) 充電時間：3時間)
定格電源電圧	本体：DC 7.4 V 0.8 A ACアダプター：DC 12 V 0.5 A
消費電力	最大出力時 約 6 W
製品サイズ	本 体：約 W76×D70×H210 (mm) 充電台：約 W100×D98×H91 (mm)
製品質量	本 体：約 275 g 充電台：約 109 g
動作条件	温度：10℃~43℃ 湿度：30%RH~100%RH
保管条件	温度：-10℃~50℃ 湿度：10%RH~90%RH
材質	ABS、ステンレス、シリコン
防水	IPX7

※本製品の性能等を改善するための設計、仕様、付属品は、予告なく変更される場合があります。

■機能

(1) オートオフ機能

- ・安全のため、使用中に一定時間が経過すると、自動的に電源が切れます。
(ボディモードでは10分、フェイスモードでは5分)
- ・電源を入れた後、2分間操作しなかった場合には、自動的に電源が切れます。
- ・モードを選択した後、2分以内にEMSレベルアップボタンを押さなかった場合(モードを確定しなかった場合)、自動的に電源が切れます。

(2) 異常温度防止機能

- ・安全のため、使用中に本体が一定の温度に達すると、自動的に電源が切れます。
(ボディモードでは43±2℃、フェイスモードでは40±2℃)

(3) 充電残量のお知らせ機能

- ・充電残量が少なくなると、電源/modeボタンの点灯と音でお知らせします。
- ・充電残量が約1.5回分(15分)を下回ると、「ピッピッピッ」と音が鳴り、電源/modeボタンが赤点灯します。
- ・充電残量がなくなる直前になると、「ピッピッピッピッ・・・」という音が約10秒間鳴り、最後に「ピー」という長い音が鳴ります。
- ・充電残量がなくなると、自動的に電源が切れます。


●本製品は、日本国内用に設計・販売しております。

電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理やアフターサービスは対象外です。

●本製品は、屋内専用です。

●取扱説明書の内容について

本書は製品開発にさきがけて印刷しています。性能や操作性向上のため、製品仕様の一部が変更となることがあります。その場合は、製品自体の仕様優先されます。

愛情点検 ●長年ご利用の製品の点検を！	
	<p>こんな症状はありませんか？</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電源を入れ操作しても作動しない。 ●本体が異常に熱い、焦げ臭い。 ●異常な音がある。 ●ACアダプターのコードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ●その他の異常がある。
<p>ご使用中止 !!</p> <p>故障、事故防止のため電源を切り、コンセントからACアダプターを抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。</p>	

9 保証とアフターサービス

1. 本製品には、本書の裏表紙に保証書がついています

お買い上げの販売店で所定事項の記入をご確認いただき、保証内容をよくお読みになって大切に保管してください。所定事項の記入がないと保証は有効となりません。その場合は、お買い上げの販売店へ記入をお申し付けください。

2. 保証期間中に修理を依頼されるときは

本取扱説明書をよくお読みいただき、本製品に異常がある場合は、お買い上げの販売店に保証書をご提示の上、修理を依頼してください。保証書の規定に基づき、無償、または有償で修理させていただきます。

3. 保証期間後に修理を依頼されるときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により本製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有償で修理させていただきます。

4. 補修用性能部品について

発売元では、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造終了後、最低6年間保有しております。

5. 本製品使用中、万一不具合により使用できなかったときは

そのことによる損失の補償、または使えなかったことによる付随的損害の補償については、その責任を負いかねますのでご容赦ください。

●個人情報のお取り扱いについて

本製品の修理等に際してお預かりするお客様のお名前、ご住所、お電話番号等の個人情報は適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託の場合、および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客様がお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただく場合があります。

〈利用目的〉

商品・サービスに関わるご相談、お問い合わせ、および修理の対応にのみ利用させていただきます。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する際、委託先に対しては発売元と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切に管理・監督いたします。

■お問い合わせ先

発売元

エステティックTBC

〒163-0655

東京都新宿区西新宿1-25-1

お客様相談室 ☎ 0120-801-272

保証規定

本書は、お買い上げ日より保証期間内において、正常な使用状態で故障が発生した場合、本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記をご覧ください。

- 保証期間中、取扱説明書等の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げの販売店に修理をご依頼の上、本書をご提示ください。お買い上げの販売店が無償修理いたします。
- 保証期間中、無償修理等のアフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または発売元へお問い合わせください。
- 次のような場合には、保証期間中でも有償修理になります。
 - 本書のご提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記載がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - ご使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷。
 - 火災、地震、風水害、雷、その他天災地変、塩害、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - 本製品以外の他の機器によって生じた故障および損傷。
 - 一般家庭以外（業務用として長時間使用する等）に使用された場合の故障および損傷。
- 本製品は持込修理の対象商品です。保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様のご負担となります。
- この保証書は、本書に明示した期間の条件のもとにおいて、無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。