

## 保証書

持込修理

品名	家庭用光美容器		型番	HA-LB01
形名	光Beauty			
無料修理保証	対象部分	期間		
	製品 (ただし、消耗品及び付属品は除く)	お買い上げ日から 1年間		
※ お買い上げ日	年月日			
※ お客様	ご住所	〒		
	お名前			
	様			
※ 販売店	住所・販売店名・電話			
	ご購入日のわかる明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。			

## ●販売店様へのお願い

必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

## ●お客様へのお願い

- 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名が記載されているかお確かめください。  
万一記入がない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。
- ご贈答等で、本書記載のお買い上げの販売店に修理がご依頼になれない場合は、当社へ直接ご連絡ください。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて詳しくは、お買い上げの販売店、又は当社に直接お問い合わせください。

発売元

エステティックTBC

〒163-0655

東京都新宿区西新宿1-25-1


お客さま相談室 ☎ 0120-80-1272

HA-LB01

保管用  
保証書付

## 取扱説明書

家庭用光美容器

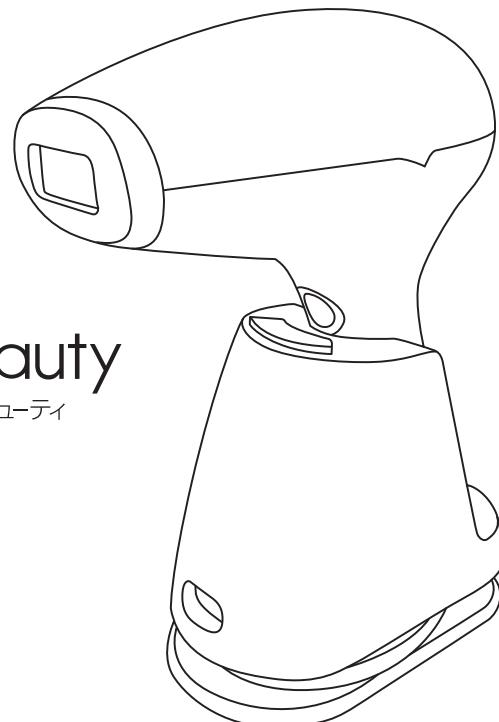光Beauty  
ヒカリビューティ

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

# もくじ

安全上のご注意	2
製品について	
製品と付属品	7
各部の名称と働き	8
ご使用前の確認	
ご使用できる部位	9
ご使用のタイミング	10
ご使用前の確認【ステップ1・2・3・4・5】	11
ご使用方法	
セッティング	13
ご使用手順	15
ご使用後の注意点	18
製品のお手入れ	
ランプカートリッジの交換	19
エラー表示	20
こんなときは	
困ったときは	21
よくあるご質問	22
スキンケア用ランプカートリッジのご使用方法(別売・オプション品)	
ご使用のタイミング	23
スキンケア用ランプカートリッジの取り付け	23
ご使用手順	24
スキンケア用ランプカートリッジの交換	26
製品仕様	
記録表	28
保証とアフターサービスについて	29
保証規定	30
保証書	31

# 安全上のご注意

- ・ご使用になる前に、必ずこの「安全上のご注意」および取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・定められた手順に従って、適切なご使用をお願いします。
- ・異常が発生した場合は、ただちに使用を中止してください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- ・注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

## ●注意区分について



### 危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容です。



### 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



### 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害<sup>\*</sup>の発生が想定される内容です。

\*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

## ●図記号について(次は図記号の例です)



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。



### 危険

次に該当する方は使用しないでください。

医療用電子機器の誤作動を招く原因となります。

#### ●医療用電子機器を使用している方

- ・ペースメーカーなど体内植込型医療用電子機器
- ・人工心肺など生命維持用医療用電子機器
- ・心電計などの装着型医療用電子機器



## 警告

次のような方は使用しないでください。事故やトラブルの原因となります。

- 医師の治療を受けている方 ●発熱している方 ●酒気帯びの方
- 眠気をさそう薬を服用中の方 ●顔面神経痛の方 ●アレルギー体質
- 生理中、妊娠中、授乳中の方 ●成長過程の方(12歳以下の子供)
- 敏感肌または肌の弱い方 ●疲労が激しい方 ●体調がすぐれない方
- ステロイド等の薬を持続的に使用されている方 ●皮膚トラブルがある方
- 白斑・尋常性白斑のある方 ●アトピー性皮膚炎 ●皮膚がん病歴のある方
- 皮膚病 ●悪性腫瘍 ●内臓疾患 ●伝染病疾患 ●結核性疾患 ●高血圧
- 4週間以内に強い太陽の光を受けたり、日焼けをされた方 ●血液疾患
- 3ヶ月以内に放射線治療や化学療法を受けたことがある方 ●急性疾患
- 光過敏性てんかん等の光過敏症の光に関する疾患をお持ちの方
- 光過敏症反応を起こす要素がある薬や湿布薬、ローションなどを1ヶ月以内に使用された方

指定の部位以外や次のような部位には使用しないでください。

事故やトラブルの原因となります。

- 静脈瘤のある部位 ●皮膚の色が濃い方 ●刺青(タトゥー)のある部分
- 色素が濃く沈着された部位(肝斑を含む) ●眼球、まぶたなど目の周辺
- 日焼けした肌、又は色素が白く抜けている部分 ●乳首や乳輪、へそなど
- 唇、口腔内や性器及び周辺の粘膜など ●ホクロ、シミ、あざのある部位
- 外科手術をした部分(美容整形も含む) ●傷、ケロイドのある部位
- かゆみやほてりのある部位 ●体内に金属等を埋め込んでいる部位
- 皮膚が化膿して炎症を起こしている部位 ●指定以外の部位

ご自身で判断できない場合は、使用前に医師にご相談ください。



禁止



禁止

- 頭部には絶対に使用しない。

ケガの原因となります。

- 自分で意思表示できない人には使わせない。

事故やケガの原因となります。

- 過剰な連続使用はしない。(業務としての使用など)

ケガ、やけどなどの原因となります。

※業務用として使用された場合は修理をお受けできません。



## 警告

- アルコール、シンナー、ベンジン、除光液など引火性のあるものの近くで使用しない。

火災、感電、ケガの原因になります。

- 本製品を改造、分解、修理をしない。

発火や感電、異常動作によるケガの原因になります。

- 電源コードを無理に曲げたり、重い物をのせたりしない。

感電、発火、ショート、断線の原因となります。

- 電源コードのコード部分を引っ張ったり、ぬれた手で電源プラグを触ったりしない。

感電、発火、ショート、断線の原因となります。

- 電源プラグをコンセントから抜いたり差し込んだりする際は、必ずプラグ部分を持って行う。(電源プラグの金属部に触れないようにする)。

感電、発火、ショートの原因となります。

- 電源プラグの部分にほこりや水がついている場合は、乾いたタオルで拭く。

感電、発火、ショートの原因となります。

- 電源プラグをコンセントから抜いたり差し込んだりする際は、必ず本体の電源スイッチを切った状態で行う。

火災、感電、発火、故障の原因となります。

- 使用時以外は本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。

火災、発火の原因となります。

- 必ず交流100V(日本国内専用)で使用する。また、単独のコンセントで使用する。

火災、感電、発火、故障の原因となります。

- コード、プラグ及び本製品の損傷、水ぬれにより本製品が正常に作動しない場合は、必ず点検と修理を受ける。

発火、感電、ケガの原因となります。

- ストーブや電熱器具の近くで本製品を使用しない。

発熱、発火、故障の原因となります。



## 警 告



必ず守る

- 本製品を浴室などの高温多湿の場所で使用したり、保管したり、水のかかりやすい場所におかない。  
感電、火災の原因となります。
- 本製品を高いところで使用したり、保管したりしない。  
落下により、故障の原因となります。
- 子供の手の届く場所に保管したり、使用させたりしない。  
事故やケガの原因となります。
- 本製品を水洗いしない。汚れた場合は洗剤を使わずに乾いたきれいな布で拭いた後、保管する。  
感電、火災、ショートの原因となります。
- 異臭、異常発熱したときは使用しない。  
破損、発火の原因となります。電源を切り、必ず点検・修理を受けて下さい。
- ハンドピースの電源を入れても、内部ファンが作動しない(作動音がしない)場合は使用しない。  
発煙、発火、ケガ、故障の原因となります。
- 本製品をご使用の際は、必ず付属のゴーグルを装着する。  
事故やケガの原因となります。



禁 止



## 注 意



禁 止

- 使用前にランプカートリッジの照射口を確認し、変形、変色、破損などが確認された場合は使用しない。  
やけどなどの肌トラブルの原因となります。

- 本製品をアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などの溶剤で拭かない。  
本製品の表面に損傷を与える原因となります。
- ランプカートリッジの照射口を磁気のあるものに近づけない。  
故障、破損の原因となります。
- ランプカートリッジのレンズ部分を直接触らない。  
故障の原因となります。
- 屋外、直射日光の下で使用しない。  
故障、動作不良の原因となります。




必ず守る

- ご使用の前に必ずテスト照射を行い、照射した部位の肌状態を確認する。照射した部位に異常な熱感を感じたら使用しない。  
クーリングパックで十分に冷却してください。  
十分な冷却をしないと、やけどや肌トラブルの原因となります。
- 照射中、強い熱感を感じたら、ハンドピースを肌から離して使用を中止し、クーリングパックで十分に冷却してください。ハンドピースをスタンドに収納し、主電源を切らずに照射口(レンズ部分)が冷めるまで時間をおいてください。  
そのまま使用すると、やけどや肌トラブルの原因となります。
- 照射の際は、必ず肌に当てた状態で照射する。  
やけどや肌トラブルの原因や眼に障害が起きる場合があります。
- 照射前と照射後は必ずクーリングパックで冷却する。  
やけどや肌トラブルの原因となります。
- 照射する部位は、必ず前日に剃毛する。  
毛が長いと、やけどや肌トラブルの原因となります。
- 照射する部位は清潔に洗浄し、制汗剤やローション、オイルなどは塗らない。  
やけどや肌トラブルの原因となります。

# 製品について


## 製品と付属品

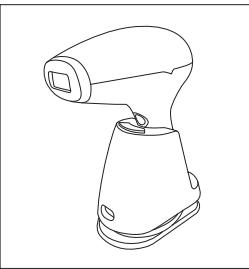


製品




取扱説明書  
(保証書付)

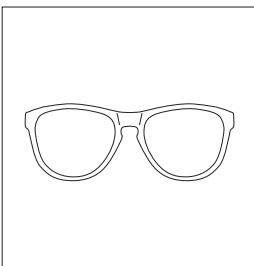


ゴーグル

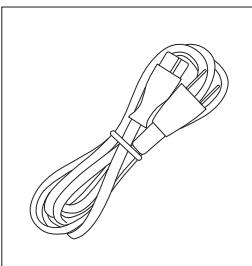


電源コード

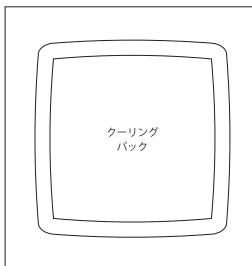


クリーニングパック

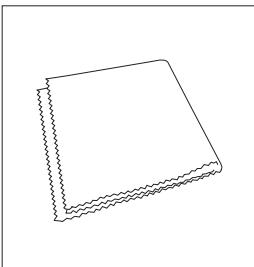

お掃除クロス  
(ランプカートリッジレンズ用)

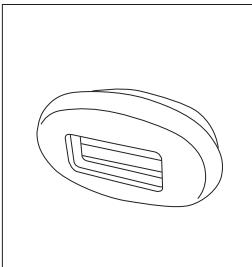

ランプカートリッジ  
(エピ用)

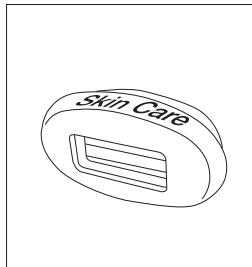

ランプカートリッジ  
(スキンケア用)  
[別売・オプション品]

## 各部の名称と働き

### ① メイン電源スイッチ

本製品のメイン電源スイッチです。スイッチを押すと電源がオン、再度押すとオフの状態になります。

### ② スタンド

### ③ 電源コード差し込み口

電源コードを差し込むところです。

### ④ ハンドピース

### ⑤ ハンドピースケーブル

ハンドピースケーブルが巻かれています。ご使用の際は、ケーブルを解いて使用し、ご使用が終わったら、本体に刻まれている矢印の方向にケーブルを巻いて収納します。

### ⑥ 照射ボタン

光を照射するときに押すボタンです。

### ⑦ 照射レベルアップボタン

照射レベルをアップするときとランプカートリッジの寿命を確認するときに押すボタンです。

＜照射レベルの設定をする場合＞ボタンを軽く押すと、照射レベルがアップします。

＜ランプカートリッジの寿命を確認する場合＞ハンドピースに電源が入っている状態でボタンを長押し(約3秒)すると、ランプ寿命を表示します。



### ⑧ 電源／照射レベルダウンボタン

ハンドピースの電源をオン／オフするときと照射レベルをダウンするときに押すボタンです。

＜電源のオン／オフをする場合＞ボタンを長押し(約3秒)すると、ハンドピースの電源をオン／オフすることができます

＜照射レベルの設定をする場合＞ボタンを軽く押すと、照射レベルがダウンします。

### ⑨ 照射口(面)

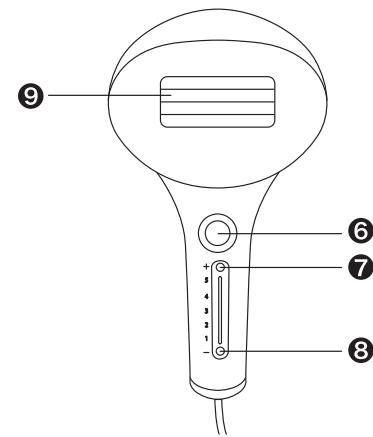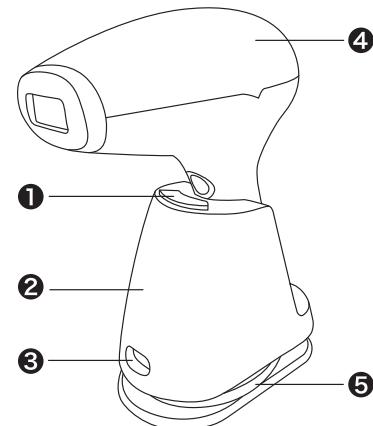

# ご使用前の確認

## ご使用できる部位

顔  
(鼻より下)

ワキ

お腹

ビキニ  
ライン

胸

腕

太もも

ひざ下



※写真はイメージです。ご使用の際はゴーグルを装着してください。



注意

以下の部位に照射する際は、下記の注意事項をお守りください。


- 顔: 鼻より下のみ照射可能です。(スキンケア用は除く)  
それ以外の部位には照射しないでください。絶対に唇、口腔内、目の周りや直接目(眼球)に照射しないでください。
- 胸: 乳首、乳輪には照射しないでください。
- その他: へそ、性器および周辺の粘膜などに照射しないでください。

## ご使用のタイミング

毛は一定の期間成長し続けると退行期に入り、自然に抜け落ちます。そして、数週間から数ヶ月休んだ後、再び生え始めます。これを毛周期といい、毛が成長している期間を成長期、休んでいる期間を休止期といいます。成長期の毛に対して行うのが効果的です。

### 毛周期(ヘアサイクル)

このタイミングで脱毛!

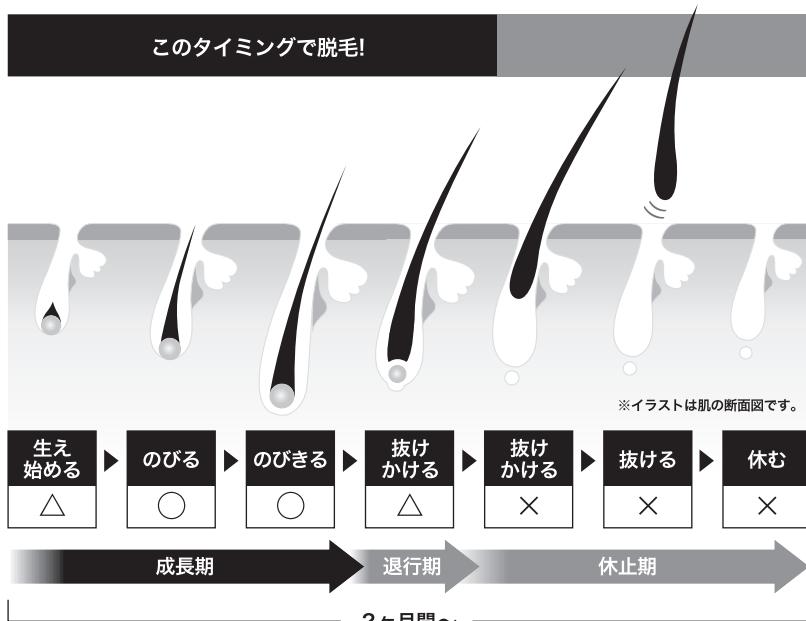

### <ご使用の目安>

	最初の2ヶ月	3ヶ月目以降
顔(鼻より下)	2週間に1回	4週間に1回
胸・お腹・腕・太もも ひざ下等	2週間に1回	4週間に1回
ワキ・ビキニライン	1週間に1回	2週間に1回

※最低でも1週間以上あけてご使用ください。

※2ヶ月以上継続してケアすることをおすすめします。ケアを続けることでムダ毛は目立たなくなりますが、永久脱毛とは異なり、お手入れを中止するとムダ毛の量は徐々に戻ります。

# ご使用前の確認【STEP 1・2・3・4・5】

## STEP 1

### スキンタイプの分類と確認

皮膚が紫外線を受けたときの反応は、「フィッツパトリック(Fitzpatrick)のスキンタイプ」と呼ばれる方法によって、以下の6つに分類されます。最初にフィッツパトリックのスキンタイプにもとづいて自分の肌の色を確認し、照射レベルを設定してからご使用ください。

#### ●スキンタイプの分類

スキンタイプ	日光を浴びた際の皮膚反応
1	常に赤くなり、皮膚色が濃くならない。
2	常に赤くなり、その後少し皮膚色が濃くなる。
3	赤くなり、皮膚色が濃くなる。
4	あまり赤くならず、すぐに皮膚色が濃くなる。
5	めったに赤くならず、皮膚色が非常に濃く黒くなる。
6	赤くならず、皮膚色が非常に濃く黒くなる。

#### ●スキンタイプの確認と照射レベルの設定の目安

スキンタイプ	1	2	3	4	5	6
肌の色						
照射レベル	1~5	1~4	1~3	1~3	1~2	使用不可


※ご使用される際は、レベル1から始めてください。

照射レベルを上げた時、熱く感じたらレベルを下げて行ってください。

## STEP 2

### 剃毛

本製品では、毛の部分に光の照射エネルギーが作用するので、余分な体毛をシェーバー、カミソリ等(一般市販品)で軽く剃毛します。ワックスやピンセット等で体毛を完全に抜かないでください。本製品を使用する前日に毛を剃ってください。

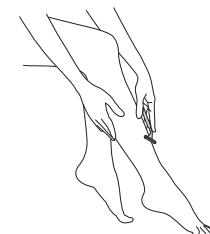

## STEP 3

### 皮膚の洗浄

使用する部位を清潔に洗浄し、タオルなどで水分を拭き取ります。  
※制汗剤、ローション、オイルなど油性のものは塗らないください。

## STEP 4

### ランプカートリッジの確認とお手入れ

ランプカートリッジのレンズ部分にホコリや毛などの汚れが付いていないか確認してください。レンズ部分が汚れている場合は、主電源を切り、付属のお掃除クロスで拭き取ってからご使用ください。お掃除クロスで汚れが落ちない場合は、綿棒を湿らせて汚れを拭き取ってください。連続して行う場合、途中でレンズの汚れを確認し、お手入れを行なってからご使用ください。



注意

●ランプカートリッジをアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などの溶剤で拭かないでください。

ランプカートリッジの表面やレンズ部分に損傷を与える原因となります。

●ランプカートリッジのレンズ部分を直接触らないでください。

熱くなっている場合もあり、やけどの原因になります。

## STEP 5

### テスト照射

照射前に、肌の状態や体調に問題が無いか確認してください。


初めてご使用の際(または照射レベルを上げるとき)には、腕や手の甲にテスト照射を行い、赤味、腫れ、水疱、痛み、ひりつき等の反応症状が照射部位やその周辺に生じていないか確認してください。照射レベル「1」で照射し、問題が無ければ照射可能です。

# ご使用方法


## セッティング

1 下記イラストの順番でハンドピースケーブルをスタンドから取り出してください。


- ①指でスタンドに巻いてあるハンドピースケーブルを取り出してください。

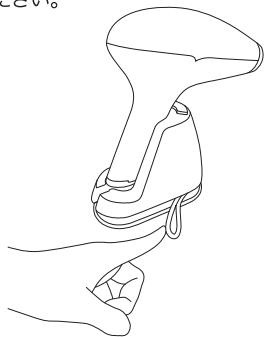

- ②ハンドピースケーブルをイラストの矢印方向で取り出します。

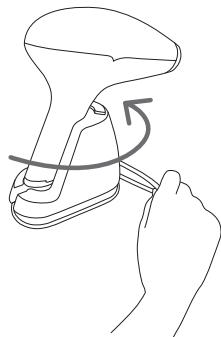


- ③ハンドピースケーブルを完全に取り出し、スタンドから分離した後、再度ハンドピースをスタンドに収納してください。

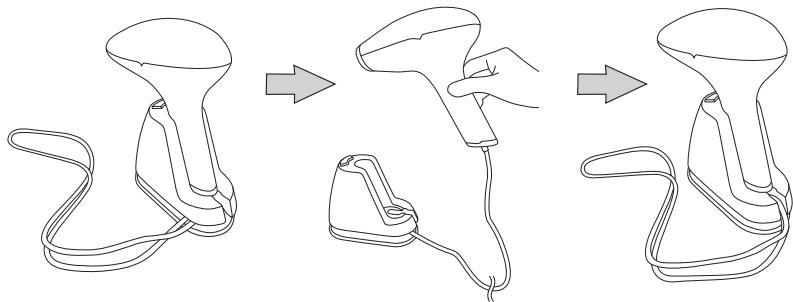

- ハンドピースケーブルをスタンドから取り出す際は、ケーブルを無理に引っ張らないでください。  
断線、故障の原因となります。

2 電源コードをスタンドの電源コード差し込み口に差し込みます。電源プラグはコンセントに差し込みます。

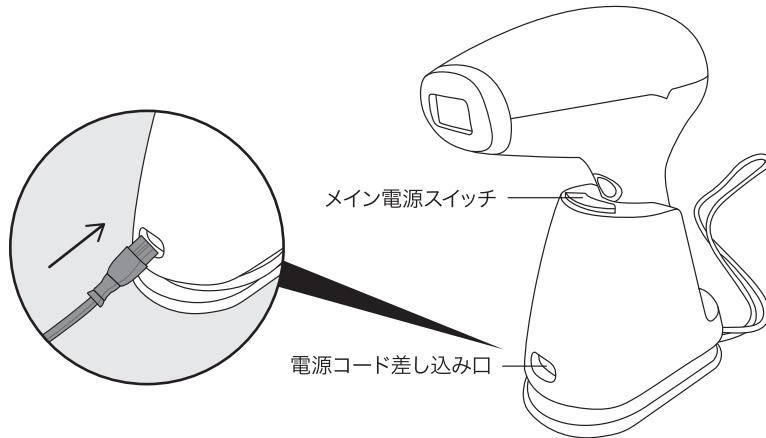

注意

- 電源コードを差し込む際は、しっかり奥まで差し込んでください。  
故障や動作不良の原因となります。

# ご使用手順

1 付属のゴーグルを必ず装着してください。

2 スタンドのメイン電源スイッチを押して、主電源を入れてください。

主電源が入ると“ピッ”というブザー音になります。

3 ハンドピースの照射レベルダウンボタンを長押し(約3秒)して、ハンドピースの電源を入れてください。

ハンドピースの電源が入ると、“ピッピッピッピッ”というブザー音がなり、ハンドピースに内蔵されたファンが作動します。

4 照射レベルアップダウンボタンを押して、照射レベルを設定してください。

設定出来る照射レベルは、1から5です。照射レベルの設定は、ご使用される方のスキンタイプ(11ページ)に合う照射レベルに設定します。

※ご使用される際は、レベル1から始めてください。照射レベルを上げた時、熱く感じたらレベルを下げて行ってください。

5 付属のクーリングパックで照射する部位を冷却します。

ご使用前は必ずガーゼ又は薄でのタオル等で巻いてからお使いください。

※冷凍庫から出して、すぐに肌にあてる、肌について取れなくなる恐れがあります。



<クーリングパックのご使用方法>

付属のクーリングパックを冷凍庫に入れて十分に冷やします。

照射の直前、照射する部位をクーリングパックで冷やします。

照射の後、照射した部位をもう1回クーリングパックで冷やします。

※肌を冷却しすぎると凍傷になる場合がありますのでご注意ください。

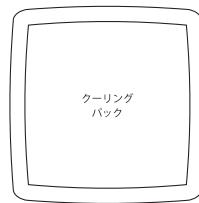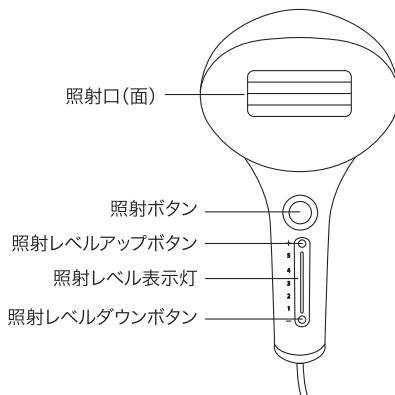

クーリングパック

6 照射する部位にハンドピースを密着させます。

ハンドピースが確実に密着すると、“ピッピッピッ”とブザー音がなり待機状態になります。  
※照射待機時は、ハンドピースを肌に密着させてください。肌に密着していないとブザー音はしません。  
※ハンドピースの照射口を、肌に強く押し当てないでください。



7 ハンドピースの照射ボタンを押して、照射してください。

照射の際、完全に照射が終わるまで(約1秒)ハンドピースを肌から離さないでください。

照射ボタンを1回押すと1回照射します。

※照射の際は、直接光を見ないようにしてください。


8 照射が終了したらハンドピースを20cm以上肌から離し、照射待機し、充電が完了したら次に照射する部位に密着させ、照射してください。

充電完了の合図は、“ピッピッ…ピー”となった時点です。

※照射レベルにより、充電時間は異なります。

※照射するときは隙間なく照射し、重ねて照射しないでください。

※照射の際は、9ページ「ご使用できる部位」を参照してください。

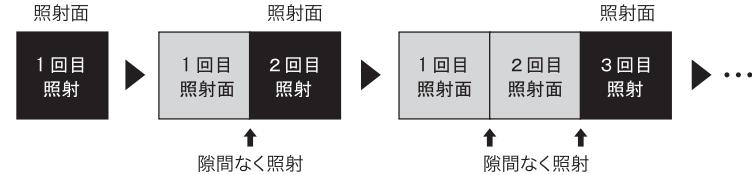

9 以後は、同じ手順で照射してください。


※連続して行なう場合、照射口(レンズ部分)が熱くなることがあります。熱いと感じたら使用を中止し、主電源は切らずにハンドピースをスタンドに収納し、冷めるまで時間を置いてください。冷めたら照射口を確認し、汚れていたら主電源を切り、お手入れを行ってから再度ご使用ください。

10 照射が完了したら、照射した部位を再度クーリングパックで冷却してください。その後化粧水やクリームで保湿してください。


## ご使用手順

- 11 ご使用後は、スタンドのメイン電源スイッチを押して、主電源を切ってください。
- 12 ランプカーボリッジのレンズ部分を、付属のクロスで拭き取ってください。
- 13 電源プラグをコンセントから抜き、電源コードをスタンドから抜き取ります。
- 14 下記イラストの順番で、ハンドピースケーブルをスタンドに収納してください。


①ハンドピースをスタンドに立てて  
ハンドピースケーブルをイラスト  
のようにします

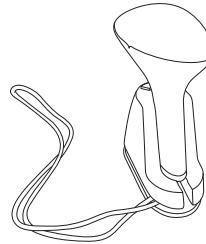


②ハンドピースケーブルをイラスト  
のように握って、イラストの矢印  
の方向に巻きます。

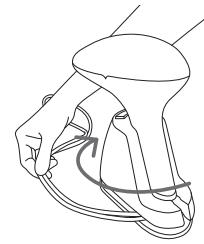

③ハンドピースケーブルをしっかりと  
握って巻きます。

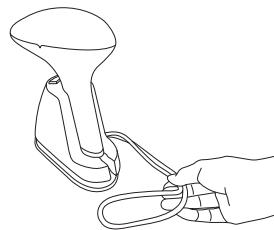

④ハンドピースケーブルの端を指で  
押して、スタンドのハンドピース  
ケーブルホルダーへ固定させます。

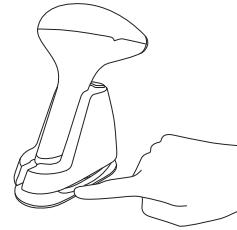

## ご使用後の注意点

- 照射後は、必ず付属のクーリングパックで照射した部位を冷やしてください。
- 冷却した後も、照射した部位の皮膚が一時的に赤くなったり、ひりひりしたり、熱をおびたように感じることがあります。照射した部位に強い痛みを感じたり、赤みが引かない場合は、使用を中断して皮膚科医にご相談ください(痛みの感覚には個人差があります)。
- 照射した部位を24時間以内に日光浴など紫外線にさらさないでください。
- 日光浴や日焼けをしないでください。
- ご使用後、野外活動がある場合は、日焼け止めクリームを2週間以上使用してください。(SPF30、PA++以上)
- 48時間以内は、塩素処理をしたプールや温泉はお避けください。
- 冷却直後は、できるだけお肌にやさしい化粧水や、保湿クリームで保湿してください。
- 24時間以内は、温水での入浴、サウナなどは控えてください。



注意

- ハンドピースケーブルをスタンドに収納する際は、ケーブルを無理に引っ張らないでください。  
断線、故障の原因となります。

# 製品のお手入れ


## ランプカートリッジの交換

### ランプカートリッジの寿命確認方法

スタンドの主電源を入れ、ハンドピースの照射レベルダウントンを長押し(約3秒)してハンドピースの電源を入れます。ハンドピースの電源が入った状態で、照射レベルアップボタンを長押し(約3秒以上)すると、ボタンを押している間のみ、照射レベル表示部の表示灯が点滅してランプカートリッジの寿命をお知らせします。


例:

照射レベル表示部の表示灯が「1」から「5」まで全て白く点滅している場合

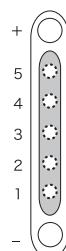

ランプ寿命が80%以上残っています。

照射レベル表示部の表示灯が「1」のみ白く点滅している場合

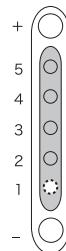


ランプ寿命が20%以下に減っています。

○は点滅を表します。

### ランプカートリッジの交換方法

照射レベル表示部の表示灯「2」が白く点滅したら、下記の順番でランプカートリッジを交換してください。(20ページの「エラー表示2」参照のこと)

- 1 スタンドの主電源を切り、コンセントを抜きます。
- 2 ランプカートリッジの上と下を握って、前に引っ張ってハンドピースから抜いてください。
- 3 新しいランプカートリッジをハンドピースにまっすぐ差し込んでください。

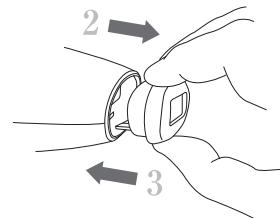

●ランプカートリッジを交換する際は、必ずスタンドの主電源を切り、コンセントを抜いてから行ってください。  
感電、発火、ショート、故障の原因となります。





## エラー表示

本製品にエラーが発生した場合、ハンドピースの照射レベル表示部の表示灯が白く点滅するとともに、ブザー音がなり続けることで発生したエラー内容をお知らせします。エラー表示を確認したら、スタンドの主電源を切って、下記の対応をしてください。

### エラー表示 1

照射レベル表示灯「1」が白く点滅すると同時に  
ブザー音が鳴り続けます

本製品のファンに不具合が発生している恐れがあります。  
お買上げの販売店へお問い合わせください。

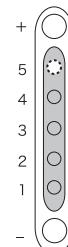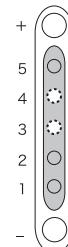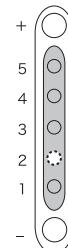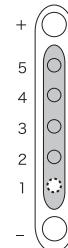

### エラー表示 2

照射レベル表示灯「2」が白く点滅すると同時に  
ブザー音が鳴り続けます

ランプカートリッジ交換の表示です。  
19ページの「ランプカートリッジの交換方法」の順番で  
新しいランプカートリッジと交換してください。

### エラー表示 3・4

照射レベル表示灯「3・4」が白く点滅すると同時に  
ブザー音が鳴り続けます

本製品の内部温度が上昇してエラーが発生しています。  
1時間程度ご使用を中断してください。  
中断後、再使用しても同じエラーが発生している場合は、  
お買上げの販売店へお問い合わせください。

### エラー表示 5

照射レベル表示灯「5」が白く点滅すると同時に  
ブザー音が鳴り続けます

ランプカートリッジのメモリーエラーです。  
お買上げの販売店へお問い合わせください。

○は点滅を表します。

# こんなときには

## 困ったときは

本製品をご使用中に異常や、以下の症状がみられる場合は、原因と処置方法をご確認ください。

こんな症状	考えられる原因	処置方法
作動しない	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていない。	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
	電源コードが本体(スタンド)の電源コード差し込み口にしっかり差し込まれていない。	電源コードをしっかり差し込んでください。
	スタンドのメイン電源スイッチとハンドピースの電源ボタン(照射レベルダウンボタン)の2つがオンになっていない。	スタンドのメイン電源スイッチをオンにしてからハンドピースの電源ボタン(照射レベルダウンボタン)を長押し(約3秒)してオンにしてください。
	ハンドピースの電源ボタン(照射レベルダウンボタン)を長押ししていない。	ハンドピースの電源ボタン(照射レベルダウンボタン)を長押し(約3秒)してください。
	ハンドピースの照射面が肌に密着していない。ランプカートリッジの先端に、誤照射防止用のセンサーが内蔵されています。照射面をしっかり肌に密着させないと照射できません。	ハンドピースの照射面をしっかり肌に密着させてください。
発光しない	照射後、ハンドピースの照射面を肌につけたままにしている。	1回照射ごとに、ハンドピースの照射面を肌からはなしてください。
	照射レベルの設定が高いほど、次に照射できるまでの待機時間が長くなります。目安として、照射レベル「1」で約3秒、照射レベル「5」で約4秒の時間を要します。	照射レベルの設定が高いほど、次に照射できるまでの待機時間が長くなります。目安として、照射レベル「1」で約3秒、照射レベル「5」で約4秒の時間を要します。
照射できるまでの時間が長い		

## よくあるご質問

Q	A
顔に使用できますか? (スキンケア用ランプカートリッジは除く)	鼻から下には使用可能です。それ以外の箇所には使用しないでください。絶対に目の周りや唇などには使用しないでください。また、男性のひげ等、太い毛に使用する場合、期待する効果が見られない場合があります。
毎日使用して大丈夫ですか?	最低でも1週間以上間隔をあけてご使用ください。 10ページ「ご使用のタイミング」を参照してください。
照射したあと焦げた匂いがするのですが?	ランプカートリッジのレンズ部にホコリや毛が付着していませんか?付属のクロスで拭き取ってください。また、照射する部位の毛が伸びている場合は、剃毛してください。
永久脱毛はできますか?	本製品で永久脱毛はできません。ご使用方法をご確認いただき、継続的にご使用いただくことで、効果を実感していただけると思います。
照射したところが赤くなったのですが?	体調や体质によって、一時的に赤みがでる場合があります。その場合は、付属のクーリングパックでよく冷やしてください。次回照射する場合は照射レベルを下げてご使用ください。皮膚の反応が続く場合は、皮膚科医の診察を受けてください。
効果がないのですが。	短期間ご使用いただいただけでは効果は得られません。ご使用のタイミングやご使用方法をご確認いただき、継続的にご使用ください。また、顔以外の太い毛の場合、お肌の状態をよく確認しながら、週1回、同じ部位を2回ずつ照射してみてください。又は、体感(熱感)が大丈夫ならレベルを上げてみてください。照射の前後はクーリングパックでよく冷やしてください。
使用中、光がまぶしく感じるのですが?	ゴーグルは着用されていますか?必ずゴーグルを着用して下さい。また、ハンドピースの照射面をしっかり密着させてください。
照射中、光が熱く感じられるのですが?	感じ方には個人差がありますが、剃毛が不十分な場合は熱く感じやすくなります。剃毛をきちんと行ってから照射してください。
海外で使用できますか?	日本国内の電源仕様(交流100V)になっているため、海外ではご使用になれません。日本国内のみでご使用ください。
エステサロンや美容皮膚科等で脱毛(電気、光、家庭用含む)や、フェイシャル、ボディコースを受けている(予定がある)場合は?	・同じ部位の脱毛コースを受けている(受ける予定がある)場合は、コース前後2週間以上空けてからご使用ください。 ・同じ部位のフェイシャル、ボディコースを受けている(受ける予定がある)場合は、コース前後1週間以上空けてからご使用ください。 ※ご使用の前には、必ずお肌の確認をしてからご使用ください。
ランプカートリッジの照射口(レンズ部分)が曇ったり、黒い付着物が付いているのですが?	電源スイッチを押して、主電源を切ってから、照射口(レンズ部分)をお掃除クロスで拭き取ってください。汚れが落ちない場合は、温らせた綿棒で拭き取ってください。 ※レンズ部分が熱くなっていますので、やけどをしないようご注意ください。
照射口(レンズ部分)が熱く感じられるのですが?	連続照射をした場合、熱くなることがあります。主電源を切らないで、ハンドピースをスタンドに収納し、照射口(レンズ部分)が冷めるまで時間を置いてください。

# スキンケア用ランプカートリッジのご使用方法 (別売・オプション品)

## ご使用的タイミング

スキンケア用ランプカートリッジを定期的にご使用いただくことで、なめらかな美しいお肌へ導きます。

### ご使用的目安

顔(頬・額)

1週間に1~2回、お肌の状態に合わせて、定期的にご使用ください。


※最低でも2日以上あけてご使用ください。

※同じ部位への照射は、1日1回までにしてください。

## スキンケア用ランプカートリッジの取り付け

### スキンケア用ランプカートリッジの取り付け方法

- 1 スタンドの主電源を切ります。
- 2 ランプカートリッジの上と下を握って、前に引っ張ってハンドピースから抜いてください。
- 3 スキンケア用ランプカートリッジをハンドピースにまっすぐに差し込んでください。

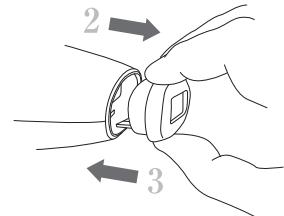

●スキンケア用カートリッジを交換する際は、必ずスタンドの主電源を切り、コンセントを抜いてから行ってください。  
感電、発火、ショート、故障の原因となります。

## ご使用手順

クレンジング・洗顔後、タオル等で水分を拭き取ります。

1 付属のゴーグルを必ず装着してください。

2 スタンドのメイン電源スイッチを押して、主電源を入れてください。主電源を入れると“ピッ”というブザー音がなります。

3 ハンドピースの照射レベルダウンボタンを長押し(約3秒)して、ハンドピースの電源を入れてください。ハンドピースの電源を入れると、“ピッピッピッピッ”というブザー音がなり、ハンドピースに内蔵されたファンが作動します。

4 照射レベルアップダウンボタンを押して、照射レベルを設定してください。設定出来る照射レベルは、1から3です。

※ご使用される際は、レベル1から始めてください。照射レベルを上げた時、熱く感じたらレベルを下げて行ってください。

5 付属のクーリングパックで照射する部位を必ず冷却します。クーリングパックは冷凍庫で冷やして、必ずガーゼ又は薄でのタオル等で巻いてからお使いください。


6 照射する部位にハンドピースを密着させます。ハンドピースが確実に密着すると、“ピッピッピッピッ”というブザー音がなり、待機状態になります。

※照射待機時は、ハンドピースを肌に密着させてください。

肌に密着していないとブザー音はしません。

※ハンドピースの照射口(面)を、肌に強く押し当てないでください。

照射口(面)

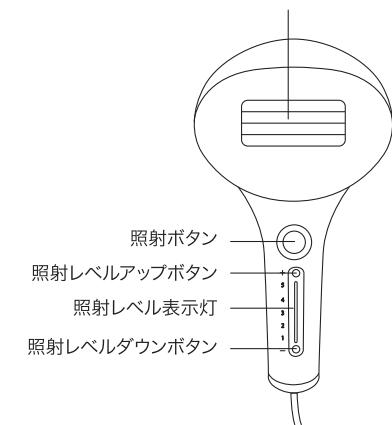

肌に密着している



肌にあたっていない



肌に一部しかあたっていない

## ご使用手順

7 右記イラストの手順に従い、ハンドピースの照射ボタンを押し、照射してください。照射ボタンを1回押すと1回照射します。照射の際、完全に照射が終わるまで(約1秒)ハンドピースを肌から離さないでください。

- ※頬・額のみ照射可能です。唇、目の周りや直接目(眼球)、髪の毛、眉毛には絶対に照射しないでください。
- ※照射の際は直接光を見ない様、目を閉じて行ってください。



8 照射が終了したら、ハンドピースを肌から20cm以上離して照射待機し、充電が完了したら、次に照射する部位に密着させ照射してください。充電の合図は、“ピップッ…ピー”となった時点です。

※照射レベルにより、充電時間は異なります。

※照射する時は隙間なく照射してください。重ねて照射しないでください。

9 以降は、同じ手順で照射してください。

※連続して行う場合、照射口(レンズ部分)が熱くなることがあります。熱いと感じたら使用を中止し、主電源を切らずにハンドピースをスタンドに収納し、冷めるまで時間を置いてください。冷めたら、照射口を確認し、汚れていたら主電源を切り、お手入れを行ってから再度ご使用ください。

10 照射が完了したら、照射した部位を再度クーリングパックで冷却してください。  
その後、化粧水やクリームで保湿してください。

11 スタンドのメイン電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、電源コードをスタンドから抜きます。

12 スキンケア用ランプカートリッジのレンズ部分を付属のクロスで拭き取ってください。


## スキンケア用ランプカートリッジの交換

### ランプカートリッジの寿命確認方法

スタンドの主電源を入れ、ハンドピースの照射レベルダウンボタンを長押し(約3秒)してハンドピースの電源を入れます。ハンドピースの電源が入った状態で、照射レベルアップボタンを長押し(約3秒以上)すると、ボタンを押している間のみ、照射レベル表示部の表示灯が点滅してランプカートリッジの寿命をお知らせします。


例:

照射レベル表示部の表示灯が「1」から「5」まで全て白く点滅している場合

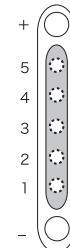

ランプ寿命が80%以上残っています。

照射レベル表示部の表示灯が「1」のみ白く点滅している場合

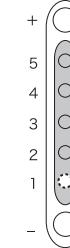

ランプ寿命が20%以下に減っています。


### スキンケア用ランプカートリッジの交換方法

照射レベル表示部の表示灯「2」が白く点滅したら、下記の順番でランプカートリッジを交換してください。(20ページの「エラー表示2」参照のこと。)

1 スタンドの主電源を切り、コンセントを抜きます。

2 スキンケア用ランプカートリッジの上と下を握って、前に引っ張ってハンドピースから抜いてください。

3 新しいスキンケア用ランプカートリッジをハンドピースにまっすぐ差し込んでください。

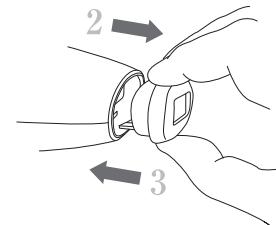

●スキンケア用ランプカートリッジを交換する際は、必ずスタンドの主電源を切り、コンセントを抜いてから行ってください。  
感電、発火、ショート、故障の原因となります。

# 製品仕様

定格電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	150W (max.)
製品サイズ	スタンド: 約75mm(W) × 約150mm(D) × 約120mm(H) ハンドピース: 約80mm(W) × 約150mm(D) × 約210mm(H)
製品重量	約850g (スタンド+ハンドピース)
光源	キセノンランプ
照射サイズ	13mm×30mm(3.9㎤)
ランプ寿命	照射レベル1: 20,000ショット
動作条件	温度: 10°C~35°C 湿度: 30%RH~80%RH
保管条件	温度: 5°C~35°C 湿度: 0%RH~95%RH

## ランプカートリッジ(スキンケア用)【別売・オプション品】

製品サイズ	約58mm(W) × 約30mm(D) × 約37mm(H)
製品重量	約18g
光源	キセノンランプ
照射サイズ	13mm×30mm(3.9㎤)
ランプ寿命	30,000ショット

※本製品の性能等を改善するための設計及び仕様、付属品は、予告なく変更される場合があります。

### ●本製品は、日本国内用に設計・販売しております。

電源電圧や周波数の異なる国ではご使用になれません。海外での修理やアフターサービスも対象外です。

### ●本製品は、屋内専用です。

### ●取扱説明書の内容について

本書は製品開発にさきがけて印刷しています。性能や操作性向上のため、製品仕様の一部が変更となることがあります。その場合は、製品自体の仕様が優先されます。

愛情点検	●長年ご利用の製品の点検を!		
	こんな症状はありませんか?	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源を入れても運転しない。</li> <li>本体が異常に熱い、焦げ臭い。</li> <li>異常な音がする。</li> <li>電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。</li> <li>その他の異常がある。</li> </ul>	 <b>ご使用中止!!</b> 故障や、事故防止のため電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

# 記録表

[ 記録 ]			
No.	日付	部位	レベル
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

[ 記録 ]			
No.	日付	部位	レベル
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

## 1 本製品には、本書の裏表紙に保証書がついています

お買い上げの販売店での所定事項の記入をご確認いただき、保証内容をよくお読みになって大切に保管してください。所定事項の記入がないと保証は有効となりませんので、そのときはお買い上げの販売店へ記入をお申しつけください。

## 2 保証期間中に修理を依頼されるとき

本取扱説明書をよくお読みいただき、本製品に異常がある場合は、お買い上げの販売店に保証書をご提示の上、修理を依頼してください。保証書の規定により無償で修理させていただきます。

## 3 保証期間後に修理を依頼されるとき

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により本製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理致します。

## 4 補修用性能部品について

当社では本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造終了後、最低6年間保有しております。

## 5 本製品使用中、万一不具合により除毛等を行うことができなかった場合

そのことによる損失の補償、または使えなかったことによる付随的損害の補償については、その責任を負いかねますのでご容赦ください。

### ●個人情報のお取扱いについて

本製品の修理等に際してお預かりするお客様のお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理致します。また、お客様の同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客様がお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただく場合があります。

#### 〈利用目的〉

・商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理の対応にのみ対応させていただきます。

#### 〈業務委託の場合〉

・上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。

## お問い合わせ先

発売元

エステティックTBC

〒163-0655

東京都新宿区西新宿1-25-1

お客さま相談室 ☎ 0120-80-1272

## 保証規定

本書は、お買い上げ日より保証期間内において、正常な使用状態で故障が発生した場合、本書記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。詳細は下記をご参照ください。

1. 保証期間中、取扱いについての説明書等の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げの販売店に修理をご依頼の上、本書をご提示ください。お買い上げの販売店が無料修理致します。
2. 保証期間中の無料修理などアフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、又は当社へお問い合わせください。
3. 次のような場合には、保証期間中でも有料修理になります。
  - a. 本書のご提示がない場合
  - b. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記載がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
  - c. ご使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - d. お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
  - e. 火災、地震、風水害、雷、その他天災地変、塩害、公害や異常電圧による故障及び損傷。
  - f. 本製品以外の他の機器によって生じた故障及び損傷。
4. 下記の部品は消耗品です。保証期間内でも有料となります。
  - ・ランプカートリッジ(エビ用)
  - ・ランプカートリッジ(スキンケア用)
  - ・クーリングパック
5. 本製品は持込修理の対象商品です。保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様のご負担となります。
6. この保証書は、本書に明示した期間の条件のもとにおいて、無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
7. 本書は、日本国内においてのみ有効です。