

保証書

持込修理

品名	家庭用美顔器		型番	HA-ML01
製品名	TBC加圧吸引美顔器MORELIFT			
無料修理保証	対象部分	期間		
	製品 (ただし、消耗品および付属品は除く)	お買い上げ日から 1年間		
※ お買い上げ日	年 月 日			
※ お客様	ご住所 <input type="text"/>			
	お名前 <input type="text"/> 様			
※ 販売店	住所・販売店名・電話 ご購入日のわかる明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。			

●販売店様へのお願い

必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

●お客様へのお願い

- 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名が記載されているかお確かめください。
万一記入がない場合は、ただちにお買い上げの販売店にお申し出ください。
- ご贈答などで、本書記載のお買い上げの販売店に修理がご依頼になれない場合は、当社へ直接ご連絡ください。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて詳しくは、お買い上げの販売店、または当社に直接お問い合わせください。

発売元

エステティックTBC

〒163-0655


東京都新宿区西新宿1-25-1

お客さま相談室 **0120-80-1272**

取扱説明書

家庭用美顔器

TBC加圧吸引美顔器
MORELIFT
モアリフト

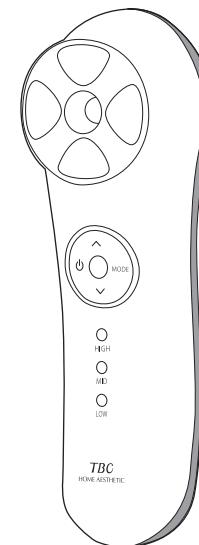

もくじ

安全上のご注意	1
製品について	
製品と付属品	7
特長	7
各部の名称と働き	8
各モードについて	10
ご使用方法	
お肌へのプレテスト	11
化粧品の選び方	11
ご使用の手順	12
ご使用後は	
お手入れの仕方	15
保管の仕方	16
点検について	16

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

保管用
保証書付

安全上のご注意

- ご使用になる前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、適切なご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちにご使用を中止してください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について

 危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容です。
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害 [*] の発生が想定される内容です。

^{*}物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

●図記号について(次は図記号の例です)

	してはいけないことを示しています。
	しなければならないことを示しています。
	注意しなければならないことを示しています。



次に該当する方は使用しないでください。

医療用電子機器の誤作動を招く原因となります。

- 医療用電子機器を使用している方
 - ペースメーカーなど体内植込型医療用電子機器
 - 人工心肺など生命維持用医療用電子機器
 - 心電計などの装着型医療用電子機器



肌や身体を守るため以下の方は使用しないでください。

事故やトラブルの原因となります。

- 医師の治療を受けている ●15歳以下の子供
- 急性疾患 ●結核性疾患 ●発熱している ●高血圧 ●伝染病疾患
- 悪性腫瘍 ●アレルギー体質 ●内臓疾患 ●皮膚病
- アトピー性皮膚炎 ●敏感肌または肌が弱い ●疲労している
- 皮膚トラブルがある ●体調がすぐれない ●酒気帯び
- 眠気をさそう薬を服用している ●生理中、妊娠中、産後1ヶ月
- 物理的刺激などによる病的なシミがある ●糖尿病
- 歯を治療中 ●顔面の神経障害 ●心臓疾患 ●出血性疾患
- 網膜剥離 ●強度の近視 ●目の手術を行った
- ステロイドなどの薬を持続的に使用している
- 肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている
- 顔の脱毛や除毛をした当日 ●自分で意思表示できない
- 温度の感覚が鈍い ●頭部や眼に事故後の後遺症がある
- 顔面にメタル、シリコン、プラスチックなどを埋め込んでいる



次のような部分には使用しないでください。

事故やトラブルの原因となります。

- 指定以外の部位
- 静脈瘤のある部分 ●外科手術(美容整形も含む)をした部分
- 上まぶたなど目の近くやのど
- 過度に日焼けをした部分 ●顔面に金属などを埋め込んでいる部分
- 皮膚炎を起こしている部分 ●ウイルス性のイボのある部分
- 脱毛処理後の赤みなどがある部分
- 傷、湿疹、腫れもの、ケロイドのある部分
- 極端にたるみのある部分

ご自身で判断できない場合は、ご使用前に医師にご相談ください。



警告

本製品(本体)について



禁 止

- 本製品は、使用目的以外には使用しない。
事故や故障の原因となります。
- 本製品を改造、分解、修理をしない。
感電、発火、異常動作によるケガの原因となります。
- 本体に重いものを置いたり、使用中に落下させたり、強い衝撃を与えない。
故障、動作不良の原因となります。
- アルコール、シンナー、ベンジン、除光液など引火性のあるもの近くで使用しない。
感電、火災、ショート、故障の原因となります。
- 他の電気製品(美容器)との同時使用はしない。
事故、感電、肌トラブルの原因となります。
- 過剰な連続使用はしない(業務としての使用など)。
ケガ、やけどなどの原因となります。
※業務用として使用された場合は修理をお受けできません。

ACアダプターについて



禁 止

- ACアダプターが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電、発火、ショートの原因となります。
- ACアダプターを水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。
感電、発火、ショートの原因となります。
- コードを痛めない。
(加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものをのせる、束ねる、はさみ込む、高温部に近づけるなど)
感電、発火、ショート、断線の原因となります。
- ぬれた手でACアダプターをコンセントから抜き差ししない。
感電、ケガの原因となります。



警告

本製品(本体)について



必ず守る

- ストーブや電熱器具の近くで本製品を使用しない。
発熱、発火、故障の原因となります。
- 本製品は防水仕様ではありません。浴室などの高温多湿の場所で使用したり、保管したり、水のかかりやすい場所に置かない。
感電、火災、ショート、故障の原因となります。
- 子供の手の届く場所に保管したり、使用させたりしない。
事故やケガの原因となります。
- 本製品を水洗いしない。汚れた場合は洗剤を使わず布で拭いた後、保管する。
感電、火災、ショート、故障の原因となります。

ACアダプターについて



必ず守る

- 必ず交流100~240Vで使用する。(無償修理は日本国内のみ)
感電、発火、故障の原因となります。
- 必ず専用のACアダプターを使用する。ACアダプターはコンセントに直接差し込み、タコ足配線はしない。
感電、発火、ショートの原因となります。
- ACアダプターをコンセントや本製品から抜いたり差し込んだりする際は、必ずプラグ部分を持って行う。
(プラグの金属部分には触れないようにする)
感電、発火、ショート、断線の原因となります。
- 異臭、異常発熱したときは使用しない。
破損、発火、故障の原因となります。電源を切り、必ず点検・修理を受けてください。
- 使用時以外はACアダプターをコンセントから抜く。
火災、発火の原因となります。



注意

本製品(本体)について



禁 止

- 本体にヒビや亀裂があったり、電極部に不具合がある場合は使用しない。
肌トラブル、ケガの原因となります。
- アルコール、シンナー、ベンジン、除光液などの溶剤で拭かない。
本製品の表面に損傷を与える原因となります。
- 屋外で使用しない。
故障、動作不良の原因となります。
- 本体を金属や硬い物にあてない。
発熱、発火、故障、破損の原因となります。
- 子供、ペットには使用しない。
ケガの原因となります。
- 使用に適さない化粧品は使用しない。(P.11)
故障、動作不良の原因となります。

安全上のご注意



注意

お肌について



必ず守る


- ご使用前に必ずプレテストをして、お肌に異常がないことを確認する。
異常を感じた場合は使用しない。
- 肌トラブルを防止するため、必ず事前に実施してください。
- 初めて使用するときや慣れるまでは、必ず5分以内でレベルLOWから使用する。
事故やケガの原因となります。
- 同じ部位への繰り返しの使用は控える。
うっ血や筋肉疲労を起こす恐れがあります。
- 途中で気分が悪くなったり、お肌に異常があらわれた場合は、
使用を中止する。
翌日以降も異常が続く場合は医師にご相談ください。
- 使用後は毎回、「ご使用後は」(P.15)を参照して、製品に付着した
化粧品を取り除く。
故障、肌トラブルの原因となります。
- 電極面とお肌との間に、常に化粧品・水などの水分があるように、
途中で付け足す。
化粧品・水などがないとEMS(筋肉刺激)、イオンの通電が悪くなり
効果が低下したり、肌トラブルの原因となります。
- 設定時間以上の使用は避ける。(1日1回最大10分まで)
長時間の使用は筋肉や神経に必要以上に刺激を与え、
逆効果となる場合があります。
- お肌の状態に合わせて使用する。
肌トラブルの原因となります。
- 日焼け直後、ピーリングとの併用は控える。
故障、肌トラブルの原因となります。

安全上のご注意

製品について


製品と付属品

●製品

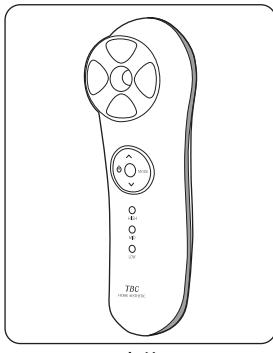

本体

●付属品

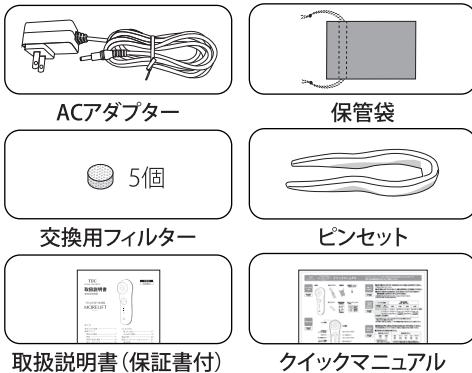

取扱説明書(保証書付)

クイックマニュアル

特長

本製品は、リズミカルで心地よい加圧吸引と、表情筋の運動をサポートするEMS、化粧水等の浸透をサポートするイオンケアが同時にトリートメントできる、お顔専用の家庭用美顔器（加圧吸引美顔器）です。※角質層まで

●加圧吸引

加圧と吸引が交互に繰り返されることで、エステティシャンのハンドマッサージのような体感が得られます。

加圧吸引アップ (アップモード搭載)	リズミカルな加圧と少し長めの吸引。 お肌をひきしめるように、しっかりと吸引します。
加圧吸引ライト (ライトモード・モイストモード搭載)	細かくリズミカルな加圧と吸引。 心地よく、お肌を振動させていきます。

●EMS


外部から電気的な刺激を与え、筋肉運動をサポートします。

EMSアップ (アップモード搭載)	筋肉の収縮時間を作りにし、表情筋の運動をサポート。
EMSライト (ライトモード・モイストモード搭載)	リズミカルな刺激で、表情筋をリラックス＆トーニング。

●イオンケア

化粧水等の浸透をサポートします。
+とーが交互に入れ替わることで、様々な化粧品でご使用できます。
※角質層まで

各部の名称と働き

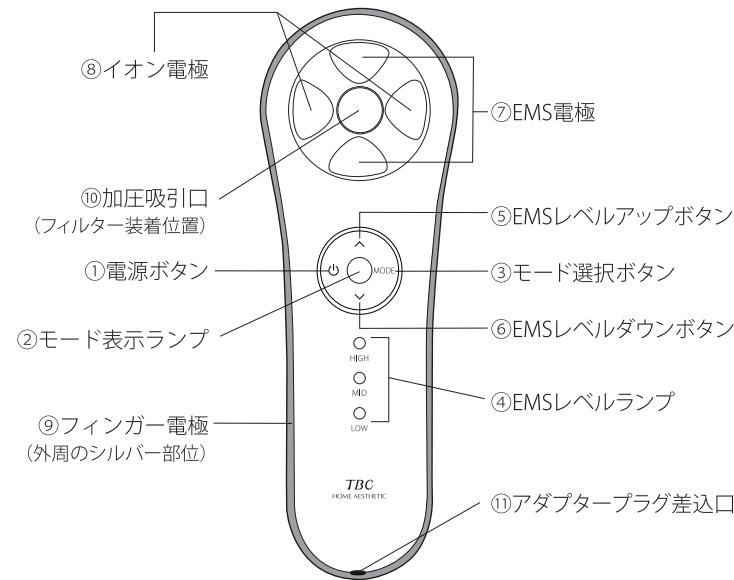

①電源ボタン

このボタンを押すと本体の電源が入りアップモード（赤）のトリートメントがスタートします。
電源オンの状態でこのボタンを長押し（1秒以上）すると電源がオフになります。


②モード表示ランプ

動作中のモードを色で表示します。

赤（アップモード） 青（ライトモード） 黄（モイストモード）

③モード選択ボタン

トリートメントモードを切り替えるボタンです。
モード表示ランプが点灯している状態でこのボタンを押すと
以下の順番でトリートメントしたいモードが選択できます。

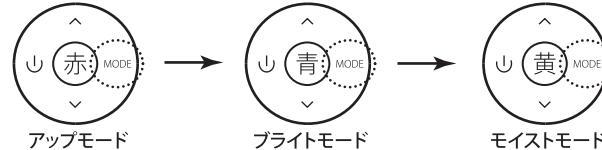


モード選択後10分間で自動的に動作が停止します。（過剰な連続使用、電源切り忘れ防止）

各部の名称と働き

④EMSレベルランプ

EMS出力レベルを表示します。

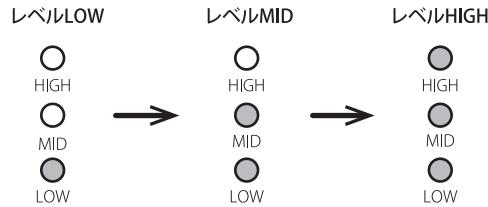

⑤EMSレベルアップボタン

EMS出力レベルをアップするときに使用するボタンです。

このボタンを短押しするとEMSの出力レベルが1段階ずつアップします。

⑥EMSレベルダウンボタン

EMS出力レベルをダウンするときに使用するボタンです。

このボタンを短押しするとEMSの出力レベルが1段階ずつダウンします。

⑦EMS電極

EMS電流が出力される電極部です。

⑧イオン電極

イオン電流が出力される電極部です。

⑨フィンガー電極

外周を囲んでいるシリバー部分がフィンガー電極です。

しっかりと触れるように本体を持ちます。

注)使用者(自身)が触ることで機能します。

⑩加圧吸引口

空気の排出・吸気口です。

⑪アダプタープラグ差込口

ACアダプターのプラグを接続する差込口です。



各モードについて

本製品には3つのモードがあります。

お肌の状態に合わせていずれか1モード1日1回(最大10分)ご使用ください。

モード	機能	時間	特長	レベル	使用頻度(目安)
ゆるみが気になる方 	加圧吸引 • EMS • アップ • イオンケア	約10分 (初めて使用する場合は5分)	お肌をひきしめるようなりズミカルな加圧と長めの吸引に加え、EMSで表情筋の運動をサポート。イオンケアで化粧水や美容液などの浸透をサポート*。 ※角質層まで	EMSのみ 3段階 (HIGH MID LOW)	どちらかを2日に1回
くすみ*が気になる方 	加圧吸引 • EMS • ブライト • イオンケア	細かくリズミカルな加圧吸引とEMSによる心地よい振動で、お肌や表情筋にアプローチし、リラックス&トーニング。イオンケアで化粧水や美容液などの浸透をサポート*。 ※角質層まで	—	※EMSが入っているアップモード・ブライトモードは2日に1回ご使用ください。	
乾燥が気になる方 	加圧吸引 • ブライト • イオンケア	細かくリズミカルな加圧吸引でお肌へアプローチ。イオンケアで化粧水や美容液の浸透をサポート*。 ※角質層まで	—	毎日*	※アップモード又はブライトモードを行った場合は行わない。

●プレテスト～1週間のオススメ使用方法

プレテスト期間		通常使用期間 1日1回(最大10分)			
ご使用初日 プレテスト①	翌日 プレテスト②	1日目	2日目	3日目	4日目
アップモード ※3分で腕の内側を行ってください	アップモード or ブライトモード or モイストモード ※5分でお顔全体を行ってください	アップモード or ブライトモード or モイストモード	モイストモード	アップモード or ブライトモード or モイストモード	モイストモード

••••
繰り返し

※初めて使用されるモードは、5分ご使用いただきお肌に異常がなければ、次回より10分ご使用いただけます。

※EMSが苦手な方はモイストモードをご使用ください。

※EMSは毎日使用すると、筋肉に必要以上に刺激を与え、逆効果になる場合があります。

EMSが入っているアップモード・ブライトモードは1日おきの使用がおすすめです。

※同じ部位への繰り返しの使用は、うっ血や筋肉疲労を起こす恐れがあるため、お控えください。

ご使用方法

お肌へのプレテスト

●プレテスト①

※製品や使用する化粧品を初めてご使用になる際は、必ず皮膚トラブルが起きないか相性をプレテストしましょう。

1. お肌を清潔な状態にする

二の腕の内側を石けんなどで洗い、タオルなどで拭き取ります。

2. 二の腕の内側に化粧品（油分を含まない化粧水）または水を塗り、アップモード赤点灯のレベルLOWの状態で、約3分間使用する

プレテストをした部分は水でぬらしたり、こすったりしないでください。

24時間以内にお肌の異常（赤みやほてりなど）がないことを確認してからご使用ください。



- ・肌トラブルを防止するため、必ず事前に実施してください。
- ・実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合はただちにテストを中止して化粧品を洗い流してください。
- ・お肌に異常を感じた場合は使用しないでください。



●プレテスト②

初めてのモードをご使用になる際は、レベルLOWの状態で5分間使用し、お肌の状態をお確かめください。

化粧品の選び方

本製品を使用する際は、必ず化粧品をお肌に塗ってから使用してください。

●お手持ちの化粧品を使うとき

	化粧水	美容液
※化粧水を市販のミストボトルに入れ替えてご使用いただくと、よりスムーズにトリートメントが行えます。		
	乳液	クリーム
※油分が配合された化粧品をご使用になると、機能が十分に発揮されません。 ※ジェルやゲルタイプ化粧品をご使用になると、故障、動作不良の原因となります。 以下の化粧品もご使用になれます。 ・スクラブ系・刺激の強い化粧水・塩分、ミネラル分を含む化粧水、マッサージジェル ・温感のある化粧水、マッサージジェル・シートマスク・石けん類・メイク化粧品		

ご使用の手順


メイクを落とし、洗顔のあとにご使用ください。

(クレンジング、洗顔などを行って、お肌を清潔な状態にしてください。)

※本製品は防水仕様ではないため、絶対にお風呂や岩盤浴で使用しないでください。

1. ACアダプターを本体とコンセントに差し込む

本体のアダプタープラグ差込口にACアダプターを差し込んでください。
次に、ACアダプターをコンセントに差し込んでください。

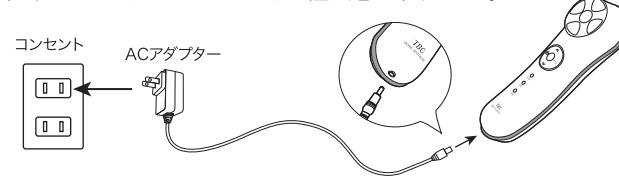

※本製品は充電式の機器ではありません。


ACアダプターを差し込んだままご使用ください。



- ・ACアダプターを差し込む際は、しっかり奥まで差し込んでください。
故障や動作不良の原因となります。

2. フィルターをセットする（購入時は本体にセットされています。）

本体の加圧吸引口に付属のピンセットでフィルターを取り付けてください。

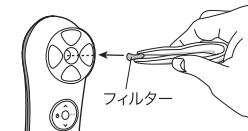

3. 化粧品をつける

お肌にお手持ちの化粧水や美容液またはTBC推奨品をたっぷり塗布してください。
※製品に直接化粧品を付けないでください。



ワンポイント！


市販のミストボトルにお手持ちの化粧水やTBC推奨品を入れ替え、
スプレーしていただくことでスムーズにトリートメントが行えます。

4. 電源を入れる

電源ボタンを押し、電源を入れます。

モード表示ランプが赤に点灯し、同時に

アップモードのトリートメントがスタートします。

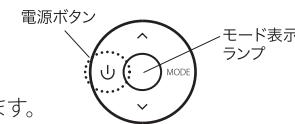


ご使用の手順

5. モードを選ぶ

モード選択ボタンを押してモードを選びます。押すたびに

赤(アップモード)→青(ブライトモード)→黄(モイストモード)→赤…と
繰り返し表示されます。

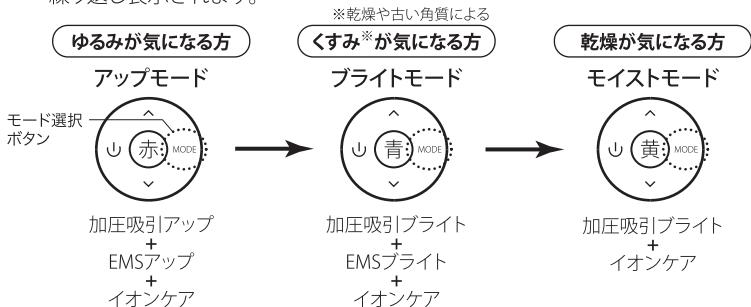


6. EMS(筋肉刺激)レベルの調節

電源を入れたときはレベルLOWの状態です。EMSレベルアップボタン、ダウンボタンでお好みの出力に調節してください。

※使い始めは必ずレベルLOWから行ってください。


※痛みを感じるほどレベルを上げないでください。

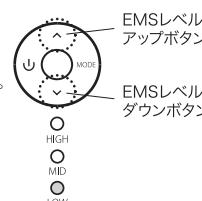

※お手入れ中に、EMSの体感が弱くなったり、すべりが悪くなったりした場合は、化粧品を付け足してください。

7. トリートメント ※顔全体で目安10分

※お肌へのプレテスト①②を行ったうえでご使用ください。

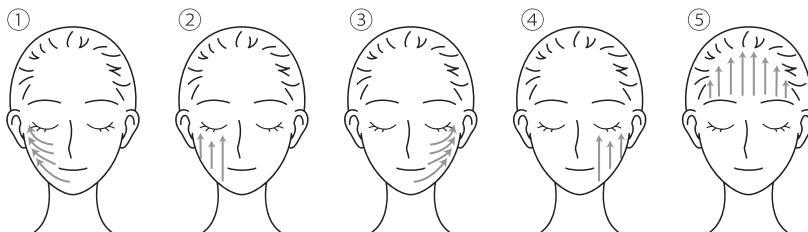

①～⑤の順番で、1周3分程度を目安に3周ご使用いただけます。

矢印の方向に引き上げるように、お肌にゆっくりと滑らせてていきます。



・上まぶたなど目の近く、のどには
絶対に使用しないでください。



:使用不可な部位



・1カ所に止めたり、同じ部分を繰り返し行わず、移動してください。
同じ部位への繰り返しの使用は、うつ血や筋肉疲労を起こす恐れがあるため、お控えください。
・強く引きずらないでください。
・過度に力を入れて使用しないでください。肌トラブルの原因となります。



・電極面とお肌の間に、常に化粧水・水などの水分があるように、
途中で付け足してください。
水分が少ないとEMS(筋肉刺激)、イオンの通電が悪くなり
効果が低下したり、肌トラブルの原因となります。

※EMS電極とイオン電極を
お肌に密着させゆっくり
と滑らせてください。



※本体外周のフィンガー電極にしっかりと触れるように本体を持ってください。



フィンガー電極に触れていないと
イオンケアが効果的に行われません。

8. オートオフ

10分経過すると自動的にトリートメントが終了します。

<途中で終了したい場合>

電源ボタンを長押し(1秒以上)すると、トリートメントが終了します。

9. オートクリーニング

停止から5秒後、「ブー」という動作音があり、オートクリーニング排気(10秒間)
が作動します。排気動作が終了するまでの間、モード表示ランプが点滅します。

オートクリーニング終了後電源が自動で切れます。

※オートクリーニング中もACアダプターをコンセントから抜かないでください。

10. ACアダプターをコンセントから抜く

ご使用後は

お手入れの仕方

電極と加圧吸引口のフィルターは、使用後に毎回必ずお掃除をしてください。

製品の故障・動作不良を防ぐために、使用後はお掃除をしてください。
お掃除する際は必ず電源をオフにし、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

●本体のお掃除について


1. 電極についた水滴や化粧水などをティッシュなどで拭き取る

2. 水で湿らせて固くしぼった布で、表面の汚れを拭き取る

- ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませたスポンジや布で拭き取ってください。
- ・アルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。
- ・水洗いしないでください。

●フィルターのお掃除について

1. 付属のピンセットで加圧吸引口の フィルターを取り出す

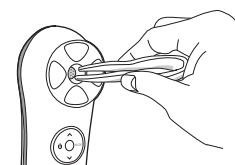

2. 流水でもみ洗いする



3. 乾かしてから取り付ける

保管の仕方

- 長時間使用しないときは、本体のお掃除をしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、ACアダプターをコンセントから抜いて保管してください。
- ストーブやヒーターのそば、浴室など高温多湿の場所、車の中、直射日光のある場所、不安定な場所での保管は避けてください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

点検について

- 長期間使用しなかった本製品を再び使用するときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「困ったときは」(P.17~18)を参照して、原因と処置方法についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえ発売元まで相談してください。
- 本製品が故障、破損した場合はお買い上げいただいた販売店まで相談してください。

こんなときは

困ったときは

本製品をご使用中に異常や、以下の症状がみられる場合は、原因と処置方法をご確認ください。

こんな症状	考えられる原因	処置方法
本体の電源が入らない または途中で切れる	→ ACアダプターがコンセントに差し込まれていない → ACアダプターのプラグが本体に差し込まれていない	→ ACアダプターをコンセントに差し込んでください → しっかりと奥まで差し込んでください
充電できない		→ 充電式の機器ではありません ACアダプターを差し込んだままご使用ください
EMS(筋肉刺激)が出ない(感じない)	→ お肌に水分が足りない または乾燥している → レベルが低い → 片方のEMS電極しかお肌にあたっていない → 感じ方には個人差があります	→ お肌に化粧水などを付け足して十分に湿らせてください → EMSレベルアップボタンでレベルを上げてください → 両方のEMS電極をお肌にあててください
EMS(筋肉刺激)が痛い	→ EMS電極全体がお肌にあたっていない → レベルが高い	→ EMS電極全体がお肌にあたるようにしてください → EMSレベルダウンボタンでレベルを下げてください

こんな症状	考えられる原因	処置方法
加圧吸引の出力が感じられない(弱い)	→ 加圧吸引口のフィルターが目詰まりしている → 加圧吸引口がお肌に密着していない	→ 加圧吸引口のフィルターを清掃してください → 加圧吸引口をお肌に密着させてください 密着しない凹凸の大きい部分では使用できません
加圧吸引のレベルが変わらない		→ 加圧吸引のレベルは変更できません (レベル表示はEMSのものです)
使用中、お肌がピリピリする	→ お肌に水分が足りない または乾燥している	→ お肌に化粧水などを付け足して十分に湿らせてください
使用中、お肌が赤くなってきた	→ 同じ部位に繰り返しトリートメントを行った	→ トリートメント方法を再度ご確認いただき、1力所に止めたり、同じ部分を繰り返し行わないでください
イオンケアのレベルが変わらない		→ イオンケアのレベルは変更できません (レベル表示はEMSのものです)
終了したのに「ブー」という音がなり動き出した	→ オートクリーニングです	→ 10秒間のオートクリーニング排気後、電源が自動で切れます

よくあるご質問

Q	A
お風呂で使用できますか?	本製品は、防水仕様になっていないため、ご使用になれません。 <u>絶対にお風呂やサウナ、岩盤浴で使用しないでください。</u>
化粧水などは1回どのくらい使用すればいいですか?	本製品の特長として、化粧水などが不足すると電極を滑らせにくくなると共にEMSを感じにくくなります。化粧水などが少ないと感じたら付け足してご使用ください。
敏感肌なのですが使用できますか?	はじめに「お肌へのプレテスト」(P.11)を参照して使用し、お肌の様子を確認してください。 お肌に異常がなければご使用いただけます。 お肌に異常を感じた場合は、すぐにご使用を中止してください。ご自分で判断が難しい場合は医師にご相談ください。
どんな化粧品を使用すればいいですか?	お手持ちの化粧水や美容液を使用することができます。 ただし、以下の化粧品はお肌のトラブルや本製品が故障する原因となりますので、使用しないでください。 (使用に適さない化粧品類) <ul style="list-style-type: none"> ・乳液・クリーム・オイル・ジェル・ゲルタイプ・スクラブ系 ・シートマスク・刺激の強い化粧水 ・温感のある化粧水、マッサージジェル ・塩分、ミネラル分を含む化粧水、マッサージジェル ・石けん類、メイク化粧品など
毎日使用できますか?	毎日使用できます。ただし、EMS機能が作動するアップモードとライトモードはどちらかを2日に1回(最大10分)までとしてください。同じ部分への繰り返しのご使用は筋肉疲労を起こす恐れがあるため、お控えください。EMSが作動しないモイストモードは毎日ご使用できます。
1日に何回使用してもいいですか?	1日1回(最大10分)いずれかのモードをご使用ください。
使用できない部位はありますか?	本製品はお顔専用です。 P.13~14のご使用の手順に従って使用してください。
フィルターの交換時期はいつごろですか?	使用環境によりますが、交換目安は約2ヶ月です。

製品仕様

●製品仕様

定格電源電圧	本体 DC5V0.6A ACアダプター 入力AC100-240V 50/60Hz 出力DC5V1A
消費電力	約3W
出力周波数	EMS(20Hz / 5Hz)
製品サイズ	約W64×D180×H53 (mm)
製品重量	約210g (ACアダプターは除く)
製造国	中国
材質	本体:ABS樹脂 電極:ABS樹脂、クロムメッキ
動作条件	温度:5°C~35°C 湿度:30%RH~80%RH
保管条件	温度:-10°C~50°C 湿度:10%RH~90%RH

※本製品の性能などを改善するための設計および仕様は、予告なく変更される場合があります。

●本製品は、日本国内用に設計・販売しております。

電源電圧や周波数の異なる国ではご使用になれません。
海外での修理やアフターサービスは対象外です。

●本製品は、屋内専用です。

●取扱説明書の内容について

本書は製品開発にさきがけて印刷しています。性能や操作性向上のため、製品仕様の一部が変更となることがあります。その場合は、製品自体の仕様が優先されます。

愛情点検	●長年ご利用の製品の点検を!		
	こんな症状はありませんか?	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源を入れても作動しない。 ● 本体が異常に熱い、焦げ臭い。 ● 異常な音がする。 ● ACアダプターのコードを動かすと通電したり、しなかつたりする。 ● その他の異常がある。 	<p>ご使用中止!!</p> <p>故障や、事故防止のため電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。</p>

1. 本製品には、本書の裏表紙に保証書がついています。

お買い上げの販売店での所定事項の記入をご確認いただき、保証内容をよくお読みになって大切に保管してください。所定事項の記入がないと保証は有効となりませんので、そのときはお買い上げの販売店へ記入をお申し付けください。

2. 保証期間中に修理を依頼されるとき

本取扱説明書をよくお読みいただき、本製品に異常がある場合は、お買い上げの販売店に保証書をご提示のうえ、修理を依頼してください。保証書の規定により無償で修理させていただきます。

3. 保証期間後に修理を依頼されるときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により本製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理致します。

4. 補修用性能部品について

当社では本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を製造終了後、最低7年間保有しております。

●個人情報のお取扱いについて

本製品の修理などに際してお預かりするお客様のお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理致します。また、お客様の同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客様がお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただく場合があります。

〈利用目的〉

・商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応にのみ利用させていただきます。

〈業務委託の場合〉

・上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督を致します。

【お問い合わせ先】

発売元

エステティックTBC

〒163-0655

東京都新宿区西新宿1-25-1

お客さま相談室 ☎ 0120-80-1272

保証規定

本書は、お買い上げ日より保証期間内において、正常な使用状態で故障が発生した場合、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記をご参照ください。

1. 保証期間中、取扱いについての説明書などの注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げの販売店に修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。お買い上げの販売店が無料修理致します。
2. 保証期間中の無料修理などアフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または当社へお問い合わせください。
3. 次のような場合には、保証期間中でも有料修理になります。
 - a. 本書のご提示がない場合。
 - b. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記載がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - c. ご使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および損傷。
 - d. お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷。
 - e. 火災、地震、風水害、雷、その他天災地変、塩害、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - f. 本製品以外の他の機器によって生じた故障および損傷。
4. 下記の付属品は消耗品です。保証期間内でも有料となります。
 - ・交換用フィルター
 - ・ACアダプター
 - ・保管袋
 - ・ピンセット
5. 本製品は持込修理の対象商品です。保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様のご負担となります。
6. この保証書は、本書に明示した期間の条件のもとにおいて、無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
7. 本書は、日本国内においてのみ有効です。