

TBC

## 保証書

持込修理

品名	家庭用電子美容器		型番	HA-PH-WG
形名	PHORESE			
無料修理保証	対象部分 (ただし、消耗品及び付属品は除く)	期間 お買い上げ日から1年間		
※ お買い上げ日	年月日			
※ お客様	ご住所 お名前 _____	様		
※ 販売店	住所・販売店名・電話			
ご購入日のわかる明細を貼付または本保証書とあわせて保管してください。				

●販売店様へのお願い  
必ず※印欄を記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

## ●お客様へのお願い

1. 本書をお買い上げ年月日、お客様名、販売店名が記載されているかお確かめください。  
万一記入がない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。
2. ご質問等で、本書記載のお買い上げの販売店に修理がご依頼になれない場合は、  
当社へ直接ご連絡ください。
3. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
4. 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについてご不明な場合は、  
お買い上げの販売店、又は当社に直接お問い合わせください。

発売元：エステティックTBC

〒163-0655  
東京都新宿区西新宿1-25-1  
お客様相談室  
**0120-80-1272**




**TBC**  
HOME AESTHETIC

保管用  
保証書付

## 取扱説明書

家庭用電子美容器

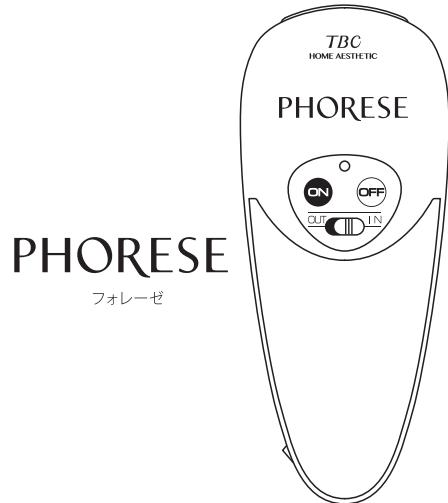

PHORESE

フォレーゼ

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
●正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。  
●お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。  
●本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

HA-PH-WG

# はじめに

この度は、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品はマイクロコンピュータでコントロールされた家庭用電子美容器です。

無刺激の電気振動※によるマッサージで、お肌の汚れを取り除いたり、化粧水や美容液の浸透をサポートし、透明感のあるみずみずしいお肌に整えます。

※お肌の汚れを取り除くOUTモードでは、1秒間に2,400回。化粧水や美容液の浸透をサポートするINモードでは、1秒間に1,200回と3,600回。

## 目 次

はじめに	1
安全上のご注意	2
製品について／製品と付属品・ご使用になる前に・化粧品の選び方	5
製品について／各部の名称	6
ご使用方法	7
お手入れの流れ	9
おすすめの手順	10
オートオフ・保管の仕方	11
電池の交換	12
よくあるご質問・製品仕様	13
保証規定	14

# 安全上のご注意

- ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 定められた手順に従って無理のない使用をお願いします。
- 異常が発生した場合はただちに使用を中止してください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので、必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをして生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

### ●注意区分について

	<b>危険</b> 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容です。
	<b>警告</b> 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	<b>注意</b> 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害※の発生が想定される内容です。

※物的損害とは、家屋・家財およびペットにかかる拡大損害を意味します。

### ●図記号について(次は図記号の例です)

	してはいけないことを示しています。
	しなければならないことを示しています。
	注意しなければならないことを示しています。

## △ 危険

次に該当する方は使用しないでください。  
医療用電子機器の誤作動を招く原因となります。

- 医療用電子機器を使用している方
  - ・ベースメーカーなどの体内植込型医療用電子機器
  - ・人工心肺など生命維持用医療用電子機器
  - ・心電計などの装着型医療用電子機器

## ⚠ 警告

次のような方は使用しないでください。  
事故やトラブルの原因となります。

- 医師の治療を受けている方
- 酒を嗜むの方
- 眠気をとる薬を服用中の方
- 顔面神経痛の方
- アレルギー体質
- 生理中、妊娠中、授乳中の方
- 成長過程の方(12歳以下の子供)
- 体調がすぐれない方
- 敏感肌または肌の弱い方
- 疲労が大きい方
- 皮膚トラブルがある方
- ステロイド等の薬を継続的に使用されている方
- アビメ性皮膚炎
- 皮膚がん病歴のある方
- 皮膚病
- 悪性腫瘍
- 内臓疾患
- 伝染病疾患
- 納核性疾患
- 高血圧
- 血液疾患
- 急性疾患



禁止

次のような部位には使用しないでください。  
事故やトラブルの原因となります。

- 静脈瘤のある部位
- 外科手術をした部位(美容整形も含む)
- 上ぶたなど目の近くやのど
- かゆみやぼうけのある部位
- 肌に傷や湿疹、はれものがある部位
- 過度に日焼けをした部位
- 顔面に金属等を埋め込んでいる部位
- 皮膚炎を起こしている部位

ご自身で判断できない場合は、使用前に医師にご相談ください。



禁止

- 本製品は、使用目的以外には使用しない。  
事故や故障の原因となります。
- 自分で意思表示できない人は使わせない。  
事故やケガの原因となります。



禁止

- 本製品を改造、分解、修理をしない。  
ケガや異常動作の原因になります。
- 電池は幼児の手の届かないところにおく。  
万一本体が電池を飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談する。
- 電池を充電、ショート、分解、変形、加熱、火にあわせるなどしない。  
発火、発熱、破裂の原因になります。
- 電池を廃棄する場合や、保存する場合には、テープなどで絶縁する。  
他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因となります。

## ⚠ 警告

● 本製品を浴室などの高温多湿の場所で使用したり、保管したり、水のかかるやすい場所におかない。  
感電、火災の原因となります。

● 本製品を高いところに使用したり、保管したりしない。  
落下により、故障の原因となります。

● 子供の手の届く場所に保管したり、使用させたりしない。  
事故やケガの原因となります。

● 本製品を水洗しない。汚れた場合は洗剤を使わず  
乾いたきれいな布で拭いた後、保管する。  
感電、火災、ショートの原因となります。

● 異臭、異常発熱したときは使用しない。  
破損、発火の原因となります。  
必ず点検・修理を受けてください。



必ず守る

## ⚠ 注意

● 本製品をシンナー、ベンジン、除光液などの溶剤で拭かない。

本製品の表面に損傷を与える原因となります。




必ず守る

● 本製品の使用中、頭痛を感じたり、お肌にかぶれを感じたり、身体に異常を感じたりした場合は、直ちに使用を中止する。

そのまま使用すると、肌トラブルの原因となります。

# 製品について

## 製品と付属品

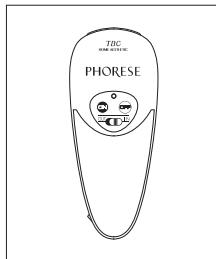

製品



取扱説明書  
(保証書付)

## ご使用になる前に

フォレーゼには、古い角質やお肌の汚れを取り除く「OUTモード」と化粧水や美容液の浸透をサポートする「INモード」の2つのモードがあります。

チタン電極にコットンパフをセットし、化粧水や美容液をしみこませ、使用目的に合わせてご使用ください。

## 化粧品の選び方


ご使用になる化粧品は、油分が配合されていないものをお選びください。

油分が配合された化粧品をご使用になられると、フォレーゼの機能が十分に発揮されません。


TBCでは、フォレーゼにご使用いただける化粧品を取り揃えています。ぜひお試しください。

## 各部の名称

- ① 電源スイッチ[ON]
- ② 電源スイッチ[OFF]
- ③ バイロットランプ
- ④ モード切替スイッチ  
OUTモード ↔ INモード
- ⑤ フィンガー電極

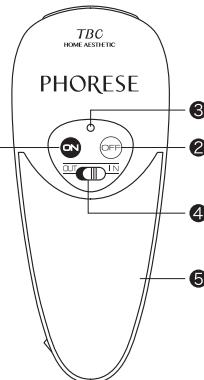

- ⑥ フレーム  
(コットンパフ押さえ)
- ⑦ オープナー  
(コットンパフ押さえ)  
(開閉ボタン)
- ⑧ チタン電極  
(コットンパフをセットする面)
- ⑨ 電池ホルダー

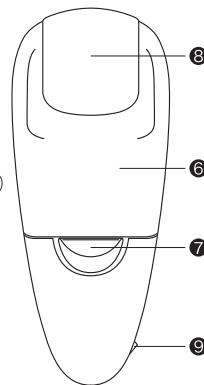

# ご使用方法

## 1 コットンパフをセットします。

オープナーを押して  
フレームを取りはずします。



新しいコットンパフをチタン  
電極全体が隠れるようにのせ  
ます。



フレームの先端を凹部に合わ  
せ、フレームの下部をパチッ  
と音がするまで矢印方向に押  
さえます。



セットしたコットンパフ全面に化粧水または美容液  
をしみ込ませてください。

## 2 電源を入れます。

電源スイッチ [ON] を押しパイロットランプの点灯を  
お確かめください。

## 3 モードを切替えます。

ご使用の目的に合わせてモード切替スイッチを切替えます。  
**OUTEモード**(ブルーに点灯)…お肌の汚れを取り除きコンディション  
を整えます。

**INモード**(オレンジに点灯)…化粧水や美容液の浸透をサポートし  
ます。

※クレンジング・洗顔後にご使用ください。

## 4 お手入れを始めます。

フィンガー電極に、しっかりと触  
れるように本体を握ります。

※しっかりと触れていないと通電されな  
いことがあります。

化粧水または美容液をしみ込ませた  
コットンパフ面を肌にあてます。通電  
中はパイロットランプが点滅します。



## 5 使用後は、コットンパフを取りはずし、ティッシュ等で

ついている化粧水や美容液等の汚れを拭き取ります。

※水洗いはできません。

コットンパフには、化粧水または美容液がケースの周辺へ、こ  
ぼれ出ない程度に適量をしみ込ませてください。少ないと、ビ  
リビリ感を感じたり正常に通電されないことがあります。

### △ 注意

- フレームをしっかりとセットしてください。  
フレームが外れケガをする場合があります。
- 化粧水や美容液以外は、ご使用にならないでください。  
お肌に異常を生じる場合があります。
- 本製品の使用中に頭痛を感じたり、お肌にかぶれを感じたり、身体に異常を感じたりした場合は、使用を直ちに中止してください。

### △ 注意



- 同じ箇所に過度に使用しないでください。  
肌トラブルの原因になります。

## お手入れの流れ

### メイク落とし、洗顔のあとに

1日合計  
**10分**

お好きなモードのみでも  
ご使用頂けます。

#### STEP.1

OUTモード(作動時はパイロットランプがブルーに点灯)

コットンパフにふだんお使いの化粧水やふきとり化粧水をしみ込ませて使用します。

使用できる化粧品

- ・化粧水
- ・ふきとり化粧水

使用時間  
**5分**

#### STEP.2

INモード(作動時はパイロットランプがオレンジに点灯)

新しいコットンパフにふだんお使いの化粧水や美容液をしみ込ませて使用します。

使用できる化粧品

- ・化粧水
- ・美容液
- ・シートマスク  
(コットンパフは不要)

使用時間  
**5分**

## おすすめの手順

1.~3.のようにお顔全体をまんべんなく行うとよいでしょう。

コットンパフをお肌に密着させ、やさしくなでるように、ゆっくりと移動させます。(または、肌に置くようにあてながら移動させてもかまいません。)

すべりにくい場合は化粧水または美容液を付け足してください。

※上まぶた、のどには行わないでください。

1.



フェイスライン・ほほ

2.



ほうれい線・目の下  
こめかみ

3.



口元～鼻の下・小鼻  
鼻すじ・額・こめかみ

## オートオフ

1. 電源スイッチを入れ2分間使用せず放置すると自動的に電源が切れ電池の消耗を防ぎます。
2. 通電中(パイロットランプ点滅時)30秒毎にブザーが鳴り時間経過をお知らせします。  
通電時間(パイロットランプ点滅時間)が5分経つと自動的に終了します。

## 保管の仕方

- 長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。  
(参照：12ページ 電池の交換)

●故障の原因になりますので機器本体を水につけたり、水洗いは絶対にしないでください。


●化粧水等がケース周辺にこぼれ出た場合は使用後に電池ホルダーから電池を取り出し、乾いた布等で水気を拭き取り良く乾燥させてください。

電池ホルダー内も濡れている場合は、拭き取った後ホルダーを開放した状態で乾燥させてください。  
(参照：12ページ 電池の交換)

●直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。

## 電池の交換

1. 電源スイッチ[OFF]を押して、電源を切り、チタン電極側を上にして電池ホルダーのツメを下方に押し回転させます。ホルダーを開いて電池を取り出します。
2. 2枚の新しい電池を、プラスが上になるように重ねて収納します。
3. 電池ホルダーを元に戻し、電源スイッチ[ON]を押して、パイロットランプが点灯すれば完了です。

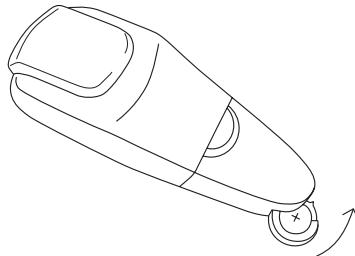

注意

- 指定(CR2032)された電池以外はご使用できません。  
(1日10分で約1.5ヶ月間使用可)



警告

- 電池は幼児の手の届かないところにおいてください。万一、お子様が電池を飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。
- 電池を充電、ショート、分解、変形、加熱、火に入れるなどしないでください。  
発火、発熱、破裂の原因になります。
- 電池を廃棄する場合や、保存する場合には、テープなどで絶縁してください。  
他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因となります。

## よくあるご質問

Q 質問	A 回答
1日に何回使用してもいいですか?	OUTモード、INモード、1日各1回の使用をおすすめします。
お風呂で使用できますか?	お風呂での使用はできません。水のかかる場所や温気の多い所で使用したり、保管しないでください。
乳液やジェル状の化粧品を使用してもいいですか?	乳液は油分が配合されており、フォレージュの効果が十分に発揮されないため、おすすめ致しません。ジェル状(油分が配合されていないもの)の化粧品は、コットンパフにしみ込むものであれば使用可能です。
シートマスクの上に使用してもいいですか?	INモードで使用できます。コットンパフは必要ありません。
コットンパフが取り付けられません。	コットンパフの厚みや形、サイズによつては、取り付けできない場合があります。別のコットンパフをご使用ください。
使用中、肌がピリピリします。	化粧水がコットンパフ全面にしみ込んでいないと、ピリピリと刺激を感じる場合があります。化粧水をつけ足し、コットンパフ全面にしみ込ませてください。
何も感じませんが、きちんと通電していますか?	微弱な電流を使用した無刺激の電気振動によるマッサージですので、使用中の体感がほとんどなくとも、パイロントラップが点滅していればきちんと通電しています。

## 製品仕様

電 源	DC6[V](電池CR2032×2)
消 費 電 流	12[mA]
出 力 周 波 数	2,400 [Hz](OUTモード) 1,200 及び3,600[Hz](INモード)
パ ル ス 出 力	5.8[V]
タ イ マ ー	5[分]
寸 法	130×55×33[mm]
重 量	80[g](含電池)

●品質改良のため予告なく一部変更することがあります。

## 保証規定

本書は、お買い上げ日より保証期間内において、正常な使用状態で故障が発生した場合、本書記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。  
詳細は下記をご参照ください。

1. 保証期間中、取扱いについての説明書等の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げの販売店に修理をご依頼の上、本書をご提示ください。お買い上げの販売店が無料修理致します。
2. 保証期間中の無料修理などアフターサービスについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、又は当社へお問い合わせください。
3. 次のような場合には、保証期間中でも有料修理になります。
  - a. 本書のご提示がない場合
  - b. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記載がない場合、あるいは字書きを書き替られた場合。
  - c. ご使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - d. お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
  - e. 火災、地震、風水害、雷、その他天災地変、塩害、公害や異常電圧による故障及び損傷。
  - f. 本製品以外の他の機器によって生じた故障及び損傷。
4. 本製品は持込修理の対象商品です。保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様のご負担となります。
5. この保証書は、本書に明示した期間の条件のもとにおいて、無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
6. 本書は、日本国内においてのみ有効です。