

保証書

持込修理

品名	家庭用EMS美容器	型番	HA-SP01
形名	スレンダーパッド(ボディ用)		
無料修理保証	対象部分	期間	
	製品 (ただし、消耗品及び付属品は除く)	お買い上げ日から 1年間	
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 〒 お名前 様		
※ 販売店	住所・販売店名・電話 ご購入日のわかる明細を貼付または本保証書とあわせて保管してください。		

●販売店様へのお願い

必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

●お客様へのお願い

1. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名が記載されているかお確かめください。
万一記入がない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。
2. ご贈答等で、本書記載のお買い上げの販売店に修理がご依頼にできない場合は、当社へ直接ご連絡ください。
3. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
4. 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、お買い上げの販売店、又は当社に直接お問い合わせください。

発売元

エステティックTBC

〒163-0655

東京都新宿区西新宿1-25-1


お客さま相談室 ☎ 0120-80-1272

取扱説明書

家庭用EMS美容器

スレンダーパッド(ボディ用)

SLENDERPAD

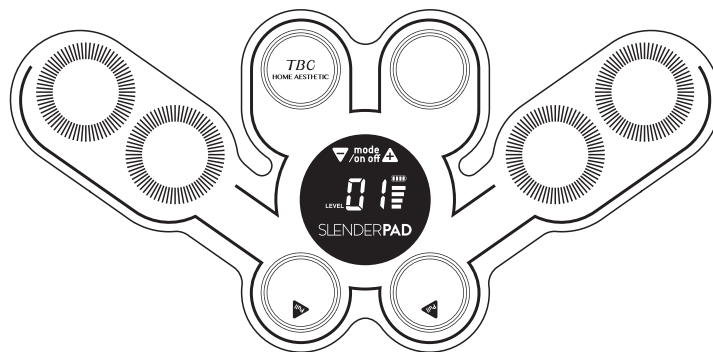

もくじ

安全上のご注意	1
製品について	
製品と付属品	7
各部の名称と働き	8
ご使用方法	
充電の仕方	10
ジェルパッドの貼り付け、取り外し方	12
ご使用手順	13
ご使用後は	
お掃除の仕方	17
保管の仕方	18

こんなときは

困った時は	19
よくある質問	21
製品仕様	23
保証とアフターサービスについて	25
保証規定	26
保証書	27

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

安全上のご注意

- ・ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- ・異常が発生した場合は、ただちに使用を中止してください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- ・注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について

	危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容です。
	警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容です。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

●図記号について(次は図記号の例です)

	してはいけないことを示しています。
	しなければならないことを示しています。
	注意しなければならないことを示しています。

危険

次に該当する方は使用しないでください。

医療用電子機器の誤作動を招く原因となります。

- 医療用電子機器を使用している方
 - ・ペースメーカーなど体内植込型医療用電子機器
 - ・人工心肺など生命維持用医療用電子機器
 - ・心電計などの装着型医療用電子機器



禁止



警告

次のような方は使用しないでください。事故やトラブルの原因となります。

- 心臓に疾患がある方 ●医師の治療を受けている方 ●急性疾患
- 結核性疾患 ●高血圧 ●発熱している方 ●伝染病疾患
- 成長過程の方(12歳以下のお子様) ●悪性腫瘍 ●皮膚病
- 血液疾患 ●内臓疾患 ●アレルギー体質 ●アトピー性皮膚炎
- 敏感肌または肌の弱い方 ●疲労が激しい方 ●酒気帯びの方
- 皮膚トラブルがある方 ●体調がすぐれない方 ●神経痛の方
- 眠気をさそう薬を服用中の方 ●皮膚がん病歴のある方
- 皮膚に知覚、痛覚、温度感覚の障害のある方
- 生理中、妊娠中、授乳中の方 ●ジェルパッドが合わない方
- 物理的刺激などによる病的なシミのある方
- ステロイド等の薬を持続的に使用されている方
- 肝機能障害で毛細血管拡張症を起こしている方



禁止

指定の部位以外や次のような部位には使用しないでください。

事故やトラブルの原因となります。

- 静脈瘤のある部位 ●整形手術をした部位
- 傷・ケロイドのある部位 ●刺青(タトゥー)のある部分
- 過度な日焼けで肌がヒリヒリし、炎症を起こしている部位
- 唇・口腔内や性器及び周辺の粘膜など ●頭部 ●顔
- 眼球、まぶたなど目の周辺 ●ウイルス性のイボのある部位
- ホクロやシミ、あざのある部位 ●かゆみやほてりのある部位
- 皮膚が化膿して炎症を起こしている部位 ●胸部および心臓の周辺
- 体内に金属等を埋め込んだ部位 ●指定以外の部位
- 当日脱毛処理した部位

ご自身で判断できない場合は、使用前に医師にご相談ください。

●頭部には絶対に使用しない。

ケガの原因となります。

●自分で意思表示できない人には使わせない。

事故やケガの原因となります。

●過剰な連続使用はしない。(業務としての使用など)

ケガ、やけどなどの原因となります。

※業務用として使用された場合は修理をお受けできません。



禁止



警告

- アルコール、シンナー、ベンジン、除光液など引火性のあるものの近くで
使用しない。
火災、感電、ケガの原因になります。
- 他の電気製品(美容器)との同時使用はしない。
事故、感電、肌トラブル、ケガの原因となります。
- 必ず身に付けている金属(ベルト、ネックレス等)を外して使用する。
感電、肌トラブル、やけどの原因となります。
- 電極部をお肌に強く押し付けたり、1ヵ所へ長時間固定したままにしない。
やけど、肌トラブルの原因となります。
- 就寝時には使用しない。
断線、動作不良、やけどの原因となります。
- 自動車等を運転しながら使用しない。
事故、ケガの原因となります。
- 運動時に使用しない。
やけど、肌トラブルの原因となります。



禁止

- 本製品を改造、分解、修理をしない。
発火や感電、異常動作によるケガの原因になります。
- USBケーブルを無理に曲げたり、重い物をのせたりしない。
感電、発火、ショート、断線の原因となります。
- USBケーブルのケーブル部分を引っ張ったり、ぬれた手でACアダプターを触ったりしない。
感電、発火、ショート、断線の原因となります。
- ACアダプターを水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。
感電、発火、ショートの原因となります。
- ACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電、発火、ショートの原因となります。
- 本体に重いものを置いたり、使用中落下させたり、強い衝撃を与えない。
故障、動作不良の原因となります。



禁止



警告

- ACアダプターをコンセントから抜いたり差し込んだりする際は、必ずプラグ部分を持って行う。(プラグの金属部に触れないようにする)
感電、発火、ショートの原因となります。
- ACアダプターのプラグの部分にほこりや水がついている場合は、乾いたタオルで拭く。
感電、発火、ショートの原因となります。
- 必ず交流100V(日本国内専用)で使用する。
火災、感電、発火、故障の原因となります。
- USBケーブル、ACアダプター及び本製品の損傷、水ぬれにより本製品が正常に作動しない場合は、販売元で(有償)必ず点検と修理を受ける。
発火、感電、ケガの原因となります。
- 異臭、異常発熱したときは使用しない。
破損、発火、故障の原因となります。
- ストーブや電熱器具の近くで本製品を使用しない。
発熱、発火、故障の原因となります。



必ず守る

- 本製品を浴室などの高温多湿の場所で使用したり、保管したり、水のかかりやすい場所におかない。
感電、火災の原因となります。
- 本製品を高いところで使用したり、保管したりしない。
落下により、故障の原因となります。
- 子供の手の届く場所に保管したり、使用させたりしない。
事故やケガの原因となります。
- 本製品を水洗いしない。汚れた場合は洗剤を使わず乾いたきれいな布で拭いた後、保管する。
感電、火災、ショートの原因となります。
- 必ず専用のACアダプターを使用する。ACアダプターは、コンセントに直接差し込みタコ足配線はしない。
感電、発火、ショート、故障の原因となります。
- 充電ジャックに水が付着していないことを確認してから充電する。
充電は水気のない室内で行う。
感電、発火、ショートの原因となります。



必ず守る



注意



禁止

- 本体にヒビや亀裂があったり、電極部に不具合がある場合は使用しない。
肌トラブル、ケガの原因となります。
- 子供やペットには使用しない。
ケガの原因となります。



禁止

- 本製品をアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などの溶剤で拭かない。
本製品の表面に損傷を与える原因となります。
- 屋外では使用しない。
故障、動作不良の原因となります。
- 本体に液体をこぼさない。
故障、動作不良の原因となります。
- 本体を金属や硬い物にあてない。
発熱、発火、故障、破損の原因となります。
- USBケーブルを接続したままの状態で使用しない。
故障、動作不良の原因となります。



注意



必ず守る

- ジェルパッドを電極部に貼りつける際、スレンダーパッドの装着の際は必ずコントローラーの電源を切った状態で行う。
やけど、動作不良の原因となります。
- 必ず専用のジェルパッドを使用する。
肌トラブル、やけどの原因となります。
- 破損や劣化、汚れたジェルパッドは使用しない。
動作不良や痛み、やけどの原因となります。
- スレンダーパッドを折り曲げた状態でジェルパッドを電極部に貼付けない。
動作不良や痛み、やけどの原因となります。
- 浴槽内で使用しない。サウナや岩盤浴へは持ち込まない。
ケガ、故障の原因となります。
- 初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1から使用する。
事故、ケガの原因となります。
- 途中で気分が悪くなったり、お肌に異常があらわれた場合は、直ちに使用を中止する。
翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。




必ず守る


- 以下の項目は必ず守る。
事故、ケガ、肌トラブル、本体が故障する原因となります。
- ・お肌の状態にあわせて使用する。
- ・お肌に発疹、炎症、かゆみ等の異常を起こしている場合は使用しない。
- ・当日脱毛処理した部位、日焼け直後、ピーリングとの併用は控える。
- ・使用後は必ず電源を切る。

製品と付属品

●製品

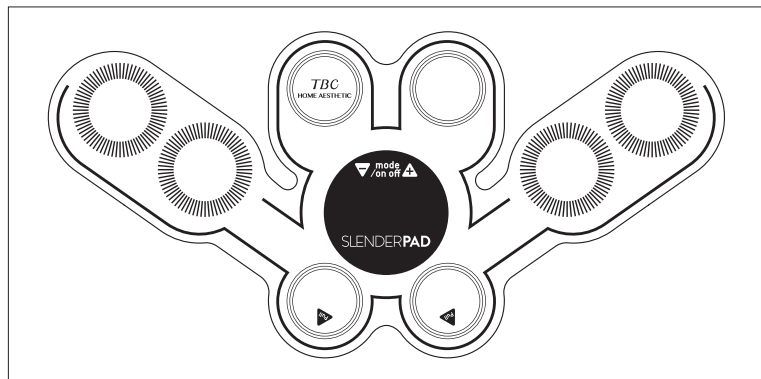


●付属品

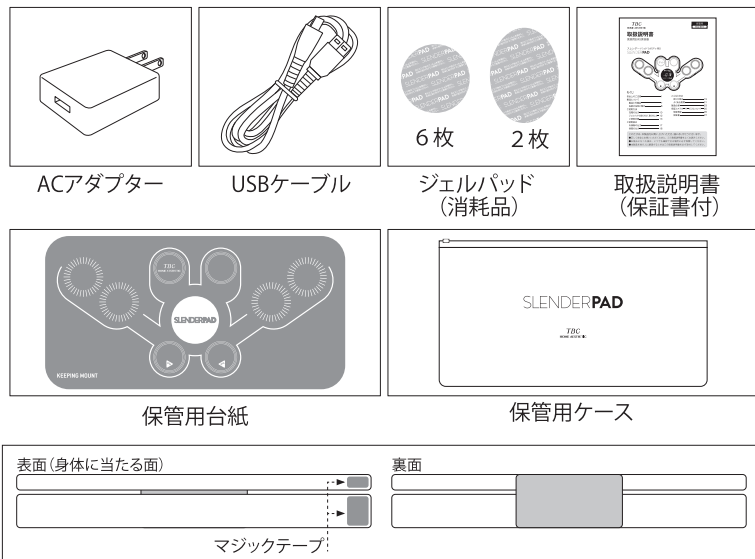

サポートベルト

各部の名称と働き

●本体(コントローラー+スレンダーパッド)

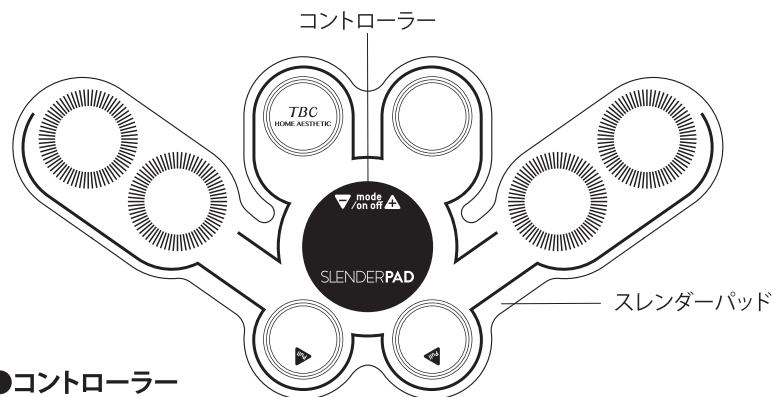

●コントローラー

◆表面(上面/底面)

① LCD表示部

EMSモード、EMS出力レベル、タイマー時間(カウントダウン表示)、バッテリー残量を表示します。

【LCD表示例】

●電源オン時



●EMSモード『3』選択時



●EMS出力レベル「7」選択時



●タイマー表示(残量時間: 18分)



●EMS通電時




→通電表示
バググラフ

●バッテリー表示



フルの状態

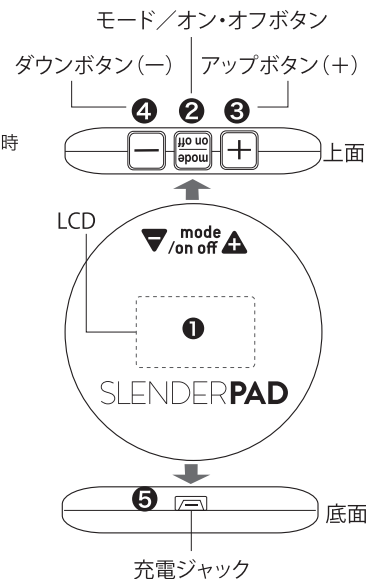

※バッテリーの残量が少なくなると、1秒毎に『ピッ』、『ピッ』…とブザー音が発生し、要充電をお知らせします。36秒後に自動的に電源がオフになります。

各部の名称と働き

②モード／オン・オフボタン

コントローラーの電源オン／オフとEMSモードを選択するボタンです。

このボタンを長押し(1秒以上)すると『ピーツ』というブザー音が発生し、コントローラーの電源がオンになります。入力を確認されると、LCD表示部にEMSモードの初期値『01』とバッテリー残量が表示されます。電源が入った状態で、このボタンを短押しすると以下の順でEMSモードが選択できます。



01 → 02 → 03 → 01 → 02 → 03 → 繰り返し表示

電源オンの状態で、このボタンを長押し(1秒以上)すると『ピーツ』というブザー音が発生し、電源がオフになります。

③アップボタン(+)

EMS出力レベルの設定をアップする時に使用するボタンで、このボタンを短押しするとEMS出力レベルの設定表示が1段階ずつアップします。

④ダウンボタン(-)


EMS出力レベルの設定をダウンする時に使用するボタンで、このボタンを短押しするとEMS出力レベルの設定表示が1段階ずつダウンします。

⑤充電ジャック

充電用USBケーブルのプラグを接続するジャックです。

●スレンダーパッド

◆裏面

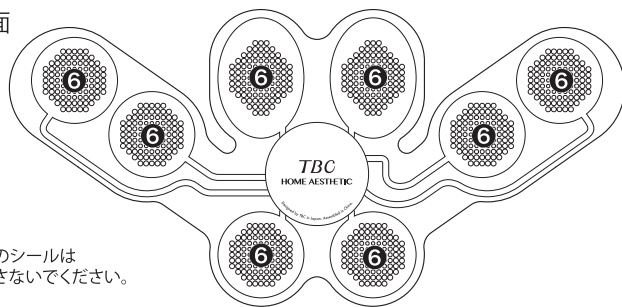

※中央のシールは剥がさないでください。

⑥電極部(8極)

EMS電流が出力される電極部です。

ご使用方法

充電の仕方

●コントローラーの充電について

◆ACアダプターを用いて充電する場合

1. 付属のUSBケーブルの充電プラグをコントローラーの充電ジャックに差し込みます。
2. ACアダプターをコンセントに差し込みます。
3. 充電が開始されると、コントローラーLCD表示部のバッテリー表示が点滅動作し、充電が完了すると表示が点灯状態になります。(8ページ参照)
4. 充電が完了したら、コントローラーからUSBケーブルの充電プラグを取り外し、コンセントからACアダプターを外します。



◆パソコンを用いて充電する場合


1. ACアダプターからUSBケーブルを取り外します。
2. USBケーブルの充電プラグをコントローラーの充電ジャックに差し込みます。
3. USBケーブルをパソコンのUSB端子に差し込みます。
4. 充電が開始されると、コントローラーLCD表示部のバッテリー表示が点滅動作し、充電が完了すると表示が点灯状態になります。
5. 充電が完了したら、コントローラーからUSBケーブルの充電プラグを取り外し、パソコンからUSBケーブルを外します。



※パソコンの機種や使用状況や環境によっては、正常に動作しない場合があります。充電時によるパソコン等の機器のトラブルや故障等に関しては保証の対象外となります。

充電の仕方

◆バッテリー充電時のLCD表示

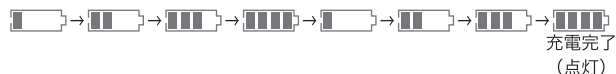

◆1.5時間の充電で、EMS出力レベル5～6の設定で約10回ご使用になれます。 (ACアダプター使用の場合)

◆充電池について

内蔵されている充電池は消耗品になります。

充電を繰り返し行ったり、長時間ご使用にならなかった場合は少しずつ充電池が劣化・消耗しますので交換(有償)をお勧めします。



注意

●USBケーブルのケーブル部分を引っ張ったり、ぬれた手でACアダプターを触ったりしないでください。

感電、発火、ショートの原因となります。

●充電する際は、USBケーブルの充電ジャックをコントローラーの充電ジャックに接続してから、ACアダプターをコンセントに差し込んでください。

ショートする恐れがあります。

●USBケーブルをコントローラーに接続した状態で使用しないでください。
ケガ、故障等の原因となります。

※充電中、コントローラーは動作しません。

ご使用の際は、充電を完了させコントローラーからUSBケーブルの充電プラグを取り外してください。

ジェルパッドの貼り付け、取り外し方


●ジェルパッドの貼り付け、取り外し方について

※ジェルパッドは必ず専用のものを使用してください。専用品以外を一度でも使用した場合は、保証の対象外とさせていただきます。

※手でジェルパッドを触るときは、事前に手を洗うことをおすすめします。


※ジェルパッドに裏表はありません、どちらの面でも使用できます。間違えて貼ってしまっても貼り直す必要はありません。

【ジェルパッド断面図】

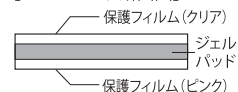

◆ジェルパッドの貼り付け方

1. ジェルパッドの保護フィルム(ピンク)を剥がしてください。(8枚)
2. ジェルパッドの粘着面をスレンダーパッドの電極部(8ヵ所)の形にあわせ、接着面に空気が入らないようにしっかり貼り付けてください。
3. もう1枚の保護フィルム(クリア)は、お肌に装着する際に剥がしてください。

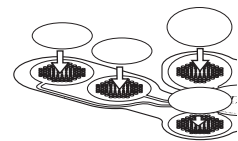

注意

●ジェルパッドを電極部に貼り付ける際は、必ずコントローラーの電源を切った状態で行ってください。

●ジェルパッドをスレンダーパッドの電極部に貼り付ける際は、ジェルパッドとジェルパッドが重ならないように貼り付けてください。

●間違えて服や布などに貼り付いて剥がれないときは、無理に剥がさないでください。服や布の裏側からわずかな水でぬらすと、簡単に剥がれます。

◆ジェルパッドの取り外し方

1. 使用済みのジェルパッドをスレンダーパッドの電極部(8ヵ所)からゆっくり剥がしてください。
2. 電極部にジェルパッドのかげらが残らないようにきれい剥がしてください。
3. ジェルパッドを剥がした電極部をウェットティッシュ等できれいに拭きとり、汚れを取り除いてください。その後水気が残らないようにティッシュ等で拭きとってください。



注意

●ジェルパッドを電極部から取り外す際は、必ずコントローラーの電源を切った状態で行ってください。

●電極部にジェルパッドのかげらが残っていると、次に新しいジェルパッドを貼って使用した場合、通電不良の原因になる場合があります。

◆ジェルパッドの交換時期について

ジェルパッドは消耗品です。以下のようなときは新品と交換してお使いください。

・粘着力の低下、粘着面の乾燥、取り除けない汚れが生じたとき。

・開封1ヵ月を過ぎたとき、またはご使用回数が30回に達したとき。


ジェルパッドを新しいものと交換する際は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

※ジェルパッド(1袋8枚入)【別売・オプション品】

ご使用手順

●スレンダーパッドの装着について

1. スレンダーパッドに貼り付けたジェルパッドのフィルム(クリア) 8枚を剥がします。
2. 下図の様にスレンダーパッドを腹部に装着します。

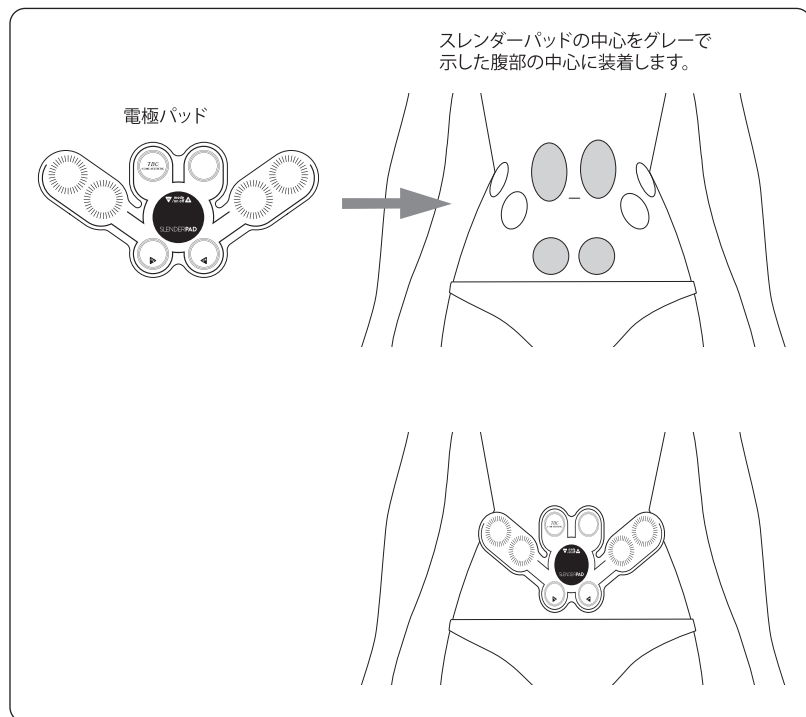

3. スレンダーパッドの上から全体を腹部に押しつけてお肌に密着させます。
4. スレンダーパッドをお肌に密着させたら、スレンダーパッドの上からサポートベルトを巻き付けてください。




注意

- スレンダーパッドを装着の際は、装着部(腹部)の汗や水分を拭き取ってから装着してください。
通電不良、動作不良の原因となります。
- ジェルパッドをお肌に密着させてください。
通電不良、動作不良の原因となります。

●サポートベルトの装着について


1. 下図の手順に従い、装着したスレンダーパッドの上からサポートベルトを装着してください。

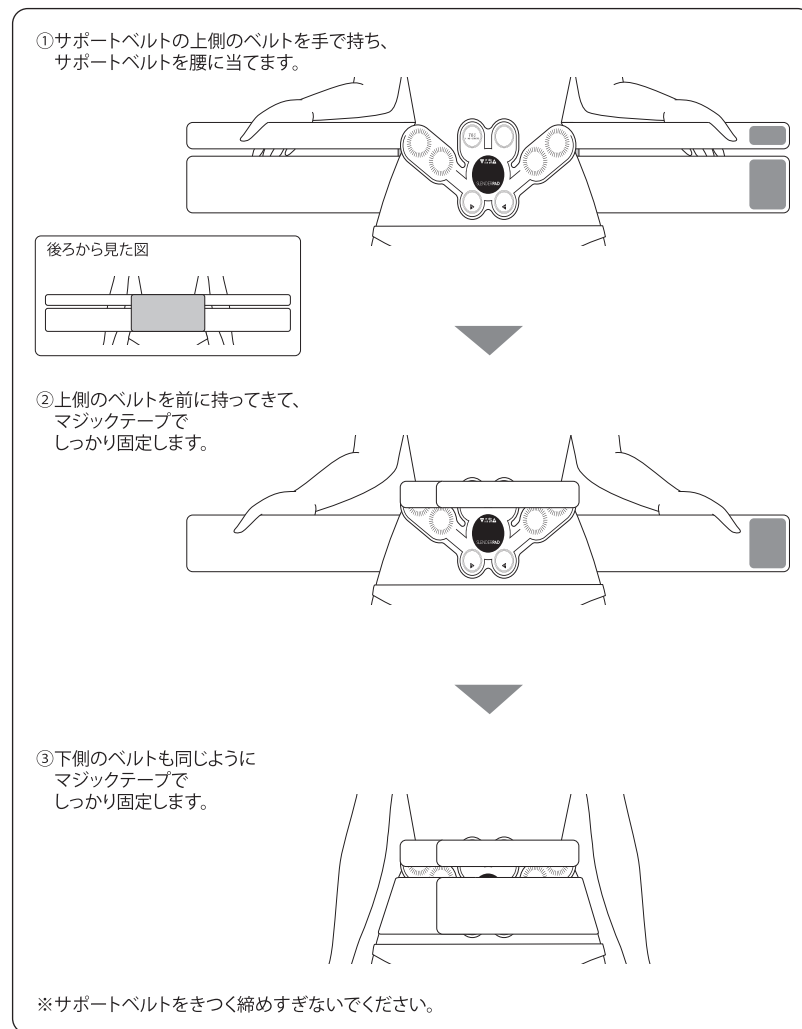

ご使用手順

●コントローラーの操作について

1. コントローラーのモード／オン・オフボタン(②)を長押し(1秒以上)してコントローラーの電源を入れます。電源が入ると『ピーッ』というブザー音が発生し、コントローラーのLCD表示部(①)にEMSモードの初期値『01』とバッテリー残量が表示されます。バッテリーの残量が少なくなっている場合は、10ページの『充電の仕方』に従って充電してください。

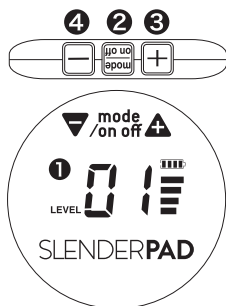

2. モード／オン・オフボタンを短押ししてEMSモードを選択します。ボタンを短押しするたびに『ビッ』というブザー音が発生し、以下の順でEMSモードが選択できます。

01 → 02 → 03 → 01 → 02 → 03 → 繰り返し表示

【EMSモード】

01モード: 5Hzの連続波でたたくような刺激が続きます。

02モード: 20Hzの連続波で引き締めるような刺激が続きます。

03モード: 3、5、10、20Hzのオートプログラムでトレーニング。

※初めてご使用になる場合は、01モードからお試しいて頂くことをおすすめします。

3. EMSモードを選択したら、アップ(③)ダウン(④)ボタンにてEMS出力のレベルを設定します。設定できるEMSの出力レベルは、1～10の10段階です。
※出力レベルを設定する際は、レベル1から体感に合わせて徐々に上げていってください。
※EMSモードを変更した場合、出力はスタンバイに戻ります。再度、出力レベルを選択してください。
※出力レベルの初期値は0となっています。

4. 通電が開始されるとLCD表示部右側の通電表示バーグラフが下から順にアップしていきます。



※トリートメント中、『ピーッ』という通電確認用のブザー音が5分間隔で発生します。

※セーフティモード: トリートメント中、スレンダーパッド電極部が浮いたり肌に密着されていない場合は、1秒毎に『ピーッ』、『ピーッ』…とブザー音が発生し、密着不良をお知らせし、2分後自動的に電源がオフになります。

電極部の密着状態をご確認の上、再スタートしてください。この時、出力レベルは0になります。

レベルを変更しない場合は2分後に電源オフとなります。

※省エネモード: トリートメント中、出力レベルやモード変更等ボタン操作を1分以上行わない場合、省エネモードに入りコントローラーのLCD表示部が消灯します。

再度LCDの表示を確認したい場合は、モード／オン・オフボタン、アップ(+)ダウン(-)ボタンのいずれかを短押ししてください。LCDが点灯表示されます。

※EMSの体感が左右で異なる場合は、電源をオフにして位置を調整してから再度電源を入れてご使用ください。

5. 各モードとも最後に操作を行ってから約20分経過すると『ピーッ』というブザー音が発生し自動的に電源がオフになります。

残り時間は、コントローラーのLCD表示部に約10秒間隔で表示されます。



注意

●スレンダーパッドは、体の部位とスレンダーパッドが正しく密着できていない状態で使用しないでください。


やけど、ケガの原因になります。

●スレンダーパッドの位置を変更する場合は、必ずコントローラーの電源を切ってから行ってください。

やけど、ケガ、動作不良の原因となります。


●スレンダーパッドの電極部に金属を接触させないでください。
動作不良、故障の原因となります。

6. トリートメントが終了したら、下記の手順でスレンダーパッドを取り外し、保管用台紙に貼り付け保管してください。

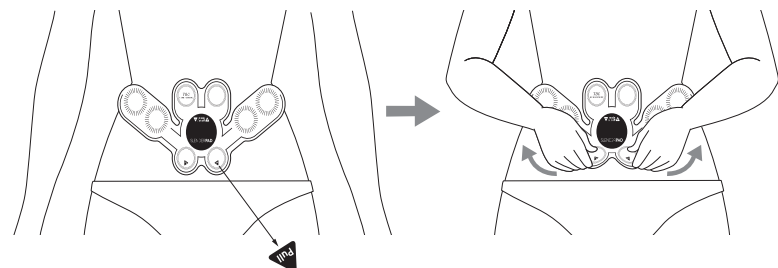

スレンダーパッドの下側(▼)と表示された部分からゆっくり上側に向かって取り外してください。

※本体を無理に引っ張ったり、一部だけを持って剥がそうとしないでください。

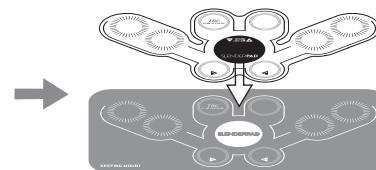

お掃除の仕方

●本体について

- ◆ご使用後は必ずお手入れを行ってください
本体に付着した水分や汚れを柔らかい布やティッシュなどでよく拭き取ってください。


◆汚れがひどい場合や通電不良が起きた場合のお掃除のしかた

本製品は、コントローラーとスレンダーパッドを取り外すことができます。
以下の手順でスレンダーパッドからコントローラーを取り外し、お掃除をしてください。


1. コントローラーを上から軽く持ち上げ、スレンダーパッドと固定しているスナップボタンを1個1個取り外してください。固定しているスナップボタンは、4個あります。

2. スレンダーパッドとコントローラーを柔らかい布やティッシュなどでよく拭き取ってください。
特にスレンダーパッドとコントローラーを接続している端子部分は念入りにお掃除してください。


3. お掃除が終了したら、スレンダーパッドにコントローラーを取り付けてください。取り付けの際は、コントローラーを上から軽く押し、『カチッ』と音がすることを確認し、確実に取り付けてください。

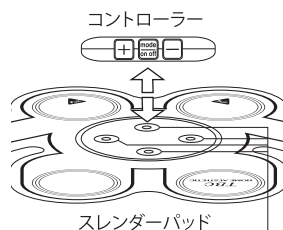

コントローラー底面

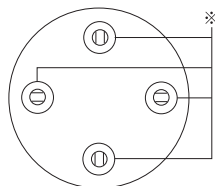

※接続スナップ端子
スレンダーパッド:凸
コントローラー:凹

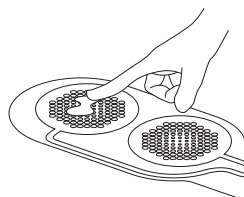

●ジェルパッドについて

ジェルパッドの粘着面が汚れていたり、粘着力が低下したら以下の手順でお手入れしてください。

1. 指先に水滴をつけてジェルパッドの粘着面をやさしくこすり、汚れを取り除いてください。またはウェットティッシュ等に水を含ませ、表面の汚れを取り除いてください。
2. 水気を切って粘着面を上にし、風通しのよい日陰で自然乾燥させてください。
3. 表面の水気がなくなったら本体を台紙に貼り付けてください。



注意

- 必ず本体の電源を切ってから行ってください。
- 本体を水洗いしないでください。
- 熱を加えて乾かさしないでください。
- 本体をアルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などの溶剤で拭かないでください。

保管の仕方

- 長期間使用しないときは、本体のお掃除をしてから保管用台紙に貼り付け、保管用ケースに収納して保管してください。
- 使用しないときは、コントローラーの電源をオフにし、ACアダプター及びUSBケーブルを外して保管してください。
- ストーブやヒーターのそば、浴室など高温多湿な場所、車の中、直射日光のあたる場所、不安定な場所、高所での保管は避けてください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しなかった本製品を再び使用する時は、使用する前に必ず本製品が正常、かつ安全に動作することを確認してから使用してください。

困ったときは

本製品をご使用中に異常や、以下の症状がみられる場合は、原因と処置方法をご確認ください。

原因が特定できない場合は、本製品を分解などせずに、お買い求めの販売店にご相談ください。充電電池交換をご希望の場合は、販売店または当社にご相談ください。

こんな症状	考えられる原因	処置方法
コントローラーの電源が入らない。	→ 充電電池の残量がない。	→ 充電を行ってください。
	→ モード／オン・オフボタンを長押ししていない。	→ モード／オン・オフボタンを長押ししてください。
	→ 充電中である。	→ 充電を完了させ、USBケーブルをコントローラーから取り外してください。
コントローラーの電源が切れる(充電しても数分しか使えない)。	→ 充電不足。	→ 約1.5時間充電を行ってください。(ACアダプター使用の場合)
充電できない。 または、充電表示が点滅しない。	→ USBケーブルの充電プラグがコントローラーの充電ジャックに差し込まれていない。 または、接続不良。	→ USBケーブルの充電プラグをコントローラーの充電ジャックにしっかり差し込んでください。
	→ すでに満充電になっている。	
使用中に電源が切れる。	→ 最後に操作を行ってから20分以上経過している。	→ 最後に操作を行ってから20分経過すると自動的にオフになります。
	→ スレンダーパッドがしっかり密着していない。	→ アラーム音となり2分経過すると自動的にオフになります。
	→ 電源を入れた後に未操作。	

こんな症状	考えられる原因	処置方法
EMSの出力が感じられない。 (弱い)	→ スレンダーパッド裏面のジェルパッドが肌に密着していない。	→ サポートベルトを用いてスレンダーパッド裏面のジェルパッドを肌に密着させてください。
	→ ジェルパッド自体の粘着力が低下している。	→ 新しいジェルパッドと交換してください。 ジェルパッドは、消耗品です。
	→ 出力設定のレベルが低い。	→ EMSの出力レベル設定アップ(+)ボタンで出力を上げてください。
	→ 感じ方には個人差があります。	
EMSの出力が痛い。 (強い)	→ スレンダーパッド裏面のジェルパッドが肌全体に密着していない。	→ サポートベルトを用いてスレンダーパッド裏面のジェルパッドを肌全体に密着させてください。
	→ 出力設定のレベルが高い。	→ EMSの出力レベル設定ダウン(-)ボタンで出力を下げてください。

よくある質問

Q	A
お風呂、サウナや岩盤浴で 使用できますか？	本製品は、防水仕様になっていないため、ご使用になれません。 絶対にお風呂やサウナ、岩盤浴で使用しないでください。
毎日使用できますか？	毎日ご使用できます。ただし、1日1回（20分）までとしてください。同じ箇所への繰り返し使用は筋肉疲労を起こす恐れがあるため、お控えください。身体やお肌に異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。
どのレベルで使えば よいですか？	初めてお使いになるときは、低いレベル「レベル1」に設定してください。低いレベルで慣れてきたら、体感に合わせて徐々に上げてください。
使用できない部位は ありますか？	本製品は腹部専用です。腹部以外には使用しないでください。
ビリビリ感じますが 大丈夫ですか？	慣れるまでは「01モード（5Hz）」の「レベル1」でご使用されることを推奨いたします。体感には個人差があります。強い痛みを感じた場合は、ご使用をお控えください。
化粧水やボディクリーム等を 塗ってから 使用してもよいですか？	ジェルパッドの粘着力が低下し、通電しにくくなってしまいます。そのため、お肌には何もつけない状態でご使用ください。

Q	A
ジェルパッドの 交換時期はいつごろですか？	使用環境にもよりますが、開封1ヶ月を過ぎたとき、またはご使用回数が30回を達しましたら交換してください。
スレンダーパッドが すぐ取れてしまうのですが	ジェルパッドの粘着力が低下して、剥がれやすくなっています。指先に水滴をつけてジェルパッドの粘着面をやさしくこする、またはウェットティッシュ等に水を分含ませ、表面の汚れを取り除いてください。
筋肉痛は 起こりますか？	スレンダーパッドはトレーニングと同様に筋肉痛が起こる場合があります。筋肉痛がある場合はご使用をお控えいただくか、低いレベルでご使用ください。
睡眠時 使用できますか？	睡眠中は使用しないでください。 寝返りなどにより断線、動作不良、やけどやケガ、肌トラブルの原因になります。
運動中 使用できますか？	運動中は使用しないでください。パッドがずれたり、剥がれたりして、やけどやケガ、肌トラブルの原因になります。

製品仕様

電 源 方 式	充電式
定 格 電 源	ACアダプター 入力:AC100-240V 50/60Hz 出力:DC5V 0.5A コントローラー DC3.7V 240mAh
消 費 電 力	500mW(充電時)
出 力 周 波 数	01モード:5Hz 02モード:20Hz 03モード:3Hz/5Hz/10Hz/20Hz
使 用 電 池	リチウムイオン電池
充 電 時 間	約1.5時間(ACアダプター使用の場合)
製 品 サ イ ズ	約173mm(L)×358mm(W)×17mm(H) (コントローラー含む)
製 品 重 量	約115g(コントローラー含む)

※本製品の性能等を改善するための設計及び仕様は、予告なく変更される場合があります。

●充電池について

充電池は消耗品です。(保証対象外)

充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます。

(充電回数は約300回が目安です)

充電池交換をご希望の場合は、販売店または当社にご相談ください。

●本製品の廃棄について

本製品はリチウムイオン電池を使用しています。

資源を有効に活用するため、充電式電池リサイクル店へお持ちいただくか、自治体の指示に従って廃棄してください。



●本製品は、日本国内用に設計・販売しております。

海外での修理やアフターサービスは対象外です。

●本製品は、屋内専用です。

●取扱説明書の内容について

本書は製品開発にさきがけて印刷しています。性能や操作性向上のため、製品仕様の一部が変更となることがあります。その場合は、製品自体の仕様が優先されます。

愛情点検 ●長年ご利用の製品の点検を!			
	こんな症状はありますか?	●電源を入れても動作しない。 ●本体が異常に熱い、焦げ臭い。 ●異常な音ができる。 ●USBケーブルを動かすと充電したりしなかったりする。 ●その他の異常がある。	ご使用中止!! 故障や、事故防止のため本製品の電源を切り、必ずご購入の販売店に点検・修理をご相談ください。

保証とアフターサービスについて

1. 本製品には、本書の裏表紙に保証書がついています。

お買い上げの販売店での所定事項の記入をご確認いただき、保証内容をよくお読みになって大切に保管してください。所定事項の記入がないと保証は有効となりませんので、そのときはお買い上げの販売店へ記入をお申しつけください。

2. 保証期間中に修理を依頼されるとき

本取扱説明書をよくお読みいただき、本製品に異常がある場合は、お買い上げの販売店に保証書をご提示の上、修理を依頼してください。保証書の規定により無償で修理させていただきます。

3. 保証期間後に修理を依頼されるとき

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により本製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理致します。

● 個人情報のお取扱いについて

本製品の修理等に際してお預かりするお客様のお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理致します。また、お客様の同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客様がお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただく場合があります。

〈利用目的〉

・商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理のみ対応させていただきます。

〈業務委託の場合〉

・上記目的以外の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。

お問い合わせ先

発売元

エステティックTBC

〒163-0655

東京都新宿区西新宿1-25-1

お客さま相談室 ☎ 0120-80-1272

保証規定

本書は、お買い上げ日より期間内において、正常な使用状態で故障が発生した場合、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記をご参照ください。

1. 保証期間中、取扱いについての説明書等の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げの販売店に修理をご依頼の上、本書をご提示ください。お買い上げの販売店が無料修理致します。

2. 保証期間中の無料修理などアフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、又は当社へお問い合わせください。

3. 次のような場合には、保証期間中でも有料修理になります。

- a. 本書のご提示がない場合
- b. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記載がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- c. ご使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷。
- d. お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
- e. 一般家庭以外（例えば業務用）に使用された場合の故障及び損傷。
- f. 火災、地震、風水害、雷、その他天災地変、塩害、公害や異常電圧による故障及び損傷。
- g. 本製品以外の他の機器によって生じた故障及び損傷。

4. 下記の部品（付属品）は保証期間内でも有料となります。

- ・ACアダプター ・USBケーブル ・保管用台紙
- ・保管用ケース ・サポートベルト ・ジェルパッド

5. 本製品は持込修理の対象商品です。保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様のご負担となります。

6. この保証書は、本書に明示した期間の条件のもとにおいて、無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

7. 本書は、日本国内においてのみ有効です。